



製造元原本の翻訳です

UL3000 Fab, UL3000 Fab PLUS

ULTRATEST™ センサー技術を備えたヘリウムリークテスター

カタログ番号

550-200, 550-250

ソフトウェアバージョン

1.63以降

iina73jp1-10-(2402)



INFICON GmbH

Bonner Straße 498

50968 Köln, Germany

目次

1	この取扱説明書について	10
1.1	対象の読者	10
1.2	警告	10
1.3	用語の定義	11
2	安全	14
2.1	対象の用途	14
2.2	オペレーターの義務	16
2.3	ユーザーへの要求事項	16
2.4	危険性	17
3	納入品、搬送、保管	19
4	説明	23
4.1	機能	23
4.2	運転モード	23
4.2.1	運転モード「真空」	23
4.2.2	運転モード「スニファー」	24
4.2.3	運転モード「オートリークテスト」	25
4.3	デバイスのセットアップ	26
4.3.1	デバイス全体	26
4.3.2	コントロールユニット	29
4.3.2.1	START ボタン	31
4.3.2.2	STOP ボタン	31
4.3.2.3	ZERO ボタン	32
4.3.2.4	ボタン LED の意味	33
4.3.2.5	ステータス LED の意味	34
4.3.2.6	タッチスクリーンの構成	34
4.3.3	真空接続	36

4.3.3.1	インレット	36
4.3.3.2	排気.....	37
4.3.3.3	パージガス接続部.....	38
4.3.3.4	ベント接続部	38
4.3.4	アクセサリおよび制御信号接続部	39
4.3.5	デバイス上の記号	40
4.4	技術データ	40
4.5	工場出荷時設定	42
5	取り付け	48
5.1	セットアップ.....	48
5.2	アクセサリの接続.....	53
5.3	スニファーラインSL3000用ブラケットの取り付け（アクセサリ、オプション）	59
5.4	電源システムへの接続	60
5.5	デバイスの運転確認.....	61
6	運転.....	63
6.1	デバイスをオンする	63
6.2	基本設定	63
6.2.1	ユーザーインターフェースの言語の設定	64
6.2.2	日付・時刻・タイムゾーンの設定	64
6.2.3	ユーザープロファイルの設定	64
6.2.3.1	ユーザー権限の一覧	64
6.2.3.2	ユーザープロファイルの選択、編集、作成.....	65
6.2.3.3	個人設定の変更.....	66
6.2.4	自動ログインのオフ.....	67
6.2.5	自動ログインのオン.....	67
6.2.6	測定画面の表示.....	68
6.2.6.1	線グラフ表示の変更	69
6.2.6.2	バーグラフ表示の変更.....	70
6.2.6.3	円グラフ表示の変更	71

6.2.6.4	一般表示設定の変更	71
6.2.7	オートリークテストの結果表示.....	72
6.2.8	単位の変更.....	73
6.2.9	オーディオ設定の変更.....	74
6.2.10	保護設定の変更.....	75
6.2.11	「スニファーチップフィルター」または「エアフィルター」の保守間隔の設定.....	77
6.2.12	保守要求の有効化または無効化.....	77
6.2.13	校正要求の有効化・無効化.....	78
6.2.14	操作オプションの拡大または縮小.....	79
6.2.15	お気に入りの使用	79
6.2.16	通知のオン／オフ	80
6.3	測定のための設定	81
6.3.1	動作モードの選択	81
6.3.2	ガスの選択.....	81
6.3.3	セットポイントの設定.....	81
6.3.4	真空レンジの有効化.....	82
6.3.5	フォアラインポンプの速度への影響	82
6.3.6	自動リークテストの設定	83
6.3.6.1	測定チャンバーのバックグラウンドの考慮.....	83
6.3.7	HYDRO•S (UL3000 Fab PLUS のみ)	84
6.3.7.1	HYDRO•S の設定 (UL3000 Fab PLUS)	84
6.3.7.2	HYDRO•S の使用 (UL3000 Fab PLUS)	85
6.3.8	装置係数の設定.....	85
6.3.9	外部校正リークの設定.....	86
6.3.10	圧力限界の変更.....	86
6.3.11	ZERO 機能の設定と適用	87
6.3.12	ベント、ページ、再生.....	89
6.3.13	リークレートフィルターの変更.....	91
6.3.14	バックグラウンド抑制の変更	91

6.3.14.1	インレット領域のバックグラウンドの測定.....	93
6.3.15	SL3000 のオーディオ/LEDの設定変更 (UL3000 Fab PLUS のみ)	93
6.3.16	スニファーラインの圧力モニターの変更	94
6.3.17	校正.....	94
6.3.17.1	内部校正	95
6.3.17.2	外部校正	95
6.3.17.3	大気中のヘリウムによる校正 (スニファーモード)	96
6.3.17.4	校正の確認.....	96
6.3.17.5	内部校正リークの測定.....	97
6.4	測定.....	98
6.5	周囲のヘリウム濃度の測定 (UL3000 Fab PLUS のみ)	99
6.6	測定データ	99
6.6.1	データ記録の有効化とエクスポートの設定.....	100
6.6.2	測定サイクルの表示.....	101
6.6.3	ネットワーク経由の測定データのエクスポート	102
6.6.4	測定データ用データベース：情報.....	104
6.7	情報.....	104
6.7.1	現在の測定値の最新情報の呼び出し	104
6.7.2	現在の校正値の最新情報の呼び出し	105
6.7.3	接続されているアクセサリーに関する情報.....	105
6.7.4	デバイスに関する情報の取得	105
6.7.5	アセンブリに関する情報の呼び出し	106
6.7.6	エネルギーデータ情報の呼び出し	106
6.7.7	HYDRO•S に関する情報の呼び出し (UL3000 Fab PLUS のみ)	106
6.7.8	SL3000 スニファーラインに関する情報の呼び出し (UL3000 Fab PLUS のみ)	107
6.8	ログ.....	107
6.8.1	エラーおよび警告ログの呼び出し	107
6.8.2	校正ログの呼び出し.....	107
6.8.3	メンテナンスログの呼び出し	107

6.8.4	結果ログの呼び出し.....	107
6.9	デバイスの設定.....	108
6.9.1	個別パラメーターの表示とカスタマイズ.....	108
6.9.2	パラメーターセットの保存と管理.....	108
6.9.3	パラメーターセットのエクスポートまたはインポート.....	109
6.10	ソフトウェアのアップデート.....	110
6.10.1	動作ユニットソフトウェアのアップデート.....	110
6.10.2	本体ユニットソフトウェアのアップデート.....	111
6.10.3	エキスパートモードにおけるソフトウェアのアップデート.....	112
6.10.4	追加機能を有効にする.....	112
6.11	外部モニターの使用.....	113
6.11.1	内部タッチスクリーンに戻す方法.....	113
6.12	真空系統図の表示.....	114
6.13	工場出荷時設定へのリセット.....	116
6.14	デバイスからのログオフ.....	116
6.15	装置の停止.....	116
7	警告およびエラーメッセージ.....	117
7.1	警告メッセージとエラーメッセージ一覧.....	118
8	清掃およびメンテナンス.....	141
8.1	ハウジングのクリーニング.....	141
8.2	ツールボックス内部のフィルターマットの交換.....	141
8.3	デバイス底部のフィルターマットの交換.....	142
8.4	スニファーラインSL200のフィルターの交換.....	144
8.5	スニファーラインSL3000のフィルターの交換.....	146
8.6	ガスボンベの取り付けまたは交換.....	148
8.7	スクリーンショットの作成.....	149
8.8	デバイスの修理または修理の依頼.....	150
8.9	メンテナンスプラン.....	151

9	デコミッショニング	153
9.1	デバイスの廃棄	153
9.2	メンテナンス、修理、または廃棄のためのデバイスの返却	153
10	アクセサリとインターフェース	155
10.1	アクセサリとスペアパーツ	155
10.2	I/Oモジュール	161
10.2.1	デバイスと I/O モジュールの接続	161
10.2.2	アナログ出力の設定	161
10.2.3	デジタル入力の設定	163
10.2.4	デジタル出力の設定	165
10.2.5	I/Oモジュールプロトコルの設定	167
10.3	バスモジュール	168
10.3.1	デバイスとバスモジュールの接続	168
10.3.2	バスモジュールのアドレス設定	168
10.4	ネットワーク	169
10.4.1	ウェブブラウザを経由したリークディテクターの操作 (LAN)	169
10.4.1.1	リークディテクターのLAN接続の設定	169
10.4.1.2	パソコンまたはタブレットのLAN接続の設定	170
10.4.1.3	クライアントアクセスの許可	170
10.4.2	ウェブブラウザを経由したリークディテクターの操作 (無線 LAN)	171
10.4.2.1	リークディテクターの無線LAN接続の設定	172
10.4.2.2	パソコン またはタブレットの無線 LAN 接続の設定	173
10.4.2.3	クライアントアクセスの許可	174
11	付録	175
11.1	メニューパス	175
11.1.1	診断	175
11.1.2	設定	176
11.1.3	情報	177
11.2	EU適合宣言	179

11.3 RoHS	180
索引	181

1 この取扱説明書について

本取扱説明書は、タイトルページに記載されているソフトウェアバージョンに適用されます。

本取扱説明書に記載の製品名は、識別の目的にのみ使用されるもので、その権利を所有するそれぞれの会社に帰属します。

1.1 対象の読者

本取扱説明書は、デバイスのオペレーターやリークテストテクノロジー分野での経験を有する有資格者を対象に記述されています。

1.2 警告



⚠ 危険

死亡や重傷に至る差し迫った危険な状況



⚠ 警告

死亡や重傷に至る可能性がある危険な状況



⚠ 注意

軽傷に至る危険な状況



注記

環境または物的な損害が生じる危険な状況

1.3 用語の定義



本取扱説明書で言及するヘリウムについて

本デバイスはヘリウムリークディテクターです。ヘリウムの代わりにフォーミングガスを使用して含有水素を検知する場合、ヘリウムに関する情報は水素にも適用されません。

自動チューニング/一括設定

この機能は、最大リークレートインジケータを実現するように質量分析計を調整します。イオンディテクターを使用して最大イオン電流を検知するには、制御コンピューターが、選択した質量範囲内のイオンを適宜加速させるために電圧を調整します。校正ごとに自動調整が行われます。

運転モード

リークディテクターは「真空」運転モードと「スニファー」運転モードを区別します。「真空」運転モードでは、一般的にトレーサーガスがテスト対象品に流入しません。テスト対象品の圧力は大気圧未満です。

「スニファー」運転モードでは、トレーサーガスがテスト対象品から流出し、スニファープローブによって抽出されます。テスト対象品の圧力は大気圧を上回ります。

FINE

FINEは、インレット圧力0.4 mbarまでのターボ分子ポンプへの接続を示します。これは「スニファー」運転モードでも使用されます。

フォーミングガス

フォーミングガスとは、窒素と水素の混合気体の総称です。

GROSS

GROSSは、最低感度のターボ分子ポンプへの接続を示します。これにより、高いインレット圧力が可能になります（最大15 mbar）。

内部ヘリウムバックグラウンド

ヘリウムまたは水素（水の一部）は、空気の天然成分です。これにより生じる内部測定信号コンポーネント（バックグラウンド信号）は、開始直後からリーク表示と重複するため、リークの特定の妨げになります。

このバックグラウンド信号を抑制するため、工場出荷時設定により内部「バックグラウンド抑制」を起動することができます。STARTボタンを押すと、現在の内部測定信号がヘリウムバックグラウンドとして計数され、測定信号から減算されます。リークディテクターが20秒間にわたって「スタンバイ」または「ベント済み」モードでないと、最後に使用した内部ヘリウムバックグラウンドが差し引かれます。

最小検知リークレート

理想的な条件下での、本リークディテクターによって検知可能な最小検知リークレート ($< 5 \times 10^{-12}$ mbar l/s^{*})。

MASSIVE

真空範囲「MASSIVE」を選択すると、グロスリークを大気圧から測定できます。

ULTRA

ULTRAは、インレット圧力0.4 mbar未満（調整可能）で最大感度となる測定範囲でのターボ分子ポンプへの接続を示します。

ULTRATEST™センサ技術

原子量2、3および4用の高感度質量分析計。

バックグラウンド信号

ヘリウムまたは水素（水の一部）は、空気の天然成分です。

運転モード「真空」：リーク検出の前に、一定量のトレーサースガスが、テストチャンバー内部の表面、供給ライン、およびリークディテクター内部に既に存在します。この一定量のトレーサースガスが、「バックグラウンド信号」と呼ばれる測定信号を生成します。テストチャンバーを持続的に真空排気すると、このバックグラウンド信号を継続的に減らすことができます。

運転モード「スニファー」：周囲の空気がスニファーライン経由で継続的にリークディテクターに吸引されます。空気中に自然に存在するヘリウムまたは水素の成分により、一定のバックグラウンド信号が作成されます。

フォアライン圧力

ターボ分子ポンプとフォアラインポンプの間にある支援圧力。

ゼロ

外気に自然に含まれるヘリウムが、試験片の表面に弱く結合され、リークディテクターの測定システムへと少しずつ送り出されます。これはゆっくりと減少する測定信号を生成します。

このバックグラウンド信号または既存リーク表示を非表示にしたい場合、ZERO機能を使用します。

2 安全

2.1 対象の用途

このデバイスは、テスト対象品からのリークを検知し測定するリークディテクターです。真空法およびスニファー法によるリークテストを実施するのに適したデバイスです。

- 誤った使用による危険を回避するために、必ず取扱説明書に記載された所定の用途にのみデバイスを使用してください。
- アプリケーション制限値を厳守してください。「技術データ」を参照してください。

不適切な使用

次に挙げる状況や用途には使用しないでください：

- 技術仕様外での使用（「技術データ」を参照）
- 校正リークの許容環境条件の超過
- 放射能のある場所での使用
- 安定性を変化させる追加のアタッチメントを使用したデバイスの変更。INFICON アクセサリーは除外。
- 本取扱説明書に記載されていないアクセサリーやスペアパーツの使用
- 炭素繊維などの導電性粒子が内部短絡を引き起こす可能性がある汚染された周囲空気中でのデバイスの操作。
- 水分を含む、または湿ったテスト対象品のテスト
- 侵食性、引火性、爆発性、腐食性、微生物性、反応性、または毒性のある物質をポンプで吸い込み、危険をもたらすこと
- 疲労感などの人間工学的側面を考慮しないデバイスの操作
- 凝縮性の流体および気化ガスの真空排気
- 粒子で汚染されたガスの真空排気
- 液体をリークディテクター上またはコルゲートホースホルダーに置く
- 衝撃、振動
- 落下物によりデバイスやディスプレイが破損する可能性のある場所での使用

- 酸素と爆発性混合物を作るような濃度の水素の吸引。市販の混合ガスの組成の許容範囲については、製造者の安全データシートを参照してください。
- 爆発性雰囲気でのデバイスの使用
- 主電源が通っている電線または物体のスニファーラインによる走査
- 真空システムに対する衝撃的なベント
- 物体や人を運搬する車両としてのデバイスの使用
- オプションのボンベホルダーの物体や人を運搬する用途への使用
- オプションのボンベサポートの足場としての使用
- 真空に耐えないテスト対象品の接続
- 高濃度のフッ素または塩素などのハロゲンを含むガスのポンプによる排気、またはハロゲンを含むガスの長時間のポンプによる排気。冷媒またはSF6との使用。
- 換気の不十分な場所で排気設備なしに運転すること（使用するガスの種類による）。
- 注意：本装置は住宅地域での使用を想定していません。

2.2 オペレーターの義務

- 本書および所有者が作成した作業手順を読み、記載された内容を遵守してください。特に、安全注意事項や警告類には注意してください。
- すべての作業は、本取扱説明書に基づいて実施してください。
- 本取扱説明書に記載されていない運転やメンテナンスに関するご質問については、カスタマーサービスにお問い合わせください。

2.3 ユーザーへの要求事項

次の注意事項は、ユーザー、従業員または第三者が製品を安全かつ効果的に使用する上で責任を負う企業または担当者を対象としています。

安全性を重視した操作

- デバイスは、機能や動作に問題がなく、かつ損傷がない場合にのみ運転してください。
- デバイスは、本取扱説明書に従って安全性を重視し、リスクに配慮した方法でのみ該当してください。
- 次の規則に従い、それらが厳守されることを確認してください：
 - 対象の用途
 - 一該当の安全注意事項全般および事故防止規則
 - 国際、国内および地域の規格およびガイドライン
 - その他の機器関連の規定や規則
- 純正部品またはメーカーが承認した部品のみを使用してください。
- 本取扱説明書はいつでも閲覧できる場所に保管してください。

作業員の資格

- デバイスを用いた作業は、指示された作業員に限定されます。指示された作業員は、デバイスに関するトレーニングを受けている必要があります。
- 任命された作業員が、本取扱説明書やその他該当する文書を読み、理解していることを確認してください。

2.4 危険性

この測定機器は、最新かつ広く認められている安全規則に基づいて製造されています。ただし、不適切な方法で使用した場合、ユーザーまたは第三者の生命および身体への危険、または機器やその他の物的損害につながる危険性があります。

インプラントおよび心臓ペースメーカーなどの使用者に対する危険性

スピーカーは、ハンドルの近くの作業面の下にあります。その磁場により、インプラント（心臓ペースメーカーや除細動器など）が影響を受ける可能性があります。

- このようなデバイスの装着者は、スピーカーの磁石とインプラントの間に10 cm以上の距離を保ってください。
- さらに、インプラントの製造元によって指定された距離にも注意してください。

電気エネルギーによる危険性

デバイス内部の通電部品に触れると死亡する危険があります。

- デバイスの設置やメンテナンス作業に先立って、デバイスを電源から切り離してください。許可なく電源が供給されることのないようにしてください。

デバイスには、高電圧によって損傷を受ける可能性のある電気部品が含まれていません。

- 電源に接続する前に、現場の主電源電圧が許容動作電圧範囲内であることを確認してください。

許容される動作電圧範囲は、本機のタイププレートに記載されています。

爆発の危険

水素は可燃性・爆発性の気体です。

- トレーサガスとしては、酸素との混合によって爆発性とならないような水素濃度のものを使用してください。市販の混合ガスの組成の許容範囲については、製造者の安全データシートを参照してください。

インレットポートでの吸引効果による危険

本デバイスを操作モード「真空」で運転すると、インレットポートに減圧が生じます。手あるいは四肢が吸引されると負傷のおそれがあり、また驚いたために思わぬ動きが誘発されることがあります。

- リモートコントロールの使用時には特にこの危険に注意してください。
- インレットには何も入らないようにしてください。
- インレットが開いている場合には、ヘアネットの使用などにより長髪を保護してください。
- インレットポートは検査機器アセンブリーに接続するか、またはターミネーターで塞いでください。

物体の破裂による負傷の危険 接続されたテストオブジェクト、またはテストオブジェクトへの接続部が真空モードで生ずる減圧に耐えられないと、物体の破裂による負傷の危険が生じます。

- 適切な防止措置を講じてください。

3 納入品、搬送、保管

納品範囲

品目	数量
UL3000 Fab または UL3000 Fab PLUS	1
排気ホースアダプター ISO-KF フランジ DN25	1
フック ¹⁾	4
電源ケーブルクリップ ²⁾	1
ネジ M6 x 12	5
ロックワッシャー S6	8
電源ケーブル (国により異なる仕様)	1
フィルター付きセンターリング ³⁾ (塵/埃が発生するアプリケーション向け)	1
レンチ T30	1
取り外したスクロールポンプのサービス用プラグ	1
取扱説明書はPDFファイルでダウンロードできます (www.inficon.com)。	1
開梱手順書	1
校正器の検査証明書	1
リークディテクターの検査証明書	1
フォアラインポンプ (スクロールポンプ) に関する情報	1
ターボポンプに関する情報	1
トルクスレンチ T25 (UL3000 Fab PLUS のみ)	1
フレキシブルチューブ用ブラケット ⁴⁾ (UL3000 Fab PLUS のみ)	1
ホルダー用エッジプロテクター (UL3000 Fab PLUS のみ)	1
タッピングねじ (UL3000 Fab PLUS のみ)	2

さらに、ハンドル下の収納スペースを開くための鍵が2つ付属します。

- ▶ 製品の受け取り時に、すべての品目が揃っていることを確認してください。

説明

1)	デバイスまたはボトルホルダー（オプション）へ電源ケーブルまたはスニフアーラインの巻き上げる際に使用します。「デバイス全体」および「アクセサリーの接続 [▶ 53]」を参照してください。
2)	デバイスから地面に電源ケーブルを配線する際に使用します（転倒防止用）。「アクセサリーの接続 [▶ 53]」を参照してください。
3)	インレットフランジへの取り付け方法については「インレット [▶ 36]」を参照してください。
4)	デバイスのインレットフランジと、テストチャンバーまたはテスト対象品を接続するフレキシブルチューブを固定する際に使用します。「アクセサリーの接続 [▶ 53]」を参照してください。

輸送

本デバイスの輸送時には、以下の説明に従ってください。

 **警告**

可搬型リークディテクターのガスボンベの不適切な輸送による負傷の危険

- ▶ リークディテクターにボンベホルダーを取り付けるときは、別冊の取り付け説明書に記載されている一連の作業手順を遵守してください。
- ▶ ボンベホルダーのベースをガスボンベと同じ高さに取り付けます。
- ▶ 小～中型のボンベ（最大容量10リットル、保護キャップを含む最大寸法98 cm、200 bar）のみを使用し、リークディテクターの安定性が損なわれないように注意する必要があります。
- ▶ 付属のテンションストラップに目に見える損傷がないか確認してください。
- ▶ 常に両方のテンションストラップでボンベをボンベホルダーに固定してください。
- ▶ 輸送する前に、ガスボンベのバルブを確実に閉じてください。
- ▶ 輸送する前に、圧力調節器を取り外します。
- ▶ 輸送中は、ガスボンベのバルブにバルブ保護キャップを取り付けて保護してください。
- ▶ 接続されているスプレーホースに無理な力がかかっていないことを確認します。
- ▶ ガスボンベの取り扱いについては、製造元の安全に関する注意事項を遵守してください。

⚠ 警告**感電による負傷の危険性**

- ▶ 本デバイスは、必ず電源ケーブルを切り離した状態で動かしてください。
- ▶ 使用前に毎回、電源ケーブルの損傷を確認してください。

⚠ 警告**デバイスの落下または転倒による負傷の危険**

不適切な方法で輸送すると、本デバイスが落下または横転して重傷事故の原因となる可能性があります。

- ▶ モバイルリークディテクターは、平らな面での輸送用に設計されています。持ち運びや持ち上げには適さない。本デバイスを押す場合、ハンドルを使用してください。
- ▶ 小さい障害物を乗り越えるために短時間片側だけ持ち上げる場合は、2人組になって本デバイスのハンドルを持ちます。これは、ケーブルを損傷させずにまたぐ場合などに必要になります。
- ▶ リークディテクターをフォークリフトなどの輸送用車両を使用して移動する場合は、落下しないように確実に固定してください。

⚠ 注意**パーキングブレーキの機能制限による負傷の危険**

パーキングブレーキが適切に機能しないと、本デバイスの意図しない動作や怪我が発生する場合があります。

- ▶ パーキングブレーキが適切に機能するように、キャスターから粘着テープを剥がしてください。

⚠ 注意**手足の負傷の危険性**

キャストによって足を骨折する可能性があります。

- ▶ キャスターに足を近付けすぎないようにしてください。
- ▶ デバイスを引っ張らないでください。
- ▶ デバイスのハンドルのみを持ち、移動させてください。
- ▶ フロントキャスターをロックして、デバイスを定位置に固定します。

注記**輸送用梱包材を使用せず輸送した場合の物損**

本デバイスを押して安全に輸送することが不可能な場合、元の梱包材を使用してデバイスを損傷から保護してください。

- ▶ 輸送用に元の梱包材を保管してください。

注記**輸送用車両によるリークディテクターの損傷**

本デバイスの底部には、ファン取り付け用クリップがあります。フォークリフトなどの輸送用車両が、これらのクリップを損傷する可能性があります。

- ▶ ハンドルを押して本デバイスを目的の場所まで運べない場合は、元の輸送用ボックスを使用することを推奨します。
- ▶ 輸送用ボックスなしで輸送用車両を使用する場合、本デバイスの底面のクリップ（床用ファンの取付具）が損傷しないように注意してください。フォークリフトのフォークを本機の下側に挿入する際は、どこにも接触させないように細心の注意を払う必要があります。

保管

デバイスは、必ず技術データに基づいて保管してください。「技術データ [▶ 40]」を参照してください。

4 説明

4.1 機能

このデバイスは、テスト対象品におけるリークを検出して測定するためのリークディテクタです。真空法およびスニファー法によるリークテストを実施するのに適したデバイスです。ULTRATEST™ センサー技術を使用しています。

- 真空法を使用する場合、テスト対象品を減圧状態にし、外部からヘリウムまたはフォーミングガスを吹き付けます。そのためには、本デバイスとテスト対象品の間に真空接続を確立する必要があります。
- スニファー法を使用する場合、ヘリウムまたはフォーミングガスを使用して、テスト対象品を過圧状態にします。その後、スニファーラインを使用して外部からテスト対象品を検査します。

リークテストを実行する前に、リークディテクタの校正を行う必要があります。「内部校正 [▶ 95]」および「外部校正 [▶ 95]」も参照してください。

4.2 運転モード

4.2.1 運転モード「真空」

インレットポートは本デバイスの上側にあります。

真空法を使用してリークを検出するには、インレットポートをテスト対象品に接続する必要があります。

テスト対象品の圧力が周囲圧力より低い場合、リークが発生している場合、（テスト対象品に吹き付けた）ヘリウムがテスト対象品に流入します。ヘリウムは、質量分析計を使用するリークディテクタで検知できます。

HYDRO•S (UL3000 Fab PLUSのみ)

「真空」運転モードでは、HYDRO•Sを使用できる可能性があります。HYDRO•Sは、大きなテスト対象品を使用する場合の、測定モードに入るまでの時間を短縮します。

テストチャンバ内の水蒸気の脱離により、望ましくないバックグラウンド信号が発生します。HYDRO•S は、ヘリウム信号からこの信号を分離して抑制することで、テストを早期に開始できるようにします。このモードに変更した後は、新しい校正が必須です。HYDRO•S モードでは、検出下限値は $1 \times 10^{-11} \text{ Pa m}^3/\text{s}$ となります。

これについて参照する

外部校正 [▶ 95]

4.2.2 運転モード「スニファー」

正圧状態のテスト対象品をスニファープローブで検査するために、スニファーライン SL200 を接続できます。



UL3000 Fab PLUS では、スニファーライン SL200 の代わりにスニファーライン SL3000 を接続できます。

SL200

スニファーライン SL200 の真空接続は、デバイス上部のインレットフランジで行います。

スニファーライン SL200 の電気接続は、デバイス背面の「ACCESSORIES」コネクタで行います。「アクセサリおよび制御信号接続部 [▶ 39]」を参照してください。電気接続には延長ケーブルが必要です。「アクセサリとスペアパーツ [▶ 155]」を参照してください。

SL3000 (UL3000 Fab PLUS 用のみ)

スニファーライン SL3000 は、デバイス背面のコネクタに接続します。「アクセサリおよび制御信号接続部 [▶ 39]」を参照してください。このコネクタを経由して、電気および真空システムに接続されます。

デバイス上部のインレットフランジへの接続は不要なため、運転モード「スニファー」に切り替えた際に、インレットフランジに接続されている真空コンポーネントを取り外す必要はありません。

比較

	SL200	SL3000
検出限界	$< 5 \times 10^{-8} \text{ mbar l/s}$	$< 2 \times 10^{-7} \text{ mbar l/s}$
ガス流量、距離感度	25 sccm	160 sccm
使用可能な長さ	3.8 m	3/5/10/15 m
ケーブルシース	ステンレス	プラスチック

良/不良表示	あり	あり
ボタンによるZERO	あり	あり
デバイスへの接続	インレットフランジおよび 電気接続経由	デバイス背面のコネクター 経由
真空とスニファーラインの 同時接続	-	あり
ディスプレイ上の測定表示	-	あり
スニファープローブのボタ ンによるエラー確認	-	あり
スニファープローブのボタ ンによるスタンバイ終了	-	あり
スニファープローブのボタ ンによる校正確認	-	あり

4.2.3 運転モード「オートリークテスト」

このモードでは、密閉された部品のテストを自動的に実行できます。オプションのテストチャンバーTC1000を使用する場合は、カバーを閉じるとテストが自動的に開始されます。

結果は短時間で得られます。リークディテクターの内部校正器を使用して、任意のテストサイクルを動的に校正できます。

10^{-9} mbarの範囲のリークレートを5秒以内に検知できます。

これについて参照する

📖 自動リークテストの設定 [▶ 83]

📖 オートリークテストの結果表示 [▶ 72]

4.3 デバイスのセットアップ

4.3.1 デバイス全体



図 1: 前面



図 2: フラップを開けた正面図。図に示したリモートコントローラ RC1000 はオプションです。



図 3: 背面図。図には標準およびオプションのアクセサリも示されています。

4.3.2 コントロールユニット



図 4: コントロールユニット – 正面図

コントロールユニットは、タッチスクリーンとハウジング上にあるSTART、STOP、ZERO（バックグラウンド抑制）ボタンを備えたコントロールパネルで構成されています。

「タッチスクリーンの構成 [▶ 34]」および「START ボタン [▶ 31]」も参照してください。

コントロールパネル上のボタンのLEDランプはデバイスの状態に応じて表示色が変化します。「ボタン LED の意味 [▶ 33]」も参照してください。

コントロールユニットは回転可能です。

HDMIインターフェースを備えたコントロールユニットをお持ちの場合は、タッチモニターを接続できます。

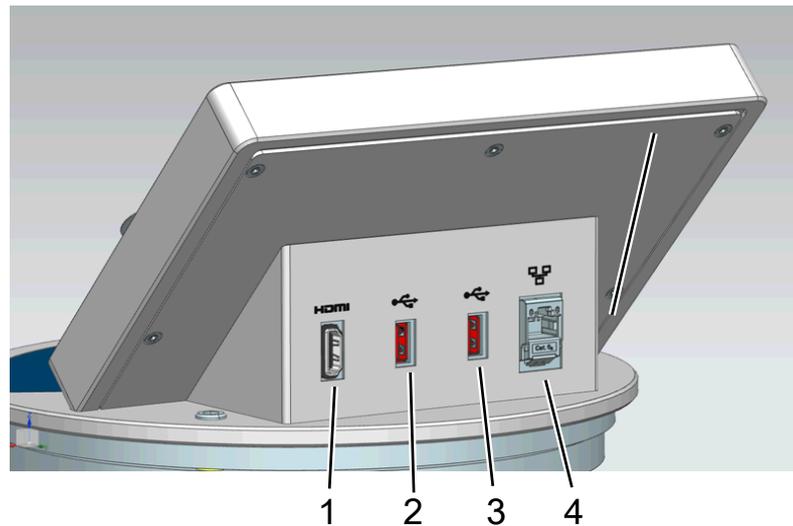


図 5: コントロールユニット - 背面

1	<p>HDMIインターフェース</p> <ul style="list-style-type: none"> • タッチスクリーンのHDMIインターフェースへの接続用HDMIケーブルの最大長は3 mです。「外部モニターの使用 [▶ 113]」も参照してください。
2/3	<p>USB 2.0 インターフェース</p> <ul style="list-style-type: none"> • タッチスクリーンのUSBケーブルの接続用、最大ケーブル長さ3 m。 • アップデート情報を収録したUSBフラッシュドライブを接続するには、「ソフトウェアのアップデート [▶ 110]」を参照してください。 • 測定データをコピーするためにUSBフラッシュドライブを接続するには、「測定データ [▶ 99]」を参照してください。 • 無線LAN接続のために無線LAN対応USBアダプターを接続するには、「ウェブブラウザを経由したリークディテクターの操作（無線 LAN） [▶ 171]」を参照してください。
4	<p>Ethernetネットワークインターフェース</p> <ul style="list-style-type: none"> • LANネットワークへの接続用の最大ケーブル長は30 m（シールド付き）です

オプションとしてリモートコントロールRC1000が用意されています。「アクセサリとスペアパーツ [▶ 155]」も参照してください。

ノートパソコンやタブレットを使用してデバイスを運転することもできます。「ウェブブラウザを経由したリークディテクターの操作（無線 LAN） [▶ 171]」も参照してください。

4.3.2.1 START ボタン

- 測定を開始します。
- コントロールパネルのタッチスクリーンからも運転できます。
- 測定中にもう一度STARTボタンを押すと、STARTボタンを再度押した後に達した最大リークレート (Q_{max}) が表示されます。「タッチスクリーンの構成 [▶ 34]」も参照してください。
- 測定中にコントロールパネルのSTARTボタンを押すと、最大リークレート表示が更新されます。

機能	タッチスクリーン	コントロールパネル
開始		STARTボタン
最大リークレートの表示	タッチスクリーン経由では運転不可	STARTボタンを再度押しします。

4.3.2.2 STOP ボタン

- 測定を停止します。
- コントロールパネルのタッチスクリーンからも操作できます。
- コントロールパネルの STOP ボタンは、測定の停止とベントに使用します。

機能	タッチスクリーン	コントロールパネル
停止		STOPボタン
ベント		再度 STOP ボタンを押し、約2秒長押しします。

機能	タッチスクリーン	コントロールパネル
		「ベントモード」を「手動」にする必要があります。「真空レンジの有効化 [▶ 82]」を参照してください。

4.3.2.3 ZERO ボタン

- 「バックグラウンド信号」の抑制については「用語の定義 [▶ 11]」も参照してください。
- コントロールパネルのタッチスクリーンからも運転できます。
- ZERO は ZERO ボタンを使用してオン/オフを切り替え可能です。詳細は、「ZERO 機能の設定と適用 [▶ 87]」を参照してください。

機能	タッチスクリーン	コントロールパネル
バックグラウンド抑制オン		ZERO ボタン
バックグラウンド抑制オフ		もう一度 ZERO ボタンを約 2 秒長押しします。

実際に測定されたリークレートがバックグラウンド信号とみなされます。選択されている運転モードに応じて、対応する真空範囲の表示限界に到達するまでバックグラウンド信号は非表示になります。

工場出荷時設定に基づく表示限界：

1×10^{-1} mbar l/s (MASSIVE)

1×10^{-7} mbar l/s (GROSS)

1×10^{-10} mbar l/s (FINE)

1×10^{-12} mbar l/s (ULTRA)

再度ZERO機能をオフにするには ZERO ボタンを約 2 秒長押しします。

ZERO機能は、リークレート信号が安定化しており、リークが測定されていない場合のみ有効にしてください。「ZERO 機能の設定と適用 [▶ 87]」も参照してください。

これについて参照する

📖 真空レンジの有効化 [▶ 82]

4.3.2.4 ボタン LED の意味

START ボタン LED	STOP ボタン LED	意味
オフ	赤点滅	コントロールユニットへの接続なし
青パルス	青パルス	起動中
オフ	緑	スタンバイ、ベント済（ベントバルブ開）
オフ	青緑	スタンバイ、真空状態（ベントバルブ閉）
緑パルス	オフ	真空排気
オフ	緑点滅	内部校正
緑点滅	オフ	外部校正
緑	オフ	測定中
黄（警告、測定失敗の可能性）	オフ	警告が未解決のまま測定
オフ	赤	エラーあり

ZERO ボタン LED	
オフ	測定運転なし
オフ	ZERO無効
青	ZEROオフ、HYDRO•S オフ
緑	ZEROオン
黄	ZEROオフ、HYDRO•S オン

4.3.2.5 ステータス LED の意味

ステータス LED は、デバイス背面の機器および制御信号用のコネクタブロック内部にあります。「アクセサリおよび制御信号接続部 [▶ 39]」も参照してください。

ステータスLED	意味
赤点滅	運転ユニットとの通信なし
青点滅	起動中
青	スタンバイ
緑点滅	排気（真空排気）
緑点滅	校正
緑点滅	ソフトウェア起動（デバイスをオンした直後）
緑点滅	ブートローダーがソフトウェアアップデート待機中（本体ユニットのソフトウェアアップデート開始後）
緑	測定
黄	警告が未解決のまま測定
赤	エラーあり

4.3.2.6 タッチスクリーンの構成


ディスプレイはタッチスクリーンです。



タッチスクリーンは軽く触れることで応答します。強く押しすぎると、目的の機能を正しく選択できないことがあります。

ディスプレイには、常にナビゲーションボタンが表示されます。

また、状況に応じて他の記号や要素も表示されます。

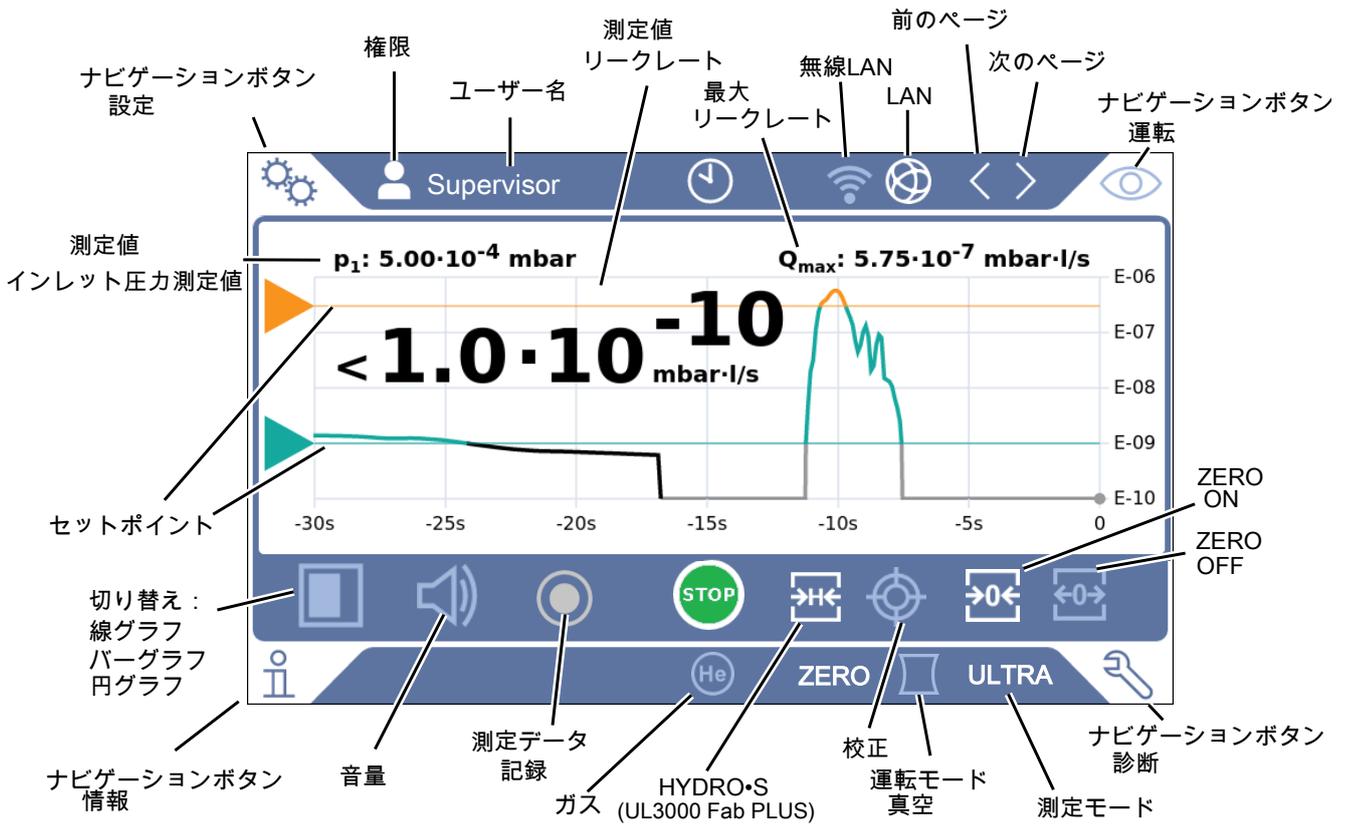

ナビゲーションボタン

これらのボタンは、次の5色で表示されます：

- ・ グレー：機能は無効
- ・ 濃い青：機能は有効
- ・ 薄い青：機能が有効
- ・ 赤：エラーが有効（ナビゲーションボタン 診断）
- ・ オレンジ：警告が有効（ナビゲーションボタン 診断）

⚙️	設定
👁️	運転
📄	情報
🔧	診断

表 1: ナビゲーションボタン

機能ボタン

これらのボタンは、次の3色で表示されます：

- ・ グレー：機能が無効

• 薄い青：機能は有効
• 白：機能が有効
一般機能の記号
⊗ 作動中の機能のキャンセル
② 現在の機能のヘルプ呼び出し
☑ 入力または選択内容の確定
↑ 読み込み
↓ 保存
✎ 編集
📄 コピー
🗑️ 削除
📶 無線LAN
🌐 LAN
> 次のページ
< 前のページ

表 2: 機能ボタン

その他の記号

👤	権限「User」
👤	権限「Operator」
👤	権限「Supervisor」
🕒	時間の表示または設定

「ユーザー権限の一覧 [▶ 64]」も参照してください。

4.3.3 真空接続

4.3.3.1 インレット

インレットはデバイス上部にあります。これは DN 25 KF フランジです。

真空リークテストモードを選択した場合は、テスト対象品または真空チャンバーをフランジに接続します。

塵/埃を伴うアプリケーションでテストする場合は、フィルター付きセンターリングを使用してください。「納入品、輸送、保管」を参照してください。この場合、真空排気時間が長くなります。



このインレットには、スニファールラインSL200 またはテストチャンバーTC1000 も接続します。

これについて参照する

📖 納入品、搬送、保管 [▶ 19]

4.3.3.2 排気


⚠ 警告

有毒ガスによる中毒の危険

接続したコンテナとそこに含まれているガスによっては、リークディテクターの排気フィルター経由で有毒ガスが大気中に排出される場合があります。

- ▶ 有毒ガスの吸引を防ぐ保護対策を講じてください。
- ▶ 有毒、腐食性、または爆発性の危険なガスをポンプアウトしないでください。
- ▶ 排気ホースを接続します。排気ガス接続は排気ガスシステムに連続的に接続し、絶対に閉じないでください。

排気箇所はデバイス背面にあります。これは内周と外周にネジ部をもつ管状接続部です。排気ホースアダプターの接続については「アクセサリーの接続 [▶ 53]」をも参照してください。

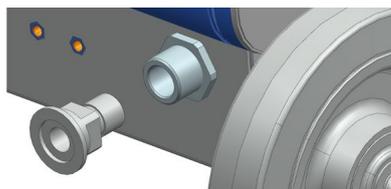

4.3.3.3 パージガス接続部

パージガス接続部はデバイス下部にあります。「アクセサリおよび制御信号接続部 [▶ 39]」を参照してください。これは、外径 8 mm ホース用のクイックコネクタです。

パージには、大気圧のヘリウムを含まないガスを使用してください。大型容器の吹き付けや充填によって、周囲の空気がヘリウムに汚染される可能性があります。このような場合は、パージガス接続部にガス供給ライン（窒素、外気、または類似の気体）を接続してください。ガスラインの圧力は、大気圧から 100 mbar 以上超えないようにしてください。

4.3.3.4 ベント接続部

通常、テスト完了後にテスト対象品を周囲の空気でベントします。必要に応じて、ベント接続部を経由して他のガス（外気、乾燥空気、窒素など）でテスト対象品をベントすることもできます。ベント接続部における圧力は、大気圧から 100 mbar 以上超えないようにしてください。

このような場合は、デバイスのベント接続部にベント用ホースを接続する必要があります。「アクセサリおよび制御信号接続部 [▶ 39]」を参照してください。

4.3.4 アクセサリーおよび制御信号接続部



図 6: アクセサリーおよび制御信号接続部

SNIFFER (UL3000 Fab PLUS のみ)	スニファアーラインSL3000の接続用
ACCESSORIES	スニファアーライン SL200 またはテストチャンバー TC1000 の接続用
LD	バス・インターフェースモジュールBM1000またはI/OモジュールIO1000用接続部、 INFICONデータケーブルの最大ケーブル長さは30 m*)
REMOTE CONTROL	RC1000 リモコンをケーブルで接続する場合、最大*) ケーブル長 28 m、またはアダプターを介して無線送信機を直接接続する場合。リモートコントローラーはオプション品です。
RS232	アクセサリおよびサービス接続部
電源ケーブル接続部	UL3000 Fab / UL3000 Fab Plus 電源の接続用
ベント接続部	外径14mmのホースについては、「ベント接続部 [▶ 38]」も参照してください。
パージガス接続部	外径8mmのホースについては、「パージガス接続部 [▶ 38]」も参照してください。

*) 誤った測定値の表示を避けるために、指定された最大ケーブル長を遵守する必要があります。

注記

デバイスの電気系統が破損するおそれがあります。

- ▶ 適切なインターフェースを備えたデバイスのみ接続してください。

外部デバイスとの接続部は電源と確実に分離されており、安全特別低電圧の範囲にあります。

4.3.5 デバイス上の記号



デバイスは家庭ごみとして廃棄してはなりません。



スピーカーは、ハンドルの近くの作業面の下にあります。その磁場により、インプラント（心臓ペースメーカーや除細動器など）が影響を受ける可能性があります。

- このようなデバイスの装着者は、スピーカーの磁石とインプラントの間に10 cm以上の距離を保ってください。
- さらに、インプラントの製造元によって指定された距離にも注意してください。

4.4 技術データ

機械的データ

	UL3000FabまたはUL3000Fab PLUS
寸法 (L × W × H)	1050 mm × 472 mm × 990 mm
質量	118 kg
インレットポート	DN25 KF
ディスプレイ	
ディスプレイ	静電容量式タッチスクリーンによるカラー表示
画面サイズ	7 inch
解像度	800 x 480 ピクセル

	UL3000FabまたはUL3000Fab PLUS
色	16.7 M
バックライト	LED

電気的データ

	UL3000FabまたはUL3000Fab PLUS
運転電圧	100 - 240 V ±10%, 50 / 60 Hz
最大消費電力	1500 VA
標準消費電力	
：真空排気時	1200 VA
：測定モード時	700 VA
メインヒューズ	回路遮断器20 A温度ヒューズ
保護等級	EN 60529 IP20 UL 50Eタイプ1
過電圧カテゴリ	II
電子インターフェース	USB, Ethernet, HDMI, SNIFFER, ACCESSORIES, LD, REMOTE CONTROL, SERVICE

物理的データ

	UL3000FabまたはUL3000Fab PLUS
真空モードでの最小検出可能リークレート	$\leq 5 \cdot 10^{-12}$ mbar l/s
応答時間、ブランクフランジ	< 1 s
最大インレット圧力（真空範囲 MASSIVE）	大気圧
ヘリウムのポンピング速度（真空範囲 ULTRA）	4 l/s
入口での空気の送り出し速度	> 25 m ³ /h
起動時間	< 3 min

	UL3000FabまたはUL3000Fab PLUS
検知可能質量	^4He 、 H_2 、質量3（例： H-D 、 ^3He または H_3 ）
スニファーモードでの最小検知リークレート	$< 5 \times 10^{-9} \text{ Pa m}^3/\text{s}$
スニファーラインSL200のガス流量	25 sccm
スニファーラインSL3000のガス流量	160 sccm
測定範囲	12桁
スタンバイ時の音圧レベル	61 dB (A) 以下*
イオンソース	2 x 長寿命イリジウムカソード、酸化イットリウムコーティング

*）本デバイスの予測可能なすべての用途で、事業者の施設でのA特性音圧レベルが常に61 dB (A) です。騒音測定申告書は、整合規格DIN EN ISO 3744:2011に従って作成されています。

環境条件

	UL3000FabまたはUL3000Fab PLUS
最大高度（海拔）	2000 m
最大相対湿度	80 % (30 °C) 、40 °Cで50 %まで直線的に減少
保管温度	0°C ... +50°C
周囲温度	+10°C ... +40°C
汚染度**)	2

**）DIN EN 61010-1準拠：非導通の汚染のみ。ただし、結露により一時的な導電性が発生することがあります。

4.5 工場出荷時設定

リークレート	セットポイント 1	$1 \times 10^{-9} \text{ mbar l/s}$
リークレート	セットポイント 2	$1 \times 10^{-8} \text{ mbar l/s}$
リークレート	セットポイント 3	$1 \times 10^{-7} \text{ mbar l/s}$

リークレート セットポイント 4	1×10^{-6} mbar l/s
自動パージ	ON
音量	2
ZEROモード	I•ZERO 2.0
校正リクエスト	OFF
TMPベント	ON (サービスのみに変更可能)
インターフェース リークレート単位 真空モード	mbar l/s
インターフェース リークレート単位 スニフアーモード	mbar l/s
インターフェース 圧力単位	mbar
質量	4 (ヘリウム)
IO1000 RS232 接続プロトコル	ASCII
I/O 1000 アナログ出力 チャンネル 1	リークレート仮数
I/O 1000 アナログ出力 チャンネル 2	リークレート指数
I/O 1000 アナログ出力 スケーリング	0.5 V / decade
デジタル出力 1 (IO1000)	Calibration request (反転)
デジタル出力 2 (IO1000)	Error or warning (反転)
デジタル出力 3 (IO1000)	Setpoint 1 (反転)
デジタル出力 4 (IO1000)	Setpoint 2 (反転)
デジタル出力 5 (IO1000)	Measuring
デジタル出力 6 (IO1000)	ZERO active
デジタル出力 7 (IO1000)	Ready for operation
デジタル出力 8 (IO1000)	Calibration active
デジタル入力 1 (IO1000)	VENT
デジタル入力 2 (IO1000)	Sniff
デジタル入力 3 (IO1000)	開始
デジタル入力 4 (IO1000)	停止
デジタル入力 5 (IO1000)	ZERO
デジタル入力 6 (IO1000)	CAL

デジタル入力 7 (IO1000)	Clear
デジタル入力 8 (IO1000)	Purge
デジタル入力 9 (IO1000)	開始/停止
デジタル入力 10 (IO1000)	No function
機械係数 真空 質量 2	1
機械係数 真空 質量 3	1
機械係数 真空 質量 4	1
リークレートフィルター	I-CAL
カソード	カソード 1 クリア (サービスのみ変更可能)
圧力下限値 SL200 キャピラリの詰り	0.1 mbar
圧力上限値 SL200 キャピラリの破損	1 mbar
オーディオアラームの種類	TRIGGER
オーディオアラーム遅れ	60 秒
通知音	ON
インレットエリアオフセット 質量 2	1.3×10^{-10} A
インレットエリアオフセット 質量 3	6.7×10^{-14} A
インレットエリアオフセット 質量 4	3.3×10^{-15} A
I/O 1000 アナログ出力 上限指数	-5
圧力単位 (ディスプレイ)	mbar
リークレート単位 真空モード (ディスプレイ)	mbar l/s
リークレート単位 スニファーマード (ディスプレイ)	mbar l/s
運転モード	真空
校正時のプリアンプテスト	ON (サービスのみ変更可能)
プリアンプ範囲の交互監視	ON (サービスのみ変更可能)
圧力限界 MASSIVE ->GROSS	15.0 mbar
圧力限界 GROSS ->FINE	2.0 mbar
圧力限界 FINE ->ULTRA	0.3 mbar

グロスリークの最大真空排気時間	600 秒
最大真空排気時間	1800 秒
グロスリーク保護のリークレート限界	1×10^{-3} mbar l/s
グロスリーク保護	OFF
微粒子保護	OFF
バックグラウンド抑制	内部のみ
ベント遅延	手動
LD 接続のデバイス	I/Oモジュール
メンテナンスメッセージ	すべて有効
真空範囲	MASSIVE、GROSS、FINE、ULTRA (すべてオン)
フィールドバスアドレス	126
外部校正器 真空 水素	1×10^{-7} mbar l/s
外部校正器 真空 質量3	1×10^{-7} mbar l/s
外部校正器 真空 ヘリウム	1×10^{-7} mbar l/s
外部校正器 スニファー 水素	1×10^{-5} mbar l/s
外部校正器 スニファー 質量3	1×10^{-5} mbar l/s
外部校正器 スニファー ヘリウム	1×10^{-5} mbar l/s
ローカルコントロール	リリース
時計スタイル	アナログ
スタンバイでのバックグラウンド表示	OFF
リークレート下限の引き上げ	0
最小音量	0
排ガスホース接続部に関する注意事項	有効
HYDRO•S (UL3000 Fab PLUS のみ)	オフ
UL3000 Fab PLUS と組み合わせた SL3000 のみ	
スニファーラインLEDアラーム設定	点滅
スニファーラインLED照度	5
スニファーライン ブザー	セットポイント1で警告音

	圧力下限値SL3000キャピラリの詰り	80 mbar
	圧力上限値SL3000キャピラリの破損	200 mbar
メンテナンス間隔の設定		
	スニファーチップフィルター	1000 時間
	エアフィルター	2500 時間
ユーザー設定		
	名称	Supervisor
	PIN	1111
	言語	English
自動リークテスト		
	最小テスト時間	5 秒
	最大テスト時間	10 秒
	部品ナンバリング	On
	部品番号	1
	連続不良テストの警告限界	5
グラフのタイプ		線グラフ
線グラフ		
	スケーリング	対数
	decade	4
	オートスケール	ON
	グラフ下限	1×10^{-12}
	時間軸	30 秒
バーグラフ		
	スケーリング	対数
	decade	4
	オートスケール	ON
	グラフ下限	1×10^{-12}
円グラフ		
	decade	5
	オートスケール	ON

グラフ下限	1×10^{-12}
データ記録	
エクスポート形式	CSV en
有効	OFF
メタデータのエクスポート	ON
無線LAN	
SSID	UL Series
ネットワークパスワード	INFICONUL
有効	ON
LAN	
方式	OFF

5 取り付け

5.1 セットアップ



⚠ 危険

感電による危険

リークディテクターの移動時に電源ケーブルに無理な力がかかると、ケーブルや壁面のコンセントが損傷する可能性があります。

デバイス内に水分が浸入すると、感電による人的損害や短絡による物的損害の原因となります。

- ▶ 使用前に毎回、電源ケーブルの損傷を確認してください。
- ▶ 電源ケーブルに無理な力がかからないように注意してください。
- ▶ デバイスを移動するときは、壁面のコンセントから電源ケーブルを取り外してください。
- ▶ 目的の場所に移動したら、不意に動かないように、ブレーキで移動用ホイールを固定してください。
- ▶ 乾燥した環境や建物内でのみ使用してください。
- ▶ 液体や湿気から遠ざけてデバイスを運転してください。
- ▶ デバイスの電源プラグをコンセントから常に抜くことができる場所にデバイスを設置してください。
- ▶ 水が停滞している場所でデバイスを運転しないでください。また、デバイス上に水滴やその他の液体が付着した場合は、直ちにふき取ってください。



⚠ 警告

排気ガスおよび気化ガスに起因する健康上のリスク

ポンプから排出されるガスや気化ガスは、健康上のリスクとなることがあります。

- ▶ 換気が悪い室内で運転する場合、特に健康上のリスクとなるガスを使用する際には、排気接続部に排気ホースを接続してください。

**警告****過負荷、短絡、過熱による火災の危険**

- ▶ 許容される周囲条件を遵守してください。
- ▶ 特にデバイス底部左右の換気口対しては十分な換気を確保してください：デバイス前面、背面および側面に少なくとも10 cmの空きスペースを確保してください。
- ▶ アクセサリー収納スペースのファンインレットを塞がないでください。
- ▶ 本デバイスは、熱源から離れたところで使用してください。
- ▶ 電源スイッチまたは壁面のコンセントに挿入した電源プラグに、いつでも簡単に手が届くようにしてください。
- ▶ 本デバイスから煙が出た場合は、直ちに電源を遮断してください。

警告**地震によりデバイスが倒れる危険**

- ▶ 地震が発生する可能性がある場合は、短いチェーンまたはベルト（許容張力1000 N）を使用してデバイスのハンドル部を固定してください。



図 7: デバイスのハンドル

注意**制御不能な転がりによる負傷の危険**

- ▶ パーキングブレーキが適切に機能するように、キャスターから粘着テープを剥がしてください。
- ▶ 制御不能な転がりを回避するため、パーキングブレーキをかけてホイールをロックし、デバイスを固定してください。

⚠ 注意**手足の負傷の危険性**

キャストによって足を骨折する可能性があります。指をはさんだり押しつぶしたりする可能性があります。

- ▶ 足や手をキャストに近づけないでください。
- ▶ キャスターブレーキを指で解除しないでください、必ず足または工具で解除してください。
- ▶ デバイスを引っ張らないでください。
- ▶ デバイスのハンドルのみを持ち、移動させてください。
- ▶ キャスターをパーキングブレーキでロックして、デバイスを定位置に固定します。

⚠ 注意**電源コードやその他の配線につまづく危険**

- ▶ デバイスから斜めに延びている電源ケーブルにつまづくことがないように、ケーブルのねじれを完全に戻すか、電源ケーブルクリップを使用してデバイスから地面に向けてまっすぐにケーブルを取りまわしてください。「アクセサリーの接続 [▶ 53]」も参照してください。
- ▶ 他の接続された配線も、つまづく危険がないように敷設します。

注記

オペレーティングシステムは、USBまたはEthernetを経由して攻撃を受ける可能性があります。

リークディテクターに使用されているLinux OSは自動的にアップデートされないため、セキュリティホールが生じる可能性があります。こうした脆弱性により、リークディテクターのEthernetまたはUSBインターフェースを経由してシステムに不正にアクセスされる危険性があります。

- ▶ USBポート/Ethernetポートロックなどを用いて、これらのインターフェースへの不正アクセスを防止してください。
- ▶ 社内ネットワークの安全性を損なわないために、リークディテクターは外部インターネットに直接接続しないでください。これは無線LANやEthernet 経由でも同様です。
- ▶ このため、リークディテクターのウェブインターフェースにリモートでアクセスする場合は、暗号化された仮想プライベートネットワーク（VPN）による接続を推奨します。ただしこれは、第三者の提供するVPN接続の安全性を保証するものではありません。



ヘリウム源からデバイス周囲へのリークによる測定エラーの防止

デバイスの周囲10 mにある大容量ヘリウム源からのグロスリークの有無を定期的を確認することを推奨します。スニファーラインを使用して確認してください。



デバイスの輸送に関する注意事項を遵守してください。「納入品、搬送、保管 [▶ 19]」も参照してください。

手順

- 誤った測定結果を得ることがないように、可能な限り周囲の温度が一定な場所で使用してください。
- キャスターとブレーキが正常に機能するために、キャスターの粘着テープを取り除く必要があります。
- デバイス下部の排気口を塞がないよう、デバイスは堅牢で平らな場所に設置してください。
- デバイス背面の電源スイッチに容易に到達できるよう、デバイスの後方には十分なスペースを確保してください。

- デバイスを直射日光にさらさないでください。


5.2 アクセサリーの接続

「電源ケーブルおよびスニファールイン用フック」の取り付け

納入品（数量）：フック (4x)、ネジ M6 x 12 (4x)、ロックワッシャー S6 (4x)

ツール (付属): レンチ T30

- 電源ケーブル、および必要に応じてスニファールインをデバイスに固定するために、図に示すようにデバイスにフックを取り付けます。
- デバイスにボンベホルダーが取り付けられている場合は、フックをボンベホルダーに取り付け、付属のナットでネジを固定します。

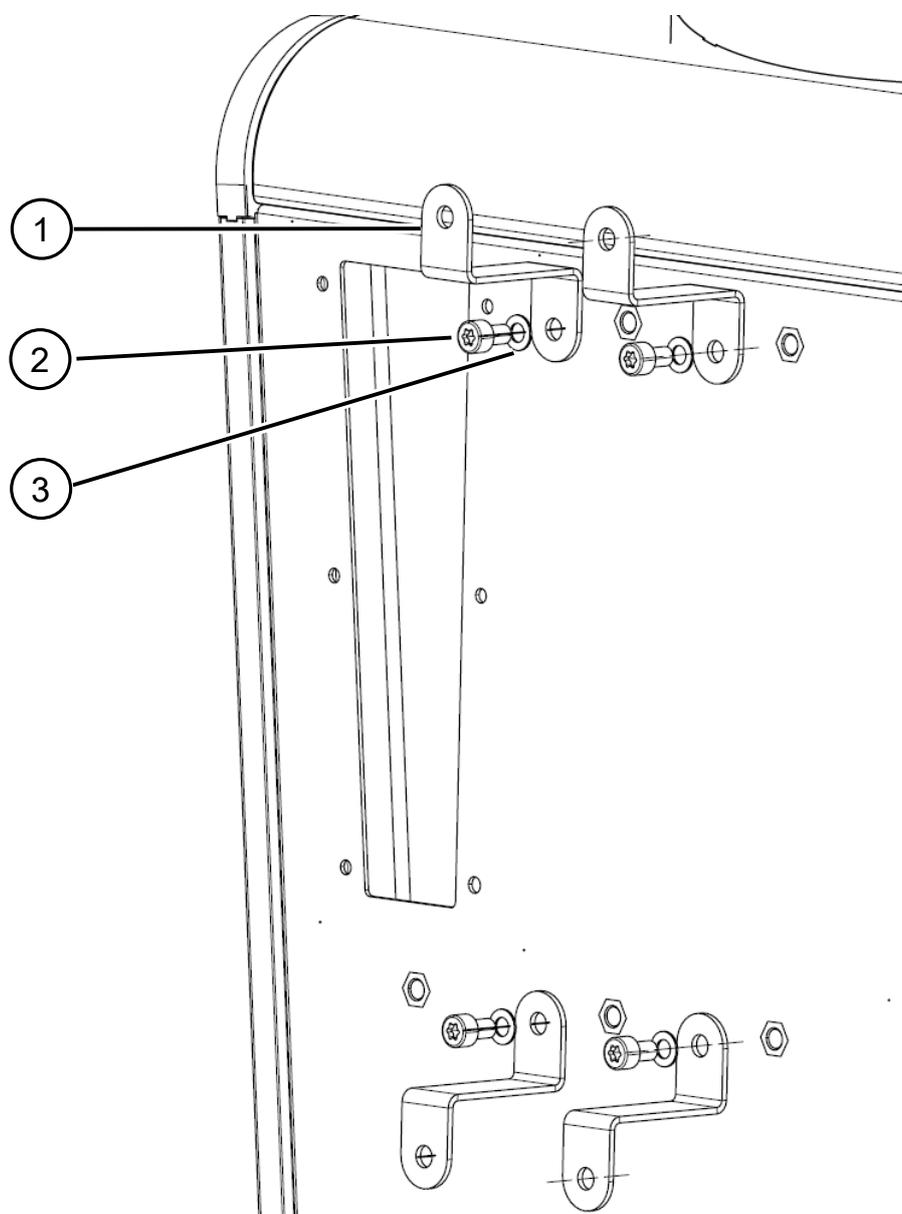

1 フック

2 ネジ M6 x 12

3 ロックワッシャー S6

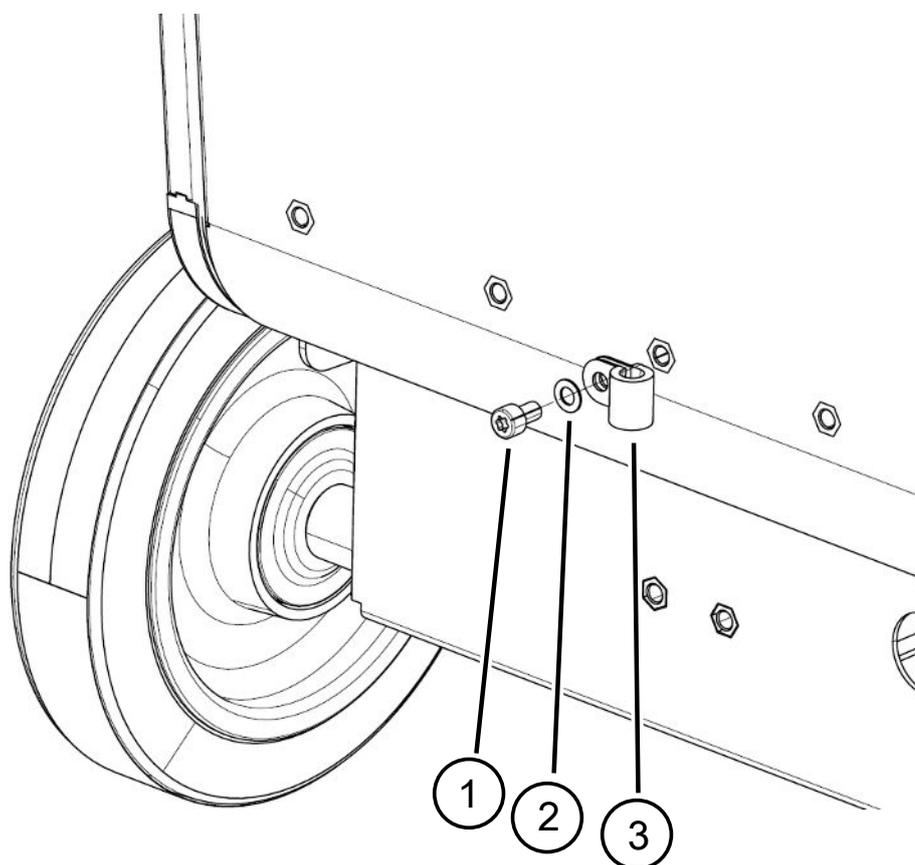


図 8: デバイスまたはオプションのポンペホルダーに取り付けたフック

「電源ケーブルクリップ」の取り付け

	数量：
電源ケーブルクリップ	1
ネジ M6 x 12	1
ロックワッシャー S6	1
必要な工具（付属）	レンチ T30

- 電源ケーブルへのつまずきを防止するため、「電源ケーブルクリップ」をデバイスに取り付けます。これにより、電源ケーブルをデバイスから床面へまっすぐ下ろすことができます。
- デバイスにボンベホルダーを取り付けた場合は、電源ケーブルクリップをボンベホルダーに取り付け、付属のナットでネジを固定します。




1	ネジ M6 x 12	2	ロックワッシャー S6
3	電源ケーブルクリップ		

「フレキシブルチューブ用ブラケット」の取り付け (UL3000 Fab PLUSのみ)

納入品 (数量) : ホルダー一式 (1x)、ネジ M6 x 12 (3x)、ロックワッシャー S6 (3x)、セルフタッピングネジ (2x)

必要な工具 (付属) : キー T25 および T30

デバイスのインレットフランジと、テストチャンバーまたはテスト対象品を接続するフレキシブルチューブを固定するために使用します。

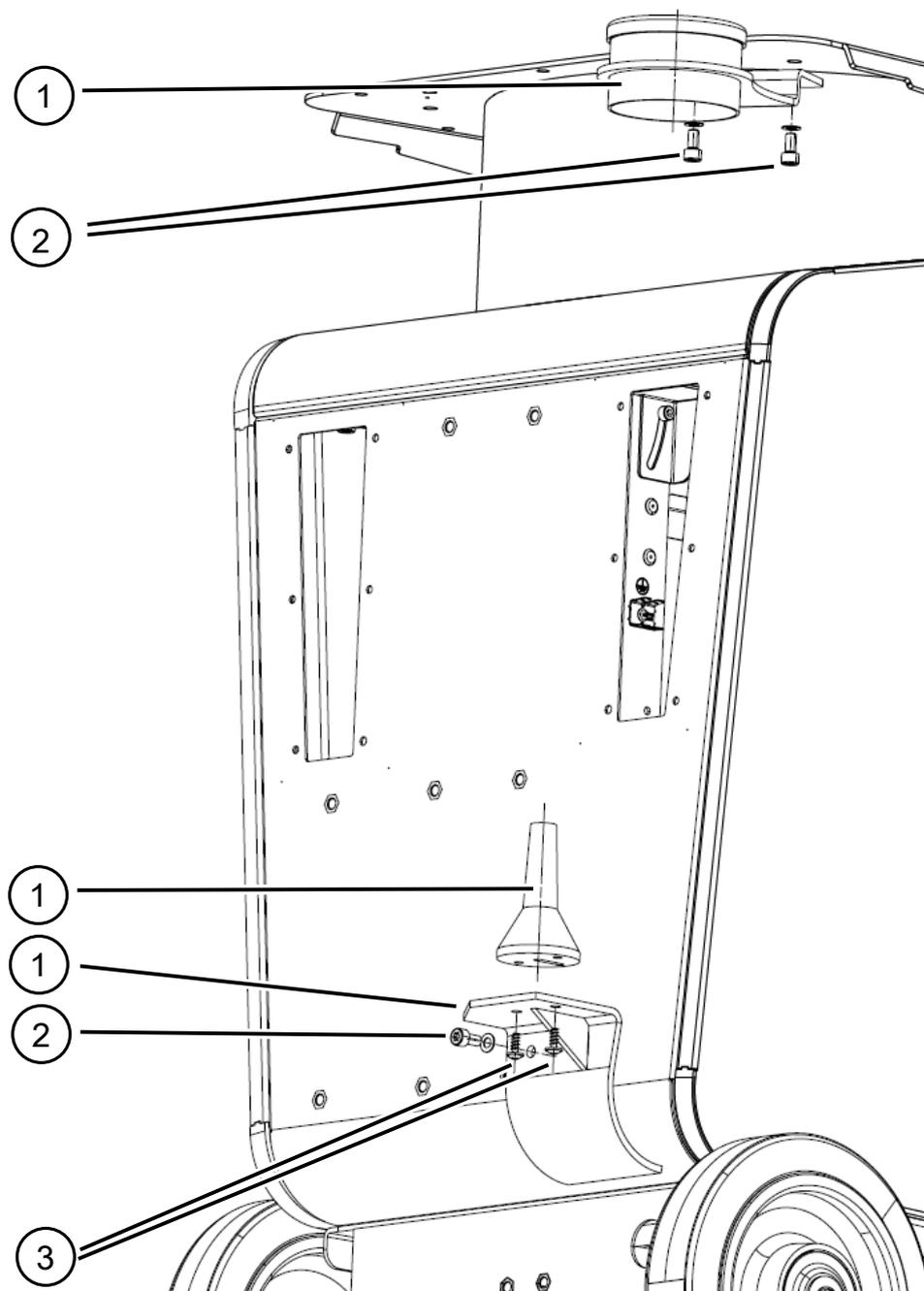

1	ホルダー一式	3	タッピングネジ
2	ネジ M6 x 12、ロックワッシャー S6		



図9: フレキシブルチューブ用ブラケットを取り付けた状態。



⚠ 警告


避難時のコルゲートホースの短縮

排気中、インレットに接続されたコルゲートホースは収縮します。

- ▶ コルゲートホースは、装置の安定性を損ねたり、短くしたときに抜けたりしないように取り付けてください。

デバイスの排気ホースアダプターの取り付け

- ガスをDN25排気ホースから排出するため、付属の排気ホースアダプターKF フランジ DN25をデバイス背面の排気ポートに取り付けます。
- 手を切らないように、排気ホースアダプターを取り付けるときは保護手袋を使用してください。
- 排気ホースアダプターの封止にはテフロンテープを使用してください。アダプターを時計回りに回して締め付けます。

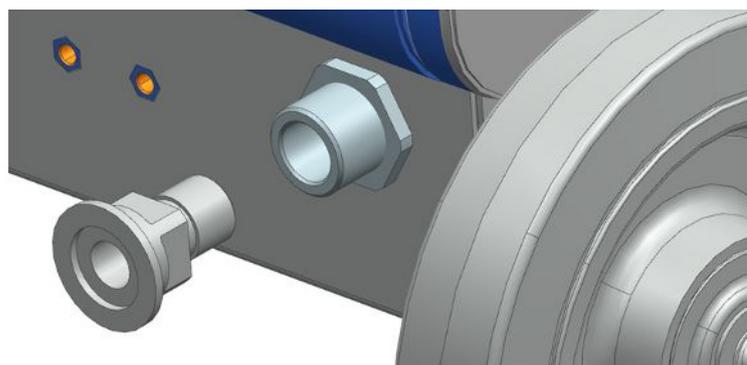

- ホースノズル（G ½ インチ 外周ネジ）付き排気ホースがある場合、このホースノズルを排気ポートに時計回りに回して固定することもできます。

警告

有毒ガスによる中毒の危険

接続したコンテナとそこに含まれているガスによっては、リークディテクターの排気フィルター経由で有毒ガスが大気中に排出される場合があります。

- ▶ 有毒ガスの吸引を防ぐ保護対策を講じてください。
- ▶ 有毒、腐食性、または爆発性の危険なガスをポンプアウトしないでください。
- ▶ 排気ホースを接続します。排気ガス接続は排気ガスシステムに連続的に接続し、絶対に閉じないでください。

5.3 スニファールインSL3000用ブラケットの取り付け（アクセサリ、オプション）

⚠ 警告

スニファーチップによる負傷の危険性


配線などにつまづいた際、特にスニファーチップが眼に接触すると、重傷に至る可能性があります。

- ▶ スニフリングチップによる怪我を避けるため、スニフリングチップがオペレータから離れる方向を向くようにホルダー内でスニフリングチップの位置を合わせてください。

スニファールイン用ブラケットを利用できます。ブラケットはデバイス背面に取り付けることができます。「デバイス全体 [▶ 26]」も参照してください。

納入品（数量）：

ブラケット（x1）、ネジM6 x 12 mm（x2）、ワッシャーS6 x 10 x 0.7 mm（x2）

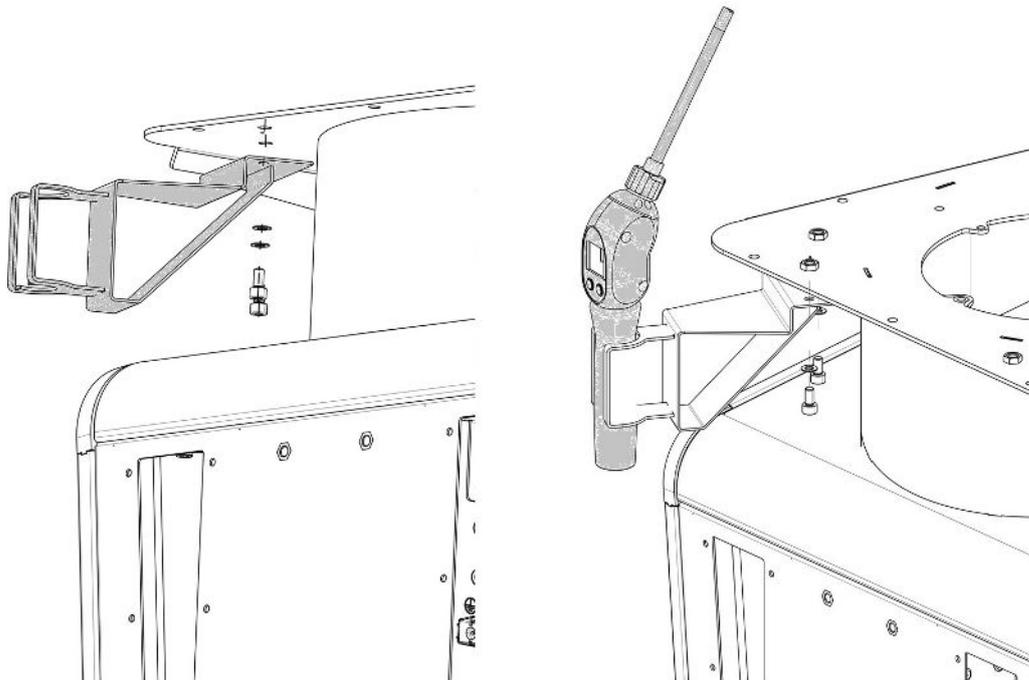

- 1 図のように、ネジ2本とワッシャー2個を使用して、ブラケットをデバイス背面に取り付けます。

- 2 スニファーラインを使用しないときには、スニファーチップをオペレーターに向けないようにしてください。

5.4 電源システムへの接続



⚠ 危険

感電による危険

適切な接地や保護されていない製品が故障した場合、死亡に至る危険性があります。保護接地が接続されていないデバイスの使用は認められていません。

- ▶ 付属の3芯式電源ケーブルのみを使用してください。
- ▶ 不具合のある電源ケーブルは交換してください。
- ▶ プラグタイプがNEMA5-15で電源が100～120 Vの地域（たとえば、北および中央アメリカ、台湾、および日本）では、付属の「病院グレード」の電源コードのみを使用できます。
- ▶ ケーブルが損傷している場合は、元の「病院グレード」のスペアパーツ（INFICON p/n 200000587）と交換する必要があります。
- ▶ 「病院グレード」の電源ケーブルには、NEMA5-15電源プラグと同じ文字と緑色の点が付いていることに注意してください。
- ▶ いつでも電源プラグに手が届くようにしてください。「アクセサリおよび制御信号接続部 [▶ 39]」も参照してください。
- ▶ 目に見える不具合が発生した場合、直ちに本デバイスを電源から切り離してしてください。煙の発生時にも同様にしてください。

注記

過剰な主電源電圧による物損

主電源電圧が高すぎると、デバイスが損傷する可能性があります。

- ▶ デバイスを接続する前に、デバイスの主電源電圧の仕様が使用現場で利用可能な主電源電圧と一致するかどうかを確認してください。

5.5 デバイスの運転確認

注記

急激な揺さぶりによるターボ分子ポンプの損傷

急激な揺さぶりなどの動きによって、ターボ分子ポンプが損傷する可能性があります。

- ▶ デバイス運転中およびオフにしてから2分間は、デバイスを揺さぶったり、振動を与えないように注意してください。

周囲温度が10℃未満のときは、デバイスをオンしないでください。

✓ DN 25 KF ブランクフランジが付属しています（またはインレットフランジに取り付けられています）。

✓ ヘリウム外部校正器を利用できます（オプション）。

- 1 デバイスを開梱し、納入品に外観不良などが無いことを確認します。
- 2 インレットにblankフランジが取り付けられていることを確認します。取り付けられていない場合は、Oリング付きセンターリングと共にblankフランジをデバイス上部のインレットに取り付けます。
- 3 デバイスを電源に接続します。
- 4 電源スイッチからリークディテクターをオンします。

⇒ オンすると、ターボ分子ポンプの速度、フォアライン圧力、エミッション、使用中のカソードなどの各種ステータス情報がタッチスクリーンに表示されます。起動プロセスには約3分を要し、完了すると短い音響信号が鳴ります。この時点で、デバイスは「スタンバイ」モードになります。

- 5 STARTボタンを押します。

⇒ インレットが真空排気され、測定モードになるとリークレートが表示されます。

テスト対象品が接続されている場合、この時点で外部からヘリウムを吹き付けます。

- 6 バックグラウンド信号（テスト対象品内のヘリウムバックグラウンド）を抑制する場合は ZERO ボタンを押します。
バックグラウンド抑制を解除する場合は、コントロールパネルの ZERO ボタンを 2~3 秒長押しします。「ZERO ボタン [▶ 32]」を参照してください。
- 7 STOP ボタンを押します。
 - ⇒ デバイスは「スタンバイ」モードに切り替わります。
コントロールパネルの STOP ボタンを数秒長押しすると、デバイスのインレットがベントされます。
- 8 テストを終了する場合は、この時点でデバイスをオフしてください。
- 9 さらに高い品質の測定結果を得るための内部校正は、デバイスが起動してから少なくとも 15~20 分経過後に行ってください。
- 10 キャリブレーションメニューに入るには、 ボタンを押します。
- 11 「内部」を選択します。
- 12  ボタンを押します。
 - ⇒ 自動内部校正が開始されます。内部校正は約 30 秒要します。
- 13 オプションのヘリウム外部校正器を使用してデバイスの測定精度を確認する場合は、インレットからブランクフランジを取り外して、開いているヘリウム外部校正器を接続します。
- 14 START ボタンを押します。
 - ⇒ インレットが真空排気され、テスト対象品のリークレートが測定・表示されます。
- 15 測定を中断するには STOP ボタンを押します。
 - ⇒ デバイスはスタンバイモードに切り替わります。
- 16 ディスプレイに STANDBY / VENTED メッセージが表示されるまで、コントロールパネルの STOP ボタンを押し続けます。
 - ⇒ インレットはベントされた状態になります。
- 17 インレットからヘリウム外部校正器を取り外し、インレットにブランクフランジを戻します。
- 18 電源スイッチでデバイスをオフします。

6 運転

6.1 デバイスをオンする

- ▶ デバイスをオンするには、電源スイッチを押します。
 - ⇒ 工場出荷時設定では、デバイスの準備が完了すると、「」ウィンドウが表示されます。



図 10: 「」ウィンドウ

	測定開始		校正
	パーズ		ベント

これについて参照する

- 📄 通知のオン／オフ [▶ 80]

6.2 基本設定



デバイスの実際の設定はいつでも保存して後で使用することができます。「パラメーターセットの保存と管理 [▶ 108]」も参照してください。

6.2.1 ユーザーインターフェースの言語の設定

ユーザー設定で言語を設定できます。「ユーザープロファイルの選択、編集、作成 [▶ 65]」を参照してください。

6.2.2 日付・時刻・タイムゾーンの設定

✓  スーパーバイザー権限

- 1  > セットアップ > 一般 > 日付および時刻
- 2 設定します。
- 3  で保存します。

ウィンドウ上部の  を押して設定を行うこともできます。

6.2.3 ユーザープロファイルの設定

6.2.3.1 ユーザー権限の一覧

個々のユーザーの権限は所属グループにより異なります。

User

 のUserは

- 測定の実行
- 測定結果の履歴表示
- デバイス情報の表示
- エラーログの表示

Operator

 Operator グループに属するスタッフは **User** の権限すべてを持ちます。さらに下記の作業ができます

- ユーザーの作成／変更／削除
- 測定データのエクスポート／削除
- 測定設定の変更

Supervisor

 Supervisor グループに属するスタッフは **User** および **Operator** グループのすべての権限を持ちます。さらに下記の作業ができます

- オペレーターの作成／変更／削除
- スーパーバイザーの作成／変更／削除

- ソフトウェアのアップデートの実行
- 日付／時刻の変更

6.2.3.2 ユーザープロファイルの選択、編集、作成

✓   **Operator**または**Supervisor**の権限

1  > ユーザーアカウント > ユーザーアカウントを管理

⇒ 既存ユーザーおよび所属グループがリスト形式で表示されます。

2 次のことを行えます

新しいユーザープロファイルを作成するには、ウィンドウ下部の  を選択します。

⇒ 「ユーザープロファイル」ウィンドウが開きます。

または、既存のユーザー名を押してツールバーから選択します。

 でユーザープロファイルを読み込みます。

⇒ ログインウィンドウが開きます。


 でユーザープロファイルを変更します。

⇒ 「ユーザープロファイル」ウィンドウが開きます。

 でユーザープロファイルを削除します。

⇒ 確認画面が表示されます。

3 いくつかのツールを選択後、「ユーザープロファイル」ウィンドウが開きます。このウィンドウが開いたら、必要に応じてユーザー名を入力、変更、またはそのまま維持します。

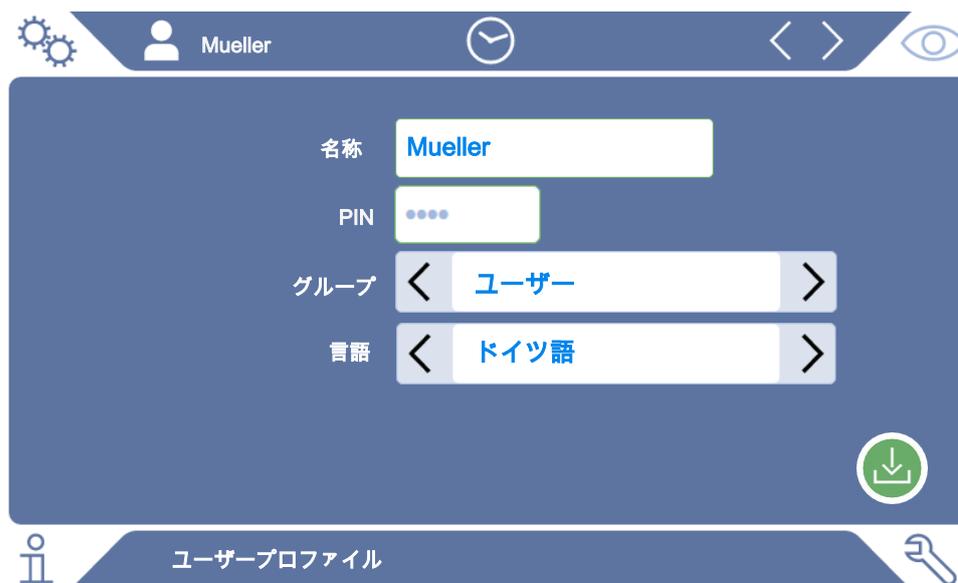

- 4 「PIN」フィールドが空欄の場合または内容を変更する場合は、4桁のPINを入力します。
- 5 ユーザーに必要な権限を割り当てるには、グループを選択します。〈および〉で、User、Operator、Supervisorのいずれかを選択します。「ユーザー権限の一覧 [▶ 64]」を参照してください。
- 6 「言語」フィールドで〈と〉を使用して、ユーザーに言語を割り当てます。
- 7 ↓で保存します。

6.2.3.3 個人設定の変更

制限された権限を持つユーザー（**ユーザーグループ**）でも、言語やPINを変更できます。関連付けられたユーザープロフィールも同様に変更されます。すべてのユーザープロフィールにアクセスする必要はありません。

- 1 ディスプレイ左上に表示されている名称を押します。
⇒ 「ユーザーアカウント」ウィンドウが開きます。
- 2 必要に応じて「自分のPINを変更」ボタンまたは「自分の言語を変更」ボタンを押します。

これについて参照する

- デバイスからのログオフ [▶ 116]

6.2.4 自動ログインのオフ



工場出荷時設定

ログイン：Supervisor

PIN：1111

言語：English

工場出荷時設定では、デバイスをオンすると自動的にSupervisor ユーザーとしてログインし、測定画面が呼び出されます。この初期設定ユーザーは「Supervisor」グループの権限を持ちます。この設定を変更しない限り、どのユーザーも制限なしにすべての機能を使用できます。

デバイスをオンした際に、自動ログインせずにログインウィンドウを表示するように設定できます。

ログインウィンドウでは、デバイスに登録済みのユーザーであればログインできます。「ユーザープロファイルの選択、編集、作成 [▶ 65]」を参照してください。

✓ スーパーバイザー権限

- 1  > ユーザーアカウント > 自動ログインの管理
- 2 「自動ログインの管理」ウィンドウで「有効」オプションを無効にします。
- 3  で保存します。

⇒ デバイスを再起動すると、最新の設定内容が適用されます。

6.2.5 自動ログインのオン

デバイスをオンした際に、ログインウィンドウを表示せずに、選択したユーザーを自動的にログインさせるように設定できます。

✓ スーパーバイザー権限

✓ 指定されたユーザーは既に登録されています。「ユーザープロファイルの選択、編集、作成 [▶ 65]」を参照してください。

- 1  > ユーザーアカウント > 自動ログインの管理
- 2 「自動ログイン管理」ウィンドウで「有効」オプション」を有効にします。
- 3 「名称」フィールドにユーザー名を入力します。大文字／小文字は区別されません。

- 4 「PIN」フィールドにユーザープロファイルの現在のPINを入力します。
- 5  で保存します。

6.2.6 測定画面の表示



各種のグラフ表示を切り替えるには、測定画面の左下を押します。「タッチスクリーンの構成 [▶ 34]」を参照してください。

次の表示から選択できます：

- 線グラフ
- バーグラフ
- 円グラフ

各グラフ表示をさらに詳細に設定できます。「線グラフ表示の変更 [▶ 69]」、「バーグラフ表示の変更 [▶ 70]」、「円グラフ表示の変更 [▶ 71]」を参照してください。

これについて参照する

-  [線グラフ表示の変更 \[▶ 69\]](#)
-  [バーグラフ表示の変更 \[▶ 70\]](#)
-  [円グラフ表示の変更 \[▶ 71\]](#)

6.2.6.1 線グラフ表示の変更



図 11: 線グラフの表示

- ✓ **Operator**または**Supervisor**の権限
 - 1 > 表示 > 線グラフ
 - 2 「スケーリング」フィールドで「Linear」か「対数」かを選択します。
 - 3 「桁数」で表示可能な桁数を選択します。
 - 4 リークレートの上限と下限を動的に調整するには、オプション「自動スケーリング」を選択します。
 - 5 フィールド「時間軸」で時間軸の長さとして「30」「60」「90」「120」「240」（秒）のいずれかを選択します。
 - 6 オプション「自動スケーリング」が有効でないときは、フィールド「グラフ下限」で希望するデケード数を選択します。
 - 7 で保存します。

6.2.6.2 バーグラフ表示の変更



図 12: バーグラフの表示

✓ **Operator**または**Supervisor**の権限

- 1 > 表示 > バーグラフ
- 2 「スケーリング」フィールドで「Linear」か「対数」かを選択します。
- 3 表示可能な「デケード」を選択します。
- 4 リークレートの上限と下限を動的に調整するには、オプション「自動スケーリング」を選択します。
- 5 「自動スケーリング」オプションが有効でない場合は、「グラフ下限」フィールドで任意の桁数を選択します。
- 6 で保存します。

6.2.6.3 円グラフ表示の変更

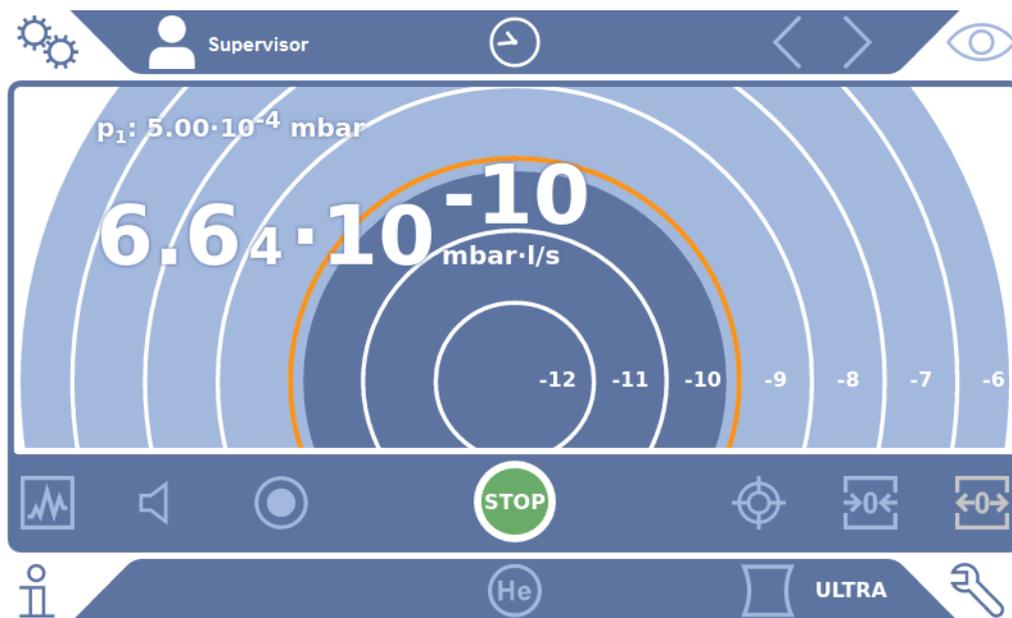


図 13: 円グラフの表示

✓ **Operator**または**Supervisor**の権限

- 1 > 表示 > 円グラフ
- 2 円グラフに表示する桁数を固定する場合は、「decade」で表示する桁数を選択します。自動的なスケールが無効の場合にのみ適用されます。
- 3 リークレートの表示範囲を動的に調整するには、「自動スケール」オプションで自動スケールを有効にします。
- 4 「グラフ下限」フィールドで、円グラフにおける任意の下限を選択します。「自動スケール」オプションが有効の場合でもこの下限は適用されます。
- 5 で保存します。

6.2.6.4 一般表示設定の変更

✓ **Operator**または**Supervisor**の権限

- 1 > 表示 > 一般的な表示の設定
- 2 アプリケーションで低いリークレートを対象とせず、リークレートの下限を上げる場合は、「リークレート下限の引き上げ」で1~6桁のいずれかを選択します。リークレートの下限を上げることで、リークレート表示の評価が容易になる場合があります。

3 「スタンバイ」ウィンドウに、内部バックグラウンドリークレート表示の有無を設定するには、「スタンバイでのバックグラウンド表示」オプションを有効または無効にします。

⇒ 内部バックグラウンドは排気し切れない残留ガスにより生成されます。非常にクリーンなシステムでは、バックグラウンドは 1×10^{-11} mbar l/s 範囲を示します。通常の条件下でのバックグラウンドは 1×10^{-10} mbar l/s または 1×10^{-9} mbar l/s 範囲です。内部バックグラウンドの詳細な処理については「バックグラウンド抑制の変更 [▶ 91]」を参照してください。

4 ↓で保存します。

6.2.7 オートリークテストの結果表示



- 1 「部品番号」に対して最後に実行されたテスト結果が「合格」または「不合格」として示されます。リークレートがセットポイントを超えた場合、テストは不合格となります。
- 2 設定した制限時間内における実際のテスト時間です。「自動リークテストの設定 [▶ 83]」を参照してください。
- 3 「部品ナンバリング」により割り当てられた部品番号です。部品番号は、開始番号から自動的に増加します。「自動リークテストの設定 [▶ 83]」を参照してください。

4	不合格が連続した場合、警告限界まで増加します。テスト合格後、不合格テストのカウントは0にリセットされます。「自動リークテストの設定 [▶ 83]」を参照してください。
5	オートリークテストの一時停止：テストチャンバーが閉じているとき、このボタンを押して、次に表示されるウィンドウで確認することで、測定を中断できます。テストチャンバーは真空排気された状態を維持します。
6	測定結果
7	運転モード「自動リークテスト」が有効です。「動作モードの選択 [▶ 81]」を参照してください。

6.2.8 単位の変更

運転モード「真空」においては、「Torr·l/s」、「atm·cc/s」、「Pa·m³/s」、「mbar·l/s」のいずれかの単位を選択できます。

運転モード「スニファーマ」に切り替えると、上記に加えて「oz/yr」、「g/a」、および「ppm」も選択できます。

次の圧力単位を選択できます：「mbar」、「Pa」、「atm」、および「Torr」

✓  **Operator**または**Supervisor**の権限

- 1  > セットアップ > 一般 > 単位設定
- 2 必要に応じて「リークレート単位 真空」、「リークレート単位、スニファーマ」、「圧力単位」の単位を変更します。
 - ⇒ インターフェースの単位をデバイスの単位を一致させるため、工場出荷時設定では「表示に同じ」オプションが有効になっています。
- 3 インターフェースの単位を独立して変更するには、「表示に同じ」オプションを無効にします。
 - ⇒ インターフェースの単位を設定するためのフィールドが表示されます。
- 4 選択した単位をインターフェースでも使用するには、「表示に同じ」オプションを有効にします。
- 5  で保存します。

6.2.9 オーディオ設定の変更

測定結果の視覚的表示に加えて、音量、通知音、オーディオアラームも設定できます。

注意

大音量オーディオによる聴覚の損傷

本デバイスのアラーム音量は85 dB (A) を超える場合があります。

- ▶ 音量の設定は最大「5」までにしてください。
- ▶ 「5」を超える音量を設定する場合は、適切な聴覚保護具を使用してください。

✓ Operator または Supervisor の権限

1 > オーディオ

2 オーディオアラームや通知音の音量を変更するには、任意の「音量」を選択します。次のフィールドの「最小音量」の設定値を下回らないようにしてください。

⇒ 設定範囲：0～15

⇒ 設定した音量は「テスト」ボタンで聴くことができます。

3 必要に応じて最小音量を変更できます。

⇒ 「最小音量」は、オーディオアラーム音量の最小値であり、この値を下回ることはできません。0より大きい値を選択すると、音量アイコンを押した後に、測定画面に最小音量レベルが表示されます。これにより、許可されていないユーザーが周囲の騒音レベルを下回る値に設定することを防止できます。

⇒ 設定範囲：0～15

4 アラームの条件や通知音の種類をより詳細に設定する場合は、「音響アラームの種類」の設定において「リークレート比例」、「PINPOINT」、「SETPOINT」、「TRIGGER」、「オフ」のいずれかを選択します。

⇒ 「リークレート比例」：音響信号の周波数は、バーグラフ表示またはリークレートの大きさに比例します。周波数範囲は300Hz～3300Hzです。

- ⇒ 「PINPOINT」：音響信号の音の周波数は、特定のリークレート範囲内で変化します。この範囲は、選択したセットポイント値より 1桁下から1桁上までです。このリークレート範囲未満では音が常に低くなり、リークレート範囲以上では音は常に高くなります。
 - ⇒ 「SETPOINT」：ピッチはリークレートに比例します。リークレートが設定したセットポイント1を超えると音が鳴ります。「セットポイントの設定 [▶ 81]」も参照してください。
 - ⇒ 「TRIGGER」：設定したセットポイント1を超えると2ピッチの音が鳴ります。「セットポイントの設定 [▶ 81]」も参照してください。
- 5 STARTボタンを押してから一定時間が経過するまでのアラームを抑制する場合は、「オーディオアラーム遅れ」を設定します。例：チャンバーシステムの真空排気時間中にアラームが鳴らないようにします。
- ⇒ STARTボタンを押した後、リークレートがセットポイント1を下回るか、アラーム遅延時間が経過すると音響信号が作動します。この設定は、オーディオアラーム「SETPOINT」および「TRIGGER」のみに有効です。
- 6 通知音を鳴らす場合は、「通知音」オプションを有効にします。
- 7  で保存します。

6.2.10 保護設定の変更

グロスリークによるヘリウム汚染や微粒子の侵入からデバイスを保護できます。さらに、最大真空排気時間も変更できます。

✓  スーパーバイザー権限

1  > セットアップ > 測定 > 保護

2 グロスリーク保護を有効にするには、「グロスリーク保護」オプションを有効にし、「グロスリーク保護限界」でシャットダウンしきい値を設定します。

⇒ 測定されたリークレートが停止閾値を超えると、デバイスは直ちにインレットバルブを閉じます。これにより、質量分析管への過剰なヘリウムの流入を防ぎます。この結果、ヘリウムによるリークディテクターの汚染を防ぎます。テスト対象品に流入したヘリウムは、外部ポンプを使用して排出できます。外部ポンプを使用しない場合は、測定を継続する前にテスト対象品をベントすることを推奨します。

3 微粒子がデバイス内に吸引されることを防止するには、並行して稼動する別のポンプを使用してテスト対象品を真空排気してください。「微粒子保護」オプションをさらに有効にします。

⇒ リークディテクターでは、インレット圧力が 1 mbar 未満になると真空排気を開始します。

4 注記：次の設定は真空範囲「MASSIVE」がオンの場合には適用されません。

「真空レンジの有効化 [▶ 82]」も参照してください。

グロスリーク検知後に最大真空排気時間を変更するには、「真空排気時間（グロスリーク）」の下に任意の時間を秒単位で入力します。

⇒ この設定により、グロスリーク警告メッセージが出力されるタイミングが決定します。工場出荷時設定は 600 秒です。この時間内にインレット圧力が 100 mbar を下回らない場合、警告メッセージが出力されます。この設置項目は、同一テスト条件下で連続して実施されるテストで特に役に立ちます。START ボタンを押した後、試験片が真空排気されます。ここで設定した時間内に、対応する圧力条件 ($p1 < 100 \text{ mbar}$)、もしくはそれ未満に到達しない場合、真空排気プロセスは中止され、警告メッセージがディスプレイに表示されます。

選択する時間は、グロスリークメッセージが発生するまでの時間と、テスト対象品の体積およびポンプの有効排気速度に依存します。

真空排気プロセスを中止しない場合は「0」を入力します。これは「無限」と入力したことに相当します。

5 注記：次の設定は真空範囲「MASSIVE」がオンの場合には適用されません。

「真空レンジの有効化 [▶ 82]」も参照してください。

測定前に最大真空排気時間を変更するには、「真空排気時間、測定」の下に任意の時間を秒単位で入力します。

「真空排気時間、測定」は、最初に承認された測定範囲に到達するまでの時間に関連します。

工場出荷時設定は 1800 秒です。

⇒ 真空排気時間内に定められた圧力条件に到達しない場合、真空排気時間経過後に警告メッセージが表示されます。圧力条件については、次の設定オプションも参照してください：

⚙️ > 設定 > 測定 > 圧力限界

および

⚙️ > 設定 > 測定 > 真空 > 真空範囲

6 ↓で保存します。

6.2.11 「スニファーチップフィルター」または「エアフィルター」の保守間隔の設定

保守間隔をデバイス設置場所の汚染の程度に適合させるため、標準値のほかにユーザー設定の保守間隔を選択することもできます。

✓  スーパーバイザー権限

1  > セットアップ > メンテナンスカウンター

2 設定します。

⇒ 「スニファーチップフィルター」に対しては、希望する時間数を入力するか、「標準値」ボタン（1000 時間）を押します。

⇒ 「エアフィルター」に対しては、希望する時間数を入力するか、「標準値」ボタン（2500 時間）を押します。

3 ↓で保存します。



保守を実施した後、希望する間隔を改めて設定してください。

これについて参照する

-  ツールボックス内部のフィルターマットの交換 [▶ 141]
-  デバイス底部のフィルターマットの交換 [▶ 142]
-  スニファーラインSL200のフィルターの交換 [▶ 144]
-  スニファーラインSL3000のフィルターの交換 [▶ 146]

6.2.12 保守要求の有効化または無効化

保守の期限を超過したときの警告をオンまたはオフにするために使用されます。また、次回の保守までの時間がここに表示されます。

✓  スーパーバイザー権限

1  > セットアップ > 保守要求

⇒ 「メンテナンス要求の有効化／無効化」ウィンドウでは下記のコンポーネントに対する保守要求を有効または無効にすることができます：

- － 校正リーク
- － ターボ分子ポンプ
- － スニファーチップフィルター
- － フォアラインポンプ
- － 排気フィルター
- － エアフィルター

2 設定します。

3 ↓で保存します。

6.2.13 校正要求の有効化・無効化

オプション「校正要求」を無効（初期設定）にすると、校正要求は下記の場合にのみ表示されます。

- ・ 操作モード「自動リークテスト」が有効な状態で、自動リークテストのテスト時間を変更したとき。
- ・ 最近のシリアル番号を持つ SL3000 スニファーラインを接続したとき（UL3000 Fab PLUS のみ）
- ・ 装置の操作盤で操作モードを変更し、新しい操作モードでの校正が直近の 24 時間以内にまだ行われていないとき。

オプション「校正要求」を有効にすると、下記の場合にも校正要求が表示されます。

- ・ 装置の運転時間が 30 分を超え、直近の校正時に比べて温度が 5 K 以上変化したとき。
- ・ 現在選択されている操作モードで過去 24 時間以内に校正が行われていないとき。

✓  **Operator** または **Supervisor** の権限

1  > セットアップ > 測定 > その他

2 その他の校正要求を作動させるには、オプション「校正リクエスト」を有効にします。停止するにはこのオプションを無効にします。

3 ↓で保存します。

6.2.14 操作オプションの拡大または縮小

デバイスの操作は常にタッチスクリーンで行えます。さらに、工場出荷時設定を変更して、コントロールパネルのボタンやリモートコントロールによる操作もに可能になります。

✓  **Operator**または**Supervisor**の権限

1  > セットアップ > 測定 > その他

2 「ローカルコントロール」で次のいずれかを選択してください。

⇒ 許可する：

コントロールパネルの START、STOP、ZERO の各ボタン、およびリモートコントロールのボタンが使用できます。タッチスクリーンによる操作は、ログインしているユーザーがない場合のみ無効にできます。

⇒ ログイン後に許可する。

コントロールパネルの START、STOP、ZERO の各ボタン、およびリモートコントロールのボタンは、ユーザーが有効なPINでデバイスにログインした後に使用可能になります。

⇒ 許可しない：

デバイスはタッチスクリーンのみで操作できます。コントロールパネルの START、STOP、ZERO の各ボタンは使用できません。リモートコントロールのボタンも同様に使用できません。

3  で保存します。

6.2.15 お気に入りの使用

自由に割り当てられるメニューボタンを「お気に入り」ウィンドウに登録することで、使用頻度の高い機能をメニューから選択する時間を短縮できます。

お気に入りの使用：

▶ 権限に対応するアイコン 、、 を押した後、「お気に入り」ボタンを押します。

または、次のように選択します。

▶  > ユーザーアカウント > お気に入り

- ⇒ 9個のボタンがあるお気に入りウィンドウが表示されます。割り当てたボタンを使用して、目的の機能をすばやく呼び出すことができます。

お気に入りの登録：

- 1 お気に入りウィンドウで未登録のボタンを押します。
- 2 表示されるリスト一覧から目的のメニュー名を選び、で確定します。
 - ⇒ 「お気に入り」ウィンドウで  を押し、未登録の項目をマークし、 により表示されるリスト一覧から目的のメニュー名を選択します。

お気に入りの変更または削除

- 1 お気に入りウィンドウで  を押します。
 - ⇒ 変更する項目を押すと「管理」ウィンドウが開きます。
 - ⇒ アイコン  および削除用のアイコン  が表示されます。
- 2 アイコン  を押すと、一覧リストとメニュー名が表示され、必要な項目を選択して、 を押すと、選択した内容が保存されます。

6.2.16 通知のオン／オフ

✓ スーパーバイザー権限

- 1  > セットアップ > 一般 > 通知
- 2 必要に応じて、「排気ホースの接続に関する注意事項」フィールドの設定を変更します。
 - ⇒ オプション有効：注意事項が表示される（工場出荷時設定）
 - ⇒ オプション無効：注意事項が表示されない
- 3 必要に応じて、「期限が近付いている校正リークメンテナンスに関する注意事項」フィールドの設定を変更します。
 - ⇒ オプション有効：注意事項が表示される（工場出荷時設定）
 - ⇒ オプション無効：注意事項が表示されない
- 4 必要に応じて、「通知から校正リークメンテナンス要求までの週数」を変更します。
 - ⇒ 設定範囲：1～12週間（工場出荷時設定：4週間）
- 5  で保存します。

6.3 測定のための設定

6.3.1 動作モードの選択

✓  OperatorまたはSupervisorの権限

- 1  > 運転モード
- 2 「真空」、「スニファ/SL200」、または「自動リークテスト」から選択します。UL3000 PLUS では「スニファ/SL3000」も選択できます。
- 3  で保存します。

6.3.2 ガスの選択



危険

水素爆発の危険

水素は酸素と結合して爆発することがあります。市販の混合ガスの組成の許容範囲については、製造者の安全データシートを参照してください。

- ▶ 水素濃度が指定の値を超えないように注意してください。

✓  スーパーバイザー権限

- 1  > セットアップ > 測定 > 質量
- 2 下記のいずれかを選択します：
 - 「水素」 H_2 (2 amu)
 - 「ヘリウム」 ^4He (4 amu)
 - 「質量 3」 ^3He (3 amu)
- 3  で保存します。

6.3.3 セットポイントの設定

セットポイント1、2、3および4のリークレートは個別に設定可能です。

セットポイント超過の場合：

- セットポイント1または2を超えると、測定ウィンドウ内の測定ラインの色が変わります。

- デジタル出力のセットポイントリレーが切り替わります。「I/Oモジュール [▶ 161]」またはインターフェースの説明も参照。

セットポイント1は、さまざまなアラームのトリガーセットポイントも定義します。「オーディオ設定の変更 [▶ 74]」も参照。さらにI•ZEROの限界値ともなります。「ZERO機能の設定と適用 [▶ 87]」を参照してください。

✓  **Operator**または**Supervisor**の権限

- 1  > セットポイント
- 2 設定します。
- 3  で保存します。

6.3.4 真空レンジの有効化

真空レンジ

測定に対して、MASSIVE、GROSS、FINEおよびULTRAの真空レンジを有効化できます。

4つの範囲をすべて同時に有効化できます。複数の範囲を有効化した場合、インレット圧力に応じて自動的に切り替わります。これにより、異なる感度で測定が可能です。

1つ以上の範囲を有効にする必要があります。

✓  **Operator**または**Supervisor**の権限

- 1  > セットアップ > 測定 > 真空 > 真空範囲
- 2 「真空度範囲」で、任意の真空レンジを有効にします。
- 3  で保存します。

6.3.5 フォアラインポンプの速度への影響

✓  **スーパーバイザー**権限

- 1  > セットアップ > 測定 > 真空 > フォアラインポンプ
- 2 必要ならば、「フォアラインポンプモード」の設定を変更します。
 - ⇒ 「自動」（工場出荷時設定）
 - 可能であれば、フォアラインポンプの速度を下げます。
 - ⇒ 「固定」
 - フォアラインポンプは固定速度で作動します。

6.3.6 自動リークテストの設定

運転モード「オートリークテスト」および測定に関する注意点をよく確認してください。運転モード「オートリークテスト」 [▶ 25]、「動作モードの選択 [▶ 81]」、「測定 [▶ 98]」および「オートリークテストの結果表示 [▶ 72]」も参照してください。

✓  **Operator**または**Supervisor**の権限

1  > セットアップ > 測定 > 真空 > 自動リークテスト

⇒ 次の設定を編集できます：

- 「最小検査時間」
- 「最大検査時間」
- 「リークレートセットポイント1」：セットポイント1を変更します。「セットポイント」ウィンドウで同じ閾値を設定することもできます。「セットポイントの設定 [▶ 81]」を参照してください。
- 「部品ナンバリング」：この機能を有効にすると、各テストに番号が割り当てられます。これにより、テスト結果のトレーサビリティが向上します。「結果ログの呼び出し [▶ 107]」を参照してください。
- 「部品番号」：部品番号を割り当てます。測定ごとに、この部品番号が開始番号になります。
- 「連続不良テストの警告限界」：入力した値に到達すると警告メッセージが表示されます。

2 設定します。

3  で保存します。

6.3.6.1 測定チャンバーのバックグラウンドの考慮

テストの失敗が連続するなど、予期しない結果が現れた場合には「参照測定」を行うことを推奨します。この測定を定期的に繰り返すことも考えられます。

✓ 測定チャンバーを組み立て、空のまま閉じます。

✓ 操作モード「自動リークテスト」

✓ 装置を「スタンバイ」状態にします。

1  を押します。

2 「参照測定」を選択します。

3  を押します。

- ⇒ チャンバーが3回真空排気され、ベントされます。
- ⇒ この清浄作業の後、実際のヘリウムバックグラウンドを測定します。
- ⇒ バックグラウンドの新しい測定値は自動的に保存され、今後の測定結果から差し引かれます。

これについて参照する

📖 オートリークテストの結果表示 [▶ 72]

6.3.7 HYDRO•S (UL3000 Fab PLUS のみ)

真空モードで大きなテストオブジェクトを測定する場合に、HYDRO•Sを使用すれば、測定が可能になるまでの時間を短縮することができます。運転モード「真空」[▶ 23]も参照してください。

6.3.7.1 HYDRO•S の設定 (UL3000 Fab PLUS)



HYDRO•S が使えるかどうかは、ここに述べる基本設定のほか、選択した操作モードや運転状態などの条件によります。「HYDRO•S の使用 (UL3000 Fab PLUS) [▶ 85]」を参照してください。

✓ 👤 スーパーバイザー権限

1 ⚙️ > セットアップ > 測定 > HYDRO•S

2 下記のいずれかを選択します：

HYDRO•Sを使用せず、手動操作も行わない場合は「無効」（初期設定）

HYDRO•Sの有効・無効を測定画面の🔘で切り替えたい場合は「手動」。「タッチスクリーンの構成 [▶ 34]」も参照してください。

可能な限り HYDRO•S を使用したい場合は「自動」。

3 ⬇️ で保存します。

4 HYDRO•Sを「手動」または「自動」に設定したときは校正を行ってください。

「校正 [▶ 94]」を参照してください。

6.3.7.2 HYDRO•S の使用 (UL3000 Fab PLUS)

HYDRO•S 手動

- ✓ HYDRO•Sを「手動式」に設定します。「HYDRO•S の設定 (UL3000 Fab PLUS) [▶ 84]」を参照してください。
- ✓ ガスタイプとしてヘリウム (質量 4) を選択します。ガスの選択 [▶ 81] を参照してください。
- ✓ 動作モード「真空」を有効にします。
- ✓ 真空範囲 ULTRA に到達させます。
- ✓ デバイスを「測定」状態にします。
- ✓ 現在のリークレートが 3×10^{-10} mbar l/s を超えるようにします。
- ✓ ZEROをオフにします。HYDRO•Sをオンにした後で、ZERO を再び使用できます。「ZERO 機能の設定と適用 [▶ 87]」を参照してください。
- ▶ 測定画面の  を押して HYDRO•S のオン/オフを切り替えます。Stop により、HYDRO•S は毎回オフになります。

HYDRO•S 自動

- ✓ HYDRO•Sを「自動」に設定します。「HYDRO•S の設定 (UL3000 Fab PLUS) [▶ 84]」を参照してください。
- ✓ 前述の手動操作における他の条件を満たす必要があります。
- ✓ リークディテクターで現在の測定範囲を 5 秒以上維持している必要があります。
- ▶ HYDRO•Sは自動的にオンになります。
 - ⇒ HYDRO•Sは 1 回の測定サイクル (Stop/Start) の中で 1 回のみオンになります。
 - ⇒ 自動機能が有効であっても、HYDRO•S は  によりいつでもオン/オフを切り替えられます。
 - ⇒ HYDRO•Sを手動で切り替えると、次の測定サイクル (停止/開始) まで自動動作は無効になります。

6.3.8 装置係数の設定

操作モード「真空」で測定を行い、かつ外部ポンプを並行して使用している場合には、リークレートの測定値が内部校正に基づくリークレートより小さく出ます。

この差を補正するため、測定値に適切な装置係数を掛け、その結果を表示させることができます。この係数は真空モードの場合のみ適用され、スニファリングモードでは適用されません。

装置係数は装置のヘリウム吸引力を考慮して推定することもできます。より正確には、テストオブジェクトで外部校正リークのリークレートを、外部ポンプ使用の場合と不使用の場合とで測定します。この測定結果の差から装置係数が定められます。

装置係数は、空気換算値に対するリークレートの読み取り値を補正するためにも使用できます。この補正に対する装置係数は0.37です。

✓  **Operator** または **Supervisor** の権限

✓ 動作モード「真空」を有効にします。

1  > セットアップ > 測定 > 校正リーク

⇒ フィールド「装置係数、ヘリウム」が表示されます。

2 設定します。

3  で保存します。

6.3.9 外部校正リークの設定

校正に対して外部校正リークを使用するには、校正リークのリークレートを入力します。

✓  **Operator** または **Supervisor** の権限

1  > セットアップ > 測定 > 校正リーク

2 校正リークまたは証明書に示されている値と単位を使用します。

デバイスに他の単位が設定されている場合でも、数値と単位の組み合わせを変更しないでください。

3  で保存します。

これについて参照する

 外部校正 [▶ 95]

6.3.10 圧力限界の変更

真空モードに対する圧力限界です。

この機能を使用して、真空範囲 MASSIVE、GROSS、FINEおよびULTRAに関する工場出荷時設定の切り替え点を変更できます。これは、空気以外のガス、たとえばアルゴンを使用してデバイスで真空排気する場合に必要です。これは、内部のピラニ圧力ゲージのガスタイプ依存性によります。

事前設定された切り替えポイントを変更することで、これを補正できます。ガスタイプに依存するインレット圧力インジケータ（ピラニ）の圧力信号によって、デバイスのシーケンスコントロールに対応する切り替え値が提供されます。

✓ スーパーバイザー権限

1 > セットアップ > 測定 > 圧力限界

⇒ 次の圧力限界を変更できます。事前設定値については、これは以下に関連します。

MASSIVE-> GROSS

GROSS -> FINE

FINE ->ULTRA

2 空気用の工場出荷時設定に戻す場合は、「空気デフォルト」ボタンを押します。

⇒ 空気用のすべての工場出荷時の設定が設定されます。

⇒ 必要に応じて、圧力限界を個別に設定できます。「工場出荷時設定 [▶ 42]」も参照してください。

3 アルゴンの値を設定するため、「標準アルゴン」ボタンを押します。

⇒ 空気用の工場出荷時設定とは異なる、以下の設定が使用されます。

MASSIVE-> GROSS : 4 mbar

GROSS -> FINE : 1 mbar

FINE -> ULTRA : 0.2 mbar

⇒ 必要に応じて、圧力限界を個別に設定できます。

4 で保存します。

6.3.11 ZERO 機能の設定と適用

ZERO機能を使用する 小さいのリークを正確に測定するには、ZERO機能を使用します。

理由 リーク検出ごとに、リークの調査や測定を妨げる「バックグラウンド信号」（「用語の定義 [▶ 11]」を参照してください）が発生します。

- バックグラウンド信号を非表示にするには、ZERO機能を有効にします。
- また、ZERO機能を使用して、他のリークや小さいリークの調査と、干渉する現在表示中のリークを非表示にすることもできます。



現在表示中のリークは、ZEROから非表示にできません。

ZERO 機能を使用すると、バックグラウンド信号が非表示になるだけでなく、現在のリーク表示も非表示になります。

- ▶ これを防ぐには、リークを同時に測定しない場合に限り、ZERO機能を選択します。

ZERO の有効化または無効化

ZERO は工場出荷時設定で有効になっています。

- ✓  スーパーバイザー権限

1  > セットアップ > 測定 > ZEROおよびフィルター

2 必要に応じて「ZEROモード」を変更します。工場出荷時設定は「I•ZERO 2.0」です。

⇒ 「I•ZERO 2.0」、「ZERO」、または「オフ」を選択することができます。

⇒ 「オフ」を選択すると、ZEROボタンは動作しません。

3  で保存します。

- ⇒ ZERO が有効な場合、ZEROボタンを押すことで動作が開始します。「ZERO ボタン [▶ 32]」も参照してください。

ZERO 機能をオンにする方法

コントロールパネルまたはタッチスクリーン²⁰⁶でZEROボタンを短く押します。

ZERO 機能をオフにする方法

コントロールパネルまたはタッチスクリーンの²⁰⁷でZEROボタンを2秒以上長押しします。

「真空」運転モード、ZERO設定の効果

「I•ZERO 2.0」設定にした場合は、ZEROボタンを押すと、表示されていたバックグラウンド信号が現在のドリフトに応じてフェードアウトします。通常、表示限界は複数のステップに分かれます。現在の表示限界の大きさは、現在測定可能なリークの範囲です。測定時には、現在の表示限界は想定される測定値よりも1桁以上低くする必要があります。

「ZERO」設定にした場合は、ZEROボタンを押すと、現在表示されているリークレートの値が表示下限に設定されます。

「真空」運転モード、ZERO ボタンを押すと、現在のリークレート値が表示下限に設定されます。
 「HYDRO・S」オン、注記：バックグラウンドが急激に低下している場合、ZEROボタンを押さないでください。バックグラウンド変動と比較して小さいリークレート信号が誤って非表示にされる可能性があります。
 設定「I・ZERO 2.0」または「ZERO」

「スニファァ」運転モード、設定「I・ZERO 2.0」または「ZERO」 ZERO ボタンを押すと、現在のリークレート値が表示下限に設定されます。

6.3.12 ベント、ページ、再生

ベント 測定モードにおいてベント機能を使用することにより、測定後のデバイスのインレット、および接続されている検査対象品をベントします。これにより、真空による吸引作用がなくなるため、検査対象品を簡単に交換できます。

✓  **Operator** または **Supervisor** の権限

1  > セットアップ > 測定 > 真空 > ベント

2 必要に応じて、「ベント遅延」フィールドの設定を変更します。

⇒ 「すぐに」：「すぐに」が有効な場合は、スタンバイへ切り替わると同時にベントされます。

⇒ 「手動」：工場出荷時設定です。「手動」が有効な場合は、STOP ボタンの長押し、または「スタンバイ」ウィンドウの  を押すことでベントされます。「デバイスをオンする [▶ 63]」も参照してください。

⇒ 「ベントなし」

3 必要に応じて、「ソフトベント」フィールドの設定を変更します。

⇒ オプション有効：インレットのベントが非常に緩やかに行われます。テスト対象品内への粒子の混入の原因となる、強い気流が発生するのを防止するのに役立ちます。

⇒ オプション無効：工場出荷時設定

4  で保存します。

パーズ

パーズ機能を有効にすると（ドライ式のフォアラインポンプの場合）、「スタンバイ」状態において少量のガスがフォアラインポンプに導入されます。この機能は、チャンバーを真空排気したことによりフォアラインポンプ内に凝縮した水の除去や、ヘリウムバックグラウンドの低減に有効な場合があります。

警告

パーズガスに窒素またはアルゴンを用いることによる窒息の危険性

パーズガスとして使用する窒素またはアルゴンの濃度が屋内で高くなると、窒息を引き起こす可能性があります。

- ▶ これらのガスの濃度が密閉空間内で高まることのないように対策を講じてください。
- ▶ 排気ガスラインを接続します。
- ▶ パーズガス接続部につながるガスラインの圧力が、大気圧を100 mbarを超えて上回らないようにしてください。

「スタンバイ」状態に切り替えると、フォアラインポンプが自動的に20秒間パーズされます。

✓  **Operator**または**Supervisor**の権限

1  > セットアップ > 測定 > 真空 > パーズ

2 必要に応じて「自動パーズ」オプションを有効にしてください。

⇒ 自動パーズが無効の場合は、スタンバイウィンドウの  を押すことにより、パーズのオン/オフを切り替えることができます。

3  で保存します。

再生

デバイス内部への大量のヘリウムの流入により、正確な測定ができなくなる場合があります（ヘリウム汚染）。再生は、自動的に開始-停止-ベントのサイクルを実行することにより、高くなっているヘリウムバックグラウンドを減少させる機能です。

ディスプレイに再生が有効であることが表示されます。

再生は60分後に自動的に停止します。

- ✓  **Operator**または**Supervisor**の権限
- ✓ 「ベントモード」の設定で「ベントなし」を選択していない必要があります、上記を参考にしてください。
- ▶  >再生
 - ⇒ 表示されたウィンドウで再生を開始し、任意に停止できます。または、60分後の自動停止を待つこともできます。

6.3.13 リークレートフィルタの変更

リークレートフィルタ「I•CAL」は予め設定されています。I•CALにより、リークレート範囲に対して平均時間が最適に適合されます。

I•CALは「Intelligent Calculation Algorithm for Leakrates（リークレートのインテリジェントな計算アルゴリズム）」を意味する略語です。この機能は、その時々々のリークレート範囲に基づく最適な時間間隔で信号を平均化することを保証します。I•CALはまた、リークレートの信号とは無関係なノイズピークを除去することによって、リークレート信号が小さいときに反応時間が異常に短くなる現象を防止します。使用されるアルゴリズムは優れた感度と応答時間を提供します。

さらに、一定の時定数を持つリークレートフィルタ「固定」が利用できます。

実施

- ✓  **スーパーバイザー**権限
 - 1  > セットアップ > 測定 > ZEROおよびフィルタ
 - 2 「リークレートフィルタ」で「I•CAL」と「固定」のいずれかを選択します。
 - 3  で保存します。

6.3.14 バックグラウンド抑制の変更

内部のバックグラウンド抑制がプリセットされています。

リークディテクターの測定システムには、測定チャンバーが接続されていないときも常にヘリウムや水素が残留しています。この残留ガスは、START ボタンを押す前から存在する測定信号の内部成分を発生します。

「バックグラウンド抑制」を有効にすると、内部バックグラウンド、および選択によってはインレット領域のバックグラウンドが、表示されるリークレートから差し引かれます。演算は START ボタンを押すと自動的に実行されます。

✓  スーパーバイザー権限

1  > セットアップ > 測定 > ZEROおよびフィルター

2 フィールド「バックグラウンド抑制」で、「内部のみ」、「インレットエリア」、「停止」のいずれかを選択します。

⇒ 内部のみ

初期設定。毎回の測定で START ボタンを押すことでデバイスの内部測定信号成分が差し引かれます。これにより、内部バックグラウンドで測定結果の精度が損なわれることがなくなります。

STARTボタンを押す時点において：

新しい内部バックグラウンドを測定するためには、リークディテクターは少なくとも20秒間「スタンバイ」状態にあることが必要です。またこの時間内にパージバルブやガスバラストバルブを開いてはなりません。現在の内部バックグラウンドを次の測定運転に確実に適用するには、スタンバイ状態でのバックグラウンドの表示がグレーから通常に変わった後に START を押しします。スタンバイ状態でバックグラウンドを表示させるには、そのための機能を有効にする必要があります。「一般表示設定の変更 [▶ 71]」を参照してください。

⇒ インレットエリア

内部バックグラウンドの差し引きに加えて、毎回の測定で START を押すことでインレット領域のバックグラウンドも差し引かれます。

この機能を作動させるときは、インレット領域のバックグラウンドが既に測定されていることを確認してください。「インレット領域のバックグラウンドの測定 [▶ 93]」を参照してください。インレット領域のバックグラウンドは一定時間経過後にデバイスによって排気されるので、インレット領域のバックグラウンドの計算を時々繰り返すことを推奨します。

⇒ 停止

バックグラウンド抑制を行いません。

3  で保存します。

**バックグラウンドが大きいとき**

バックグラウンドの実測値が 1×10^{-8} mbar l/sを超えると、自動的な差し引きは実行できません。このような場合はバックグラウンドを排気する必要があります。

これについて参照する

📖 ZERO 機能の設定と適用 [▶ 87]

📖 ZERO ボタン [▶ 32]

6.3.14.1 インレット領域のバックグラウンドの測定

この機能は内部ヘリウムバックグラウンドの値を測定します。

バックグラウンド抑制の「ZEROとフィルター」ウィンドウで「インレット領域」を選択していると、START ボタンを押したときその値が測定信号から差し引かれます。

「バックグラウンド抑制の変更 [▶ 91]」も参照してください。

- ✓ インレットの閉止
- ✓ 操作モード「真空」
- ✓ デバイスが「スタンバイ」または「測定」状態にあること。

- 1 を押します。
- 2 「インレットバックグラウンド」の校正を選択します。
- 3 を押してインレットバックグラウンドの自動測定を開始します。

6.3.15 SL3000 のオーディオ/LEDの設定変更 (UL3000 Fab PLUS のみ)

タッチパネル上の表示以外の測定結果の通知方法を設定することができます。この設定はセットポイント 1 で有効です。

- ✓  **Operator** または **Supervisor** の権限
 - 1  > セットアップ > 測定 > スニファリング > SL3000 スニファークライン
 - 2 「スニファークライン LED アラーム設定」を選択します。
 - ⇒ 「点灯」「消灯」「点滅」のいずれかを選択します。
 - 3 「スニファークライン LED 照度」を選択します。
 - ⇒ 消灯/1~6 の選択肢があります。
 - 4 「スニファークライン ブザー」でスニファークのピープ音を設定します。
 - ⇒ 選択肢は「オフ」と「セットポイント 1 で警告音」です。
 - 5  で保存します。

6.3.16 スニファールラインの圧力モニターの変更

動作モード「スニファール」（SL200 または SL3000）では自動的に圧力監視が有効になります。事前設定されている圧力限界によって、インレット圧力の最小および最大値が定義されます。圧力がこれらの限界値内に収まらない場合、通常はキャピラリーの詰まりまたは破損が生じています。次のルールに従ってエラーメッセージが表示されます。

インレット圧力 > 上限：キャピラリーの破損。

インレット圧力 < 下限：キャピラリー内のガス流量が低すぎる（キャピラリーの詰まり）。

✓  スーパーバイザー権限

1  > セットアップ > 測定 > スニファリング > 校正モニター

⇒ 次の設定を変更できます。事前設定された値については工場出荷時設定

[▶ 42] を参照してください。

「圧力下限値SL200キャピラリーの詰り」（下限）

「圧力上限値SL200キャピラリーの破損」（上限）

「圧力下限値SL3000キャピラリーの詰り」（下限、UL3000 Fab PLUSのみ）

「圧力上限値SL3000キャピラリーの破損」（上限、UL3000 Fab PLUSのみ）

2 設定します。

3  で保存します。

6.3.17 校正

リークレートを正確に測定するためには、リークディテクターの校正を定期的に行い、正確な設定を行う必要があります。その際、質量分析計の自動調整が行われません。

校正はデバイス内部の校正リークまたは外部の校正リークを用いて行います。通常は1日1回、またはデバイスの測定性能に疑問が生じたときに校正を行います。



- ▶ トレーサガスとして水素またはヘリウム3 (^3He) を使用しているときは内部校正はできません。この場合は外部校正リークを使用します。
- ▶ 外部校正リークを用いる場合は、操作モード「真空」と「スニファリング」について別々に校正を行う必要があります。
- ▶ 校正を行うにはデバイスが測定可能な状態になっていることが必須です。このため電源投入後少なくとも20分が経過してから校正を行ってください。
- ▶ デバイスとテストオブジェクトとの距離が長いときは、テストオブジェクトの位置に外部校正リークを置くことを推奨します。
- ▶ 内部校正リークを用いるときは、装置係数の設定に留意してください。「装置係数の設定 [▶ 85]」をも参照してください。

6.3.17.1 内部校正

- ✓  **User** 権限
- ✓ デバイスが「スタンバイ」または「測定」状態にあること。
 - 1  を押します。
 - 2 「内部」の校正を選択します。
 - 3  を押します。
- ⇒ デバイスが内部校正を実行します。

6.3.17.2 外部校正

- ✓  **Operator** または **Supervisor** の権限
 - 1 デバイスインレットに校正リークを設置します。
 - 2  > セットアップ > 測定 > 校正リーク
 - 3 使用する校正リークのリークレートを設定します。「外部校正リークの設定 [▶ 86]」をも参照してください。
 - 4 デバイスを「スタンバイ」または「測定」状態にします。
 - 5  を押します。
 - 6 「外部」の校正を選択します。
 - 7  を押します。
 - 8 画面上の指示に従います。

6.3.17.3 大気中のヘリウムによる校正（スニファーマード）

地球の大気の下層の空気には、約 5.2 ppm（体積比）のヘリウムが含まれています。

このヘリウム濃度は、スニファーマードでリークディテクターを校正するのに使用できます。



ここで説明している校正方法は精度の高いものではありません！

▶ 最適な精度を得るには、常に内部校正リークまたは校正済みの外部校正リークを使用してください。

- 1 スニファーマーラインを接続し、リークディテクターを以下のように設定します：
 - 運転モード スニファーマー
 - 質量4（ヘリウム）
 - リークレート単位 ppm
 - 外部校正リーク：5.2 ppm
- 2 校正タイプ「ゼロ点測定なしの外部」を選択し、校正プロセスを開始します。
- 3 リークディテクターが外部校正リークにスニファーマーをかざすように要求したならば、通常の大気のみをスニファーマーしてください。ヘリウム分散器を使用するなどして、室内の空気に追加のヘリウムが含まれていないことを確実なものにしてください。
- 4 で測定値を確定します。

6.3.17.4 校正の確認

校正係数を変更することなく、校正を確認することができます。これにより再校正が必要かどうかを知ることができます。

✓  **User** 権限

✓ デバイスが「スタンバイ」または「測定」状態にあること。

- 1 を押します。
- 2 「Proof」を選択します。
 - ⇒ 確認が開始され、校正係数が再計算されます。
 - ⇒ 新たに計算された校正係数が表示されます。
 - ⇒ 新しい校正係数が保存されている校正係数と大きく異なる場合には、再校正の要求が表示されます。

6.3.17.5 内部校正リークの測定

✓  User 権限

✓ デバイスが「スタンバイ」または「測定」状態にあること。

- 1  を押します。
- 2 「内部校正リークの測定」を選択します。
- 3  を押します。

⇒ 校正リークが開き、リークレートの測定値が表示され、規定値と比較されます。



リークディテクターの校正に内部校正リークを使用したときは、内部校正リークの測定値と規定値が一致しても、測定システム全体としての精度は保証されません。「装置係数の設定 [▶ 85]」も参照してください。

6.4 測定

- ✓ 実施する測定に応じて、デバイス上部のインレットフランジを準備します。通常は、検査対象品またはスニファールライン SL200 を接続します。
- ✓ または、スニファールライン SL3000 をデバイス背面に接続します（オプション）。この場合、デバイス上部のインレットフランジにブランクフランジを取り付けます。
- ✓ その他、操作に必要なアクセサリをデバイスにセットアップします（オプション）：

I/O モジュール、バスモジュール、リモートコントロール、ノートパソコンまたはタブレットへの無線 LAN 接続「アクセサリとスペアパーツ [▶ 155]」および「ウェブブラウザを経由したリークディテクターの操作（無線 LAN） [▶ 171]」も参照してください。

- 1 電源スイッチからリークディテクターをオンします。
- 2 目的の動作モードが設定されていることを確認します（「動作モードの選択 [▶ 81]」を参照してください）。
- 3 基本設定および現在の測定に対する設定が正しいことを確認します。「基本設定 [▶ 63]」および「測定のための設定 [▶ 81]」を参照してください。
- 4 校正を実施する場合は、起動から少なくとも 20 分経過後に実施します。「校正 [▶ 94]」を参照してください。
- 5 スタンバイモードで START ボタンを押して測定を開始します。
 - ⇒ 現在の内部バックグラウンドを以降の測定へ確実に適用するには、「バックグラウンド抑制の変更 [▶ 91]」を確認してください。
- 6 測定結果は線グラフ、バーグラフ、円グラフのいずれかで確認できます。「測定画面の表示 [▶ 68]」および「タッチスクリーンの構成 [▶ 34]」を参照してください。
- 7 測定中に最大リークレート (Q_{max}) を表示するには、再度 START ボタンを押します。「START ボタン [▶ 31]」および「タッチスクリーンの構成 [▶ 34]」も参照してください。
- 8 より簡単に小さいリークを測定するには、必要に応じて ZERO ボタンを押します。「ZERO 機能の設定と適用 [▶ 87]」を参照してください。

9 必要に応じて測定値を記録します。「データ記録の有効化とエクスポートの設定 [▶ 100]」および「タッチスクリーンの構成 [▶ 34]」を参照してください。

10 デバイスをオフします。

これについて参照する

■ HYDRO•S の使用 (UL3000 Fab PLUS) [▶ 85]

■ 一般表示設定の変更 [▶ 71]

6.5 周囲のヘリウム濃度の測定 (UL3000 Fab PLUS のみ)

大気中に天然成分として含まれるヘリウムの濃度はおよそ 5.2 ppm です。

周囲の空気中におけるヘリウム濃度の増加 (ヘリウム汚染) を測定することにより、次の測定に向けた適切な時間を決定できます。

- ✓ 動作モード「真空」を有効にします。
- ✓ ガスとして「ヘリウム」⁴He を選択します。「ガスの選択 [▶ 81]」も参照してください。
- ✓ 「パージガス接続口」に長いホースを接続しないでください。ヘリウム濃度を測定する空気はパージガス接続口からデバイスに入ります。「アクセサリーおよび制御信号接続部 [▶ 39]」も参照してください。
- ✓ デバイスを「スタンバイ」状態にします。
 - 1  を押します。
 - 2 「I•CHECK」を選択します。
 - 3  を押します。
 - 4 測定結果を確認します。

6.6 測定データ

測定値は内部データベースに記録できます。データの記録は、測定中に自動的に行うか、測定画面の「測定値の記録」ボタンを押して行うこともできます。

「データ記録の有効化とエクスポートの設定 [▶ 100]」も参照してください。

表示された測定値をエクスポートすることもできます。

「測定サイクルの表示 [▶ 101]」も参照してください。

エクスポートはUSBフラッシュドライブまたはネットワーク接続を介して行います。

「ネットワーク経由の測定データのエクスポート [▶ 102]」も参照してください。

6.6.1 データ記録の有効化とエクスポートの設定

注記

メモリーの耐用年数の減少

大量の測定値を記録すると、内部メモリーの耐用年数は短くなります。

▶ 不要な場合は、データ記録を無効にしてください。

✓ OperatorまたはSupervisorの権限

1 > セットアップ > データ記録

2 測定開始の直後から記録を行うには、「有効」オプションを有効にします。

注意：データ記録は測定中、すなわち測定画面が表示されている間に行われます。「測定サイクルの表示 [▶ 101]」も参照してください。

⇒ 工場出荷時設定では、このオプションは無効となっています。このオプションを有効化せずに記録を開始または停止するには、測定画面の  を押します。

3 「エクスポート形式」から、「CSV en」、「CSV de」または「JSON」を選択します。

⇒ 工場出荷時設定は「CSV en」です。

「CSV en」の列の区切りはコンマです。

「CSV de」の列の区切りはセミコロンです。

「JSON」は言語に依存しないデータ形式です。

⇒ エクスポートファイルには、日時記録と拡張子による既定の名称がつきます（例：icmeas20160720-082829.csv）。

4 測定データに加えて他の情報（たとえばデバイスのシリアル番号）をエクスポートするには、「メタデータをエクスポート」オプションを有効にします。

⇒ 注意：測定データに加えて他の情報をエクスポートすると、データの後処理に時間がかかる場合があります。

5 ↓で保存します。

6.6.2 測定サイクルの表示


測定サイクルとは、STARTボタンを押してからSTOPボタンを押すまでの時間です。測定サイクルに関連する情報を確認し、2つのフリーテキストフィールドを任意に編集できます。

1  > 測定データ > 測定サイクル

⇒ 保存された測定サイクルがID、開始/停止時間と共に表示されます。

2 測定サイクルの詳細を確認するには、目的の項目を選択し、を押します。

⇒ この測定サイクルに属するすべての情報とチャートが表示されます。

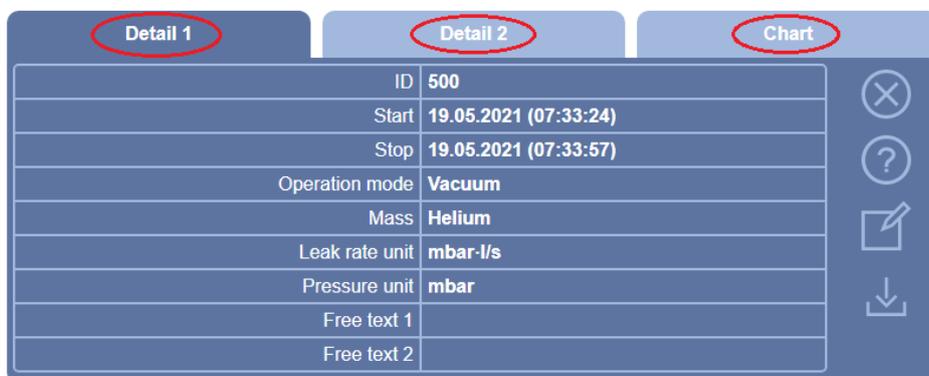


Detail 1		Detail 2		Chart	
ID	500				
Start	19.05.2021 (07:33:24)				
Stop	19.05.2021 (07:33:57)				
Operation mode	Vacuum				
Mass	Helium				
Leak rate unit	mbar-l/s				
Pressure unit	mbar				
Free text 1					
Free text 2					

3 フリーテキスト「フリーテキスト1」と「フリーテキスト2」のフィールド内のテキストを編集するには、を押します。

⇒ または、「測定サイクル」ウィンドウの「フリーテキスト1」および「フリーテキスト2」から編集できます。目的の項目を選択し、を押します。

4 チャートの詳細ビューの表示期間を変更するには、表示を左右にスワイプします。

時間軸を変更するには、を押すと時間軸が拡大され、を押すと縮小されます。値の軸は常に自動的に設定されます。

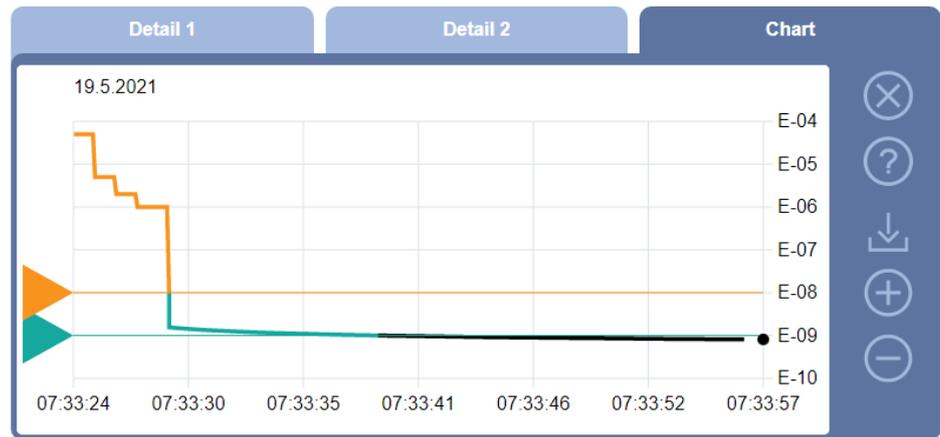

- 5 表示された測定サイクルをエクスポートするには、USBフラッシュドライブ（FAT32形式でフォーマット）をリークディテクターに接続し、↓を押します。

6.6.3 ネットワーク経由の測定データのエクスポート

グラフィカルユーザーインターフェースへのアクセスに加えて、リークディテクターから特定の測定データを呼び出すオプションがあります。

この目的のためにデータインターフェースが実装されました（RESTインターフェース）。

このインターフェースは、ポート3000へのリクエストに回答し、有効なパラメーターが要求された形式のデータと共に転送されます。

- ✓ リークディテクター側と、パソコンまたはタブレット側との間で、ネットワーク接続を確立します。

「ウェブブラウザを経由したリークディテクターの操作（LAN） [▶ 169]」または「ウェブブラウザを経由したリークディテクターの操作（無線LAN） [▶ 171]」も参照してください。

- ✓ 測定データを記録します。「データ記録の有効化とエクスポートの設定 [▶ 100]」も参照してください。

- ▶ 目的の測定データをエクスポートするには、次の2つのオプションがあります：

- ⇒ 便利なオプションでは、測定サイクルを表示させた後、↓を選択します。

「測定サイクルの表示 [▶ 101]」も参照してください。

パソコンまたはタブレットから↓を有効にすると、関連する測定データを含むファイルが示され、ダウンロードできます。

⇒ あるいは、目的のパラメーターを含むリクエストをURLとしてブラウザに入力します。このオプションでは、任意の期間（1ブロック最大24時間）だけでなく、ファイル形式とデータの範囲（メタデータ有無）も選択できます。LANを通じてアクセスするときは、 > デバイス > ネットワークで、表示されるIPアドレスを使用します。

WLANを通じてアクセスするときは、 > セットアップ > ネットワーク > WLANで、表示されるURLを使用します。

例 1 :

`http://192.168.11.124:3000/md?f=csv_en&c=4&d=mr`

ID 4とした測定サイクルの測定値とメタデータが「csv_en」形式で得られます。

例 2 :

`http://ul.inficon.com:3000/md?dts=2018-11-05T23:00:00.000Z&dte=2018-11-06T23:00:00.000Z&f=json&d=r`

2018-11-05T23:00:00.000Zから2018-11-06T23:00:00.000Zまでの測定値が「json」形式で得られます。

パラメータ	名称	説明	オプション	例
c	測定サイクル	1つ以上の測定サイクルをIDを経由して問い合わせ	測定サイクルのID。複数の場合はコンマによる区切り	c=3 c=3、5、8
dts	開始	エクスポートするデータの時間範囲の開始時間	UTC時間によるISO形式の日時	dts=2018-08-02T17:15:12.000Z
dte	終了	エクスポートするデータの時間範囲の終了時間	UTC時間によるISO形式の日時	dte=2018-08-02T17:45:35.000Z
f	形式	エクスポートのファイル形式	json、csv_en、csv_de 標準：csv_en	f=json f=csv_en

パラメータ	名称	説明	オプション	例
d	範囲	データの範囲。メタデータの有無	mr：メタデータと測定値 m：メタデータのみ r：測定値のみ 標準：mr	d=mr d=r

6.6.4 測定データ用データベース：情報

データベースの最大サイズは1ヶ月に取得できる測定値の数とほぼ一致します。これは、データベースのサイズである約1.5GBに相当します。

最大データベースサイズ（測定値単位）を超えて記録を保存する必要がある場合には、新規データを保存するために指定容量の5%が確保されるように、古い記録から自動的に削除されます。

✓  スーパーバイザー権限

▶  > 測定データ > データベース情報

⇒ 次が表示されます：

「データベースの現在のサイズ」 [Byte]

「測定値」：データベースに保存されている測定値の数

「データベースの最大サイズ」：データベースに保存可能な測定値の数

「レベル」

「最も古い記録」：最も古い測定値の日時記録

「最新の記録」：最も新しい測定値の日時記録

これについて参照する

 工場出荷時設定へのリセット [▶ 116]

6.7 情報

6.7.1 現在の測定値の最新情報の呼び出し

▶  > 測定値 > リークレートおよび圧力

⇒ リークレートおよび各種圧力値が表示されます。

▶  > 測定値 > 温度

⇒ 各種温度値が表示されます。

▶  > 測定値 > ランタイム

⇒ 現在のランタイム情報が表示されます。

6.7.2 現在の校正値の最新情報の呼び出し

▶  > 校正

6.7.3 接続されているアクセサリーに関する情報

▶  > アクセサリー > I/Oモジュール

⇒ I/Oモジュールが接続されている場合は、その詳細情報を確認できます。

▶  > アクセサリー > バスモジュール

⇒ バスモジュールが接続されている場合は、その詳細情報を確認できます。

6.7.4 デバイスに関する情報の取得

デバイスに関する各種情報が表示されます：ソフトウェアおよびシリアル番号、ネットワーク情報および運転時間

▶  > デバイス > 識別

▶  > デバイス > ネットワーク

▶  > デバイス > 運転時間

▶  > デバイス > MSB

6.7.5 アセンブリに関する情報の呼び出し

以下のアセンブリに関する多様な測定値と情報が表示されます。プリアンプ、イオンソース、ターボ分子ポンプ（TMP）、プロセッサアセンブリMSB、フォアラインポンプおよびそのインバータ。

- ▶  > アセンブリー > プリアンプ
- ▶  > アセンブリー > イオンソース
- ▶  > アセンブリー > TMP
- ▶  > アセンブリー > フォアラインポンプ

6.7.6 エネルギーデータ情報の呼び出し

測定された、さまざまな供給電圧と電力が表示されます。

- ▶  > エネルギー > 電圧 (1)
 - ⇒ このウィンドウでは、電圧に関する情報の前半部分が表示されます。
- ▶  > エネルギー > 電圧 (2)
 - ⇒ このウィンドウでは、電圧に関する情報の後半部分が表示されます。
- ▶  > エネルギー > 皮相電力

6.7.7 HYDRO•S に関する情報の呼び出し（UL3000 Fab PLUSのみ）

HYDRO•S の内部パラメーターが表示されます。

- ▶  > HYDRO•S

6.7.8 SL3000 スニファーラインに関する情報の呼び出し (UL3000 Fab PLUS のみ)

- ▶  > スニファーライン

6.8 ログ

6.8.1 エラーおよび警告ログの呼び出し

- ▶  > ログ > エラーおよび警告

20件を超えるログが存在する場合は、最も古い項目が削除されます。

6.8.2 校正ログの呼び出し

デバイスを使用している全期間を対象とした項目です。約20件を超えるログが存在する場合は、最も古い項目が削除されます。

- ▶  > ログ > 校正

6.8.3 メンテナンスログの呼び出し

- ▶  > ログ > メンテナンス

20件を超えるログが存在する場合は、最も古い項目が削除されます。

6.8.4 結果ログの呼び出し

「オートリークテスト」および「真空」 (Q_{max}) 運転モードでの検査結果を表示します。

50以上のエントリがある場合、常に最も古いエントリが削除されます。

- ▶  > ログ > 結果ログ

6.9 デバイスの設定

6.9.1 個別パラメーターの表示とカスタマイズ

デバイスの実際の設定の概要を簡単に確認し、必要に応じて変更できます。

✓ 特定のパラメーターを変更するために必要な権限を持っていること。

1  > パラメーターセット > パラメーターリスト

⇒ デバイス設定がリスト表示されます。

2 個別のパラメーターを必要に応じて変更します。

3  で保存します。

▶ パラメーターを変更するには、リスト内の小見出しを押します。設定ウィンドウが別画面で開きますので、そこで変更して保存します。

⇒ 別画面でパラメーター設定を変更したら、 を押してパラメーターリストに戻ります。

6.9.2 パラメーターセットの保存と管理

パラメーターセットとは、デバイスに関連する設定とパラメーターとの組み合わせです。テキスト形式のパラメーターセットをいつでも保存できます。パラメーターはわかりやすく配置された形式で表示されます。

✓  スーパーバイザー権限

1  > パラメーターセット > パラメーターセットを管理

⇒ 作成されたパラメーターセットがリストとして表示されます。

パラメーターセットに保存されている値が現在のデバイスの設定と100%一致している場合は、緑の点が表示されます。

2 新しいパラメーターセットを作成するには、 を押します。

⇒ 次のウィンドウで任意の説明を入力できます。接頭辞「parameter set」から始まり、保存した日付を合わせたファイル名で保存されます。 で保存します。最大10個のパラメーターセットを保存できます。


- 3 作成されたパラメーターセットのコンテキストメニューを開くには、目的のパラメーターセットを押し、選択します。

🔍、パラメーターセットに含まれている詳細情報を表示します。パラメーターセットが現在のデバイスの設定と一致していない場合は、橙の点が表示されます。

不足している設定がある場合は、赤の点が表示されます（例：ソフトウェアアップデート後）。不足している設定を表示するために、新しいパラメーターセットを作成してから古いパラメーターセットを削除することを推奨します。

⬆️：パラメーターセットを有効にします。

🗑️：パラメーターセットを削除します。

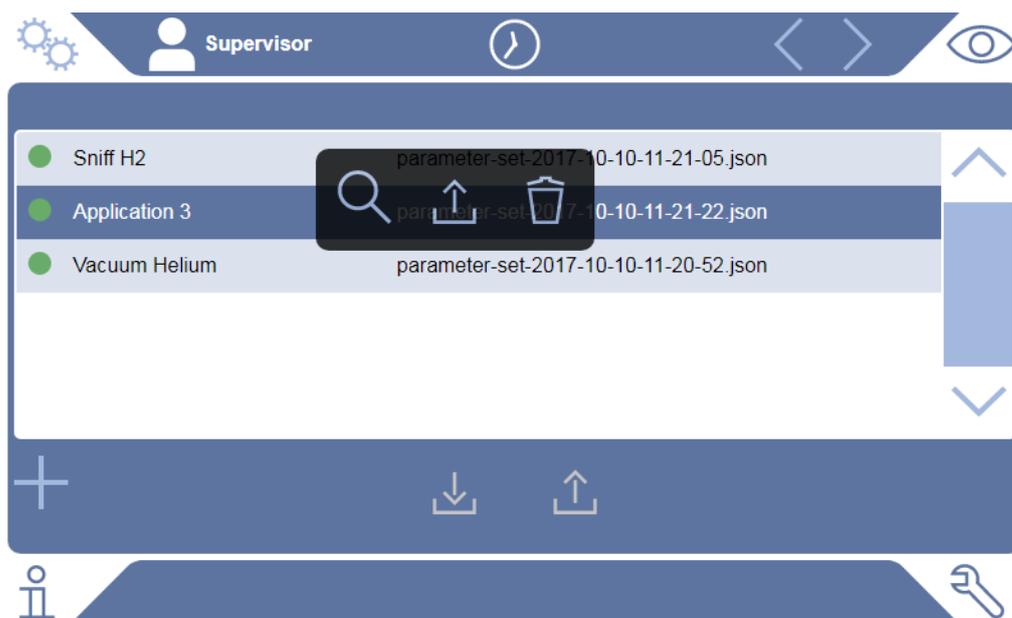

6.9.3 パラメーターセットのエクスポートまたはインポート

内部メモリーに保存されているパラメーターセットは、デバイスに取り付けた USB フラッシュドライブへエクスポート、および再度インポートできます。

✓ 👤 スーパーバイザー権限

- 1 ⚙️ > パラメーターセット > パラメーターセットを管理
- 2 すべてのパラメーターセットを USB フラッシュドライブ（FAT32 フォーマット）にエクスポートするには、リスト下部の ⬇️ を押します。

- 3 すべてのパラメーターセットをUSBフラッシュドライブからデバイスへインポートするには、リストの下部の  を押します。
- ⇒ USBフラッシュドライブ内のパラメーターセットファイルが10件を超えない場合は、すべてがデバイスに保存されます。USBフラッシュドライブから転送する前に、パソコン上でパラメーターセットを削除できます。
 - ⇒ インポートの前にUSBフラッシュドライブ上のパラメーターセットのパラメーターを変更しないでください。変更するとデバイスへのファイルの転送ができなくなります。

6.10 ソフトウェアのアップデート

デバイスには、2種類のソフトウェアバージョンが搭載されています：一方はユーザーインターフェース（動作ユニット）用、もう一方ははデバイス本体（本体ユニット）用です。それぞれ独自のバージョン番号が付与されています。

6.10.1 動作ユニットソフトウェアのアップデート

ソフトウェアのアップデートにはUSBフラッシュドライブを使用します。

注記

接続の中止によるデータ損失

- ▶ ソフトウェアのアップデート中は、デバイスをオフしたり、USBフラッシュドライブを取り外したりしないでください。

✓ スーパーバイザー権限

- 1 FAT32フォーマットのUSBメモリースティックのメインディレクトリにファイルをコピーします。
 - 2 USBフラッシュドライブをデバイスのUSBポートに接続します。
 - 3  > アップデート > アップデート、デバイスの操作
 - ⇒ ウィンドウ上部には、ユーザーインターフェース（動作ユニット）の現在のソフトウェアバージョンが表示されます。
- USBフラッシュドライブに1つまたは複数のソフトウェアバージョンが存在

する場合、最新バージョンが次の行に表示されます。このバージョンがインストール済みのバージョンであれば背景が緑、それ以外の場合は赤になります。

- 4 新しいソフトウェアバージョンを読み込むには、「アップデート」ボタンを押します。

⇒ 完了すると、動作ユニットは自動的に再起動します。

6.10.2 本体ユニットソフトウェアのアップデート

ソフトウェアのアップデートにはUSBフラッシュドライブを使用します。

注記

接続の中止によるデータ損失

- ▶ ソフトウェアのアップデート中は、デバイスをオフしたり、USBフラッシュドライブを取り外したりしないでください。

✓ スーパーバイザー権限

- 1 FAT32フォーマットのUSBメモリースティックのメインディレクトリにファイルをコピーします。
- 2 USBフラッシュドライブをデバイスのUSBポートに接続します。
- 3  > アップデート > アップデート、本体

⇒ ウィンドウ上部には、本体ユニットソフトウェアの現在のバージョンが表示されます。

USBフラッシュドライブに1つまたは複数のソフトウェアバージョンが存在する場合、最新バージョンが次の行に表示されます。このバージョンがインストール済みのバージョンであれば背景が緑、それ以外の場合は赤になります。

- 4 新しいソフトウェアバージョンを読み込むには、「アップデート」ボタンを押します。

⇒ 完了すると、システムは自動的に再起動します。

6.10.3 エキスパートモードにおけるソフトウェアのアップデート

✓  スーパーバイザー権限

- 1  > アップデート > アップデート デバイスの操作 / 本体ユニット > エキスパートアップデート、デバイスの操作
⇒ デバイスで現在使用できるソフトウェアバージョンがリスト表示されます。
- 2 必要なソフトウェアバージョンをハイライト表示し、手順5に進みます。
⇒ 古いソフトウェアバージョンへのリセットもできます。
- 3 新しいソフトウェアバージョンを追加する場合は、アップデートファイルを含むUSBフラッシュドライブをデバイスのUSBポートに接続します。
- 4 新しいソフトウェアバージョンを読み込むには  を押します。
- 5 新しいバージョンを有効にするには、リストから目的の項目を選択し、 を押します。
⇒ 完了すると、システムは自動的に再起動します。

6.10.4 追加機能を有効にする

お使いのリークディテクターがそれに対応している場合には、1つまたは複数の追加機能を購入し、アクティベーションコードを使用してそれらをアクティベートできます。

✓ リークディテクターのシリアル番号を指定する追加機能をメーカーに注文した。

✓ メーカーからロック解除コードを受け取った。

✓  スーパーバイザー権限

- 1  > アップデート > 機能をアンロック
- 2 「ロック解除コード」フィールドにロック解除コードを入力します。
- 3  で保存します。
⇒ ロック解除に成功すると、新しい機能が表示されます。



工場出荷時の設定をリセットしても、機能のロック解除は失われません。

6.11 外部モニターの使用

内部タッチスクリーンの代わりに、外部モニターを接続して使用することができます。内部タッチスクリーンまたは外部モニターの、どちらか使用することができます。

✓ コントロールユニットにHDMIインターフェースが用意されています。詳細については「コントロールユニット [▶ 29]」を参照してください。

✓ タッチスクリーンには、HDMIおよびUSBの接続ポート、および適切な電源の接続部が用意されています。HDMIは画像の伝送に必要で、USBは音声の伝送に必要です。

1 タッチスクリーンのHDMIケーブルとUSBケーブルをリークディテクタの接続部に接続します。「アクセサリおよび制御信号接続部 [▶ 39]」も参照してください。適切な動作を保証するために、ケーブル長が3 mを超えないようにしてください。

2  > 表示 > モニターを切り替える

3 「外部モニター」ボタンを押します。

⇒ 画像が外部モニターに表示されるようになります。

別の手順

▶ モニター表示を切り替えるのではなく、本機に電源を投入する前に、外部モニターを接続しておくこともできます。

⇒ このようにすれば、設定を変更しなくても、画像が外部モニターに表示されるようになります。

6.11.1 内部タッチスクリーンに戻す方法

注記

外部モニターの切り離し

▶ 本デバイスに電源が投入されている場合は、外部モニターの接続を切り離す前に、メニューで内部タッチスクリーンに切り替えます。

本デバイスに電源が投入されているときは、いつでも内部タッチスクリーンに切り替えることができます。

- 1  > 表示 > モニターを切り替える
- 2 「内部モニター」 ボタンを押します。

6.12 真空系統図の表示

測定システムの機能と運転状態を確認するには、簡略化した真空系統図を呼び出します。

- ▶  > 真空系統図

UL3000 Fab

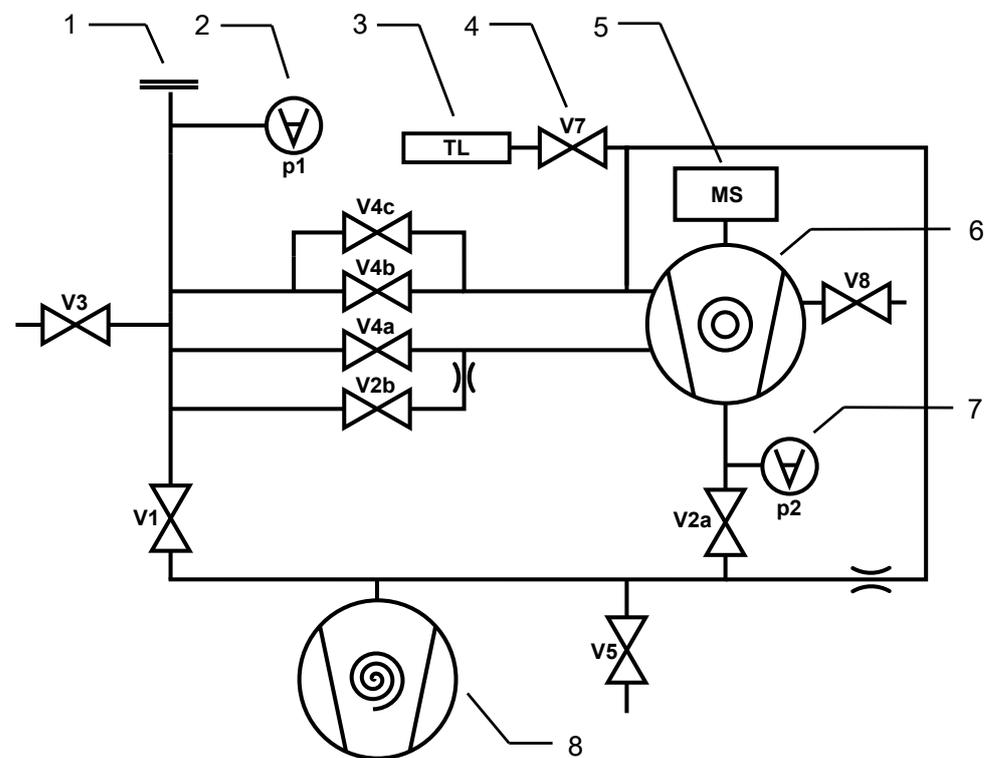


図 14: UL3000 Fabデバイスの真空ダイヤグラムで最も重要なコンポーネント

1	インレットポート	5	質量分析計
2	p1~p2：圧力測定点	6	ターボ分子ポンプ
3	内部校正器	7	フォア真空圧力ゲージ
4	V1~V8：ガス流量制御用ソレノイドバルブ	8	フォアポンプ

UL3000 Fab (PLUS)

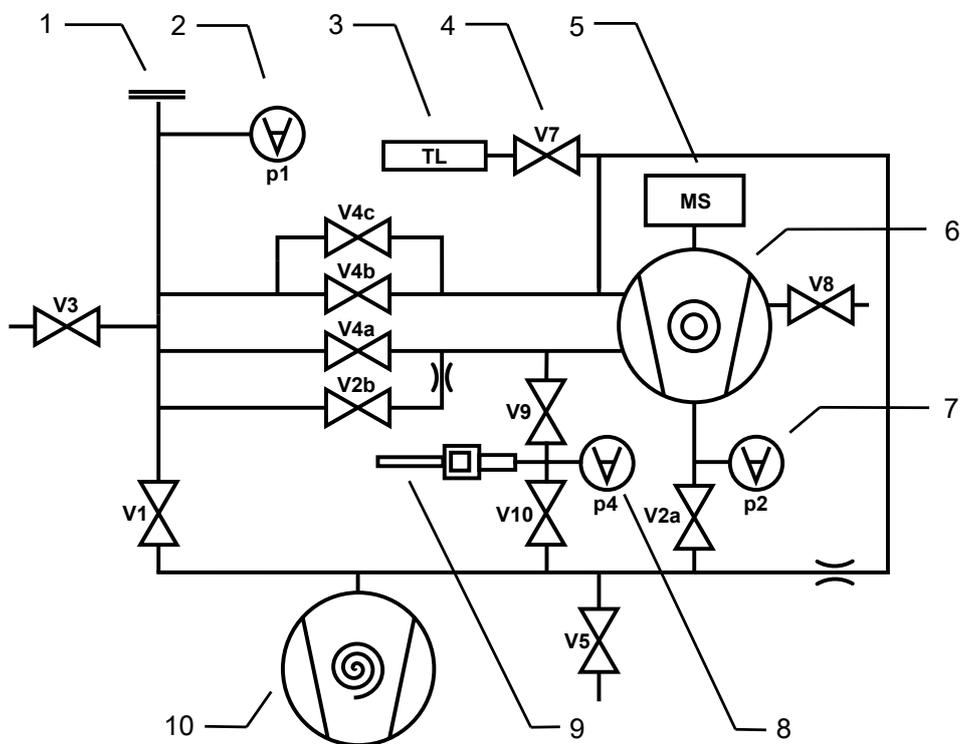


図 15: UL3000 Fab PLUS デバイスの真空ダイアグラムで最も重要なコンポーネント

1	インレットポート	6	ターボ分子ポンプ
2	p1~p4：圧力測定点	7	フォア真空圧力ゲージ
3	内部校正器	8	流量監視用の圧力測定点
4	V1~V10：ガス流量制御用ソレノイドバルブ	9	スニファークライン
5	質量分析計	10	フォアポンプ

6.13 工場出荷時設定へのリセット

デバイスを工場出荷時設定にリセットできます。



設定内容および測定データの損失

工場出荷時設定にリセットすると、デバイスのメモリーにはメーカー出荷時の設定のみが残ります。デバイスのソフトウェアは、工場出荷時設定へはリセットされません。

✓ スーパーバイザー権限

1  > セットアップ > 一般 > リセットする

2 次のいずれかを選択します。

⇒ すべての設定をリセットする場合は、「設定のリセット」ボタンを押します。

⇒ 記録されている測定データとユーザーアカウントをすべて削除する場合は、「データの削除」ボタンを押します。

⇒ デバイスを出荷時の設定にリセットするには、両方のボタンを順番に押します。

6.14 デバイスからのログオフ

1 ディスプレイ左上に表示されているユーザー名を押す、または  > ユーザーアカウント を選択します。

⇒ 「ユーザーアカウント」ウィンドウが開きます。「個人設定の変更 [▶ 66]」も参照してください。

2 「ログオフ」ボタンを押すことでデバイスからログオフされます。

⇒ ログインウィンドウが開きます。

6.15 装置の停止

装置は電源スイッチにより、いつでもオフにできます。装置で設定したパラメータは、保存されたまま維持されます。

7 警告およびエラーメッセージ

運転中に、デバイスの運転に役立つさまざまな情報が表示されます。現在のモード、運転方法、警告、およびエラーメッセージとともに、測定値が表示されます。また、広範な自己診断機能が用意されています。電子システムによって異常が検出されると、ただちにディスプレイに表示され、必要に応じて測定が中止されます。警告およびエラーメッセージには、番号、説明文、関連する測定値（測定電圧など）が記載されます。

警告 測定の精度を低下させる状態になっているときは、警告によって通知されます。本デバイスによる運転は中止されません。

原因および対応を確認するには、②を押します。

警告メッセージを閉じるには、読んだ後に「クリア」ボタンを押します。

エラーメッセージ エラーは、運転を強制的に中止させるイベントです。

原因および対応を確認するには、②を押します。

エラーの原因を解消し、「クリア」ボタンを押して運転を続行します。

有効なエラーと警告 このメニュー項目は、エラーまたは警告が有効な場合のみ表示されます。

▶  > エラーおよび警告

確認された警告 原因が解消していない状態で有効な警告が確認されると、「確認された警告」に表示されます。

▶  > 確認済みの警告

ディスプレイ上の参照 考えられるエラーと警告の一覧は、以下から確認できます。

情報

▶  > ヘルプ > エラーおよび警告

特殊な事例

運転電圧が許容範囲以下に低下した場合は、「技術データ [▶ 40]」を参照してください。リークディテクタの内部24 V電源は停止する可能性があります。フォアラインポンプは運転を続行します。このようなことが発生することはほとんどありません。

- 1 電源を投入してもディスプレイに何も表示されず、すべてのLEDが消灯している場合は、デバイスを電源から切り離します。
- 2 必要な資格を有している電気技師に、電源の電圧のチェックを依頼してください。
- 3 問題が解決しない場合は、カスタマーサービスに連絡してください。

7.1 警告メッセージとエラーメッセージ一覧

タイプ	メッセージ	考えられるエラーの原因	トラブルシューティング
W102	VIボードのEEPROMとの通信がタイムアウトしました	VIボードのEEPROMが故障しているか欠落しています	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
W104	EEPROMパラメータが一つ初期化されました	ソフトウェア更新によって新規パラメータが導入されています	<ul style="list-style-type: none"> 警告メッセージを確認してください 次に電源を入れたときにメッセージが出なくなることを確認してください 新規パラメータの出荷時設定が用途に対応していることを確認してください
		VIボードのEEPROMが故障しています	<ul style="list-style-type: none"> 警告メッセージを確認してください 毎回電源を入れたときにメッセージが出ることを確認してください カスタマサービスにご連絡ください
W106	複数のEEPROMパラメータが初期化されました	ソフトウェア更新によって新規パラメータが導入されました	<ul style="list-style-type: none"> 警告メッセージを確認してください 次に電源を入れたときにメッセージが出なくなることを確認してください 新規パラメータの出荷時設定が用途に対応していることを確認してください
		VIボードのEEPROMが交換されました	<ul style="list-style-type: none"> 警告メッセージを確認してください 次に電源を入れたときにメッセージが出なくなることを確認してください 新規パラメータの出荷時設定が用途に対応していることを確認してください
		VIボードのEEPROMが故障しています	<ul style="list-style-type: none"> 警告メッセージを確認してください 毎回電源を入れたときにメッセージが出ることを確認してください カスタマサービスにご連絡ください
E107	内部IICの通信エラー	内部IICの通信エラー	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください

タイプ	メッセージ	考えられるエラーの原因	トラブルシューティング
E108	内部IIC2の通信エラー	内部IIC2の通信エラー	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
W109	リアルタイムクロックのエラー	リアルタイムクロックが故障している可能性があります	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
W110	リアルタイムクロックがリセットされました! 日付時刻を入力してください	リアルタイムクロックが未設定です	<ul style="list-style-type: none"> 正しい日付と正しい時刻を入力してください 次に電源を入れたときにメッセージが出なくなることを確認してください
		MSBの充電電池ジャンパーが差し込まれていません	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
		MSBの充電電池は放電したか故障しています	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
		リアルタイムクロックが故障しています	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
W111	最後の6分以内にEEPROMの書き込みサイクルが多い。	インターフェースを介してきわめて多くの書き込み命令が実行されました。これにより、EEPROMの寿命が恒久的に短くなります。	<ul style="list-style-type: none"> 制御プログラムから余剰な書き込みアクセスを削除してください
E112	許可されないDIPスイッチの設定	MSBのDIPスイッチに無効な設定があります	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
		MSBの故障	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください

タイプ	メッセージ	考えられるエラーの原因	トラブルシューティング
W113	デバイスIDが検知されたフォアラインポンプに適合しません	MSBのDIPスイッチに無効な設定があります	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
		フォアラインポンプのタイプが検知されないか、間違っ検知されました	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
		MSBの故障	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
W122	バスモジュールが応答していません	バスモジュールへの接続中断	<ul style="list-style-type: none"> バスモジュールとの接続を確認してください バスモジュールとの接続ケーブルを交換してください
		バスモジュールが故障しています	<ul style="list-style-type: none"> バスモジュールを交換してください
		デバイスのバスモジュール接続部が故障しています	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
W125	I/Oモジュールが接続されていません	I/Oモジュールへの接続中断	<ul style="list-style-type: none"> I/Oモジュールの接続を確認してください I/Oモジュールの接続ケーブルを交換してください
		I/Oモジュールが故障しています	<ul style="list-style-type: none"> I/Oモジュールを交換する
		デバイスのI/Oモジュール接続部が故障しています	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
W127	ブートローダーバージョンが不正です	ブートローダーがアプリケーションと非互換です	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください

タイプ	メッセージ	考えられるエラーの原因	トラブルシューティング
E129	EEPROMに不正なデバイスクラスのデータが含まれています	基本デバイスのソフトウェアがEEPROMに合いません	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
		EEPROMがこのデバイスクラスに合っていない	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
W130	スニファールラインが未接続です	スニファールラインにデバイスが応答していません	<ul style="list-style-type: none"> スニファールラインとデバイスの接続を確認してください(切り離して再度つなぐ) カスタマサービスにご連絡ください
		スニファールラインが故障しています	<ul style="list-style-type: none"> できれば別のスニファールラインをご使用ください カスタマサービスにご連絡ください
W132	タイプ(XL)のスニファールラインは使用できません	(XL) タイプのスニファールラインはこのデバイスでは使用できません	<ul style="list-style-type: none"> スニファールラインをデバイスが対応する種類のものに交換してください
W151	デバイスハンドラーとの通信がありません	ソフトウェア更新かパラメータリセットが実行されました	<ul style="list-style-type: none"> 警告メッセージを確認してください 次に電源を入れたときにメッセージが出なくなることを確認してください
		基本デバイスとデバイスハンドラー間の内部接続不良	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
W152	操作パネルとの通信がありません	基本デバイスと操作パネル間の内部接続不良	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
W153	デバイスの操作ソフトウェアが古くなっています	最新のデバイス操作ソフトウェアがありません。操作時の障害をなくすために、デバイスの操作ソフトウェアを更新することをお勧めします。	<ul style="list-style-type: none"> 最新のデバイス操作ソフトウェアについては、カスタマサービスまでご連絡ください

タイプ	メッセージ	考えられるエラーの原因	トラブルシューティング
E167	ランナップがブロックされ、「インターロック」機能がアクティブ	ドングルがACCESSORIESポートに接続されていない	• ドングルをACCESSORIESポートに接続する
		ACCESSORIESポートに接続されているドングルが故障している	• 可能なら他のモジュールを使用する
		「インターロック」機能が意図せずにアクティブにされた	• 「インターロック」機能を無効にする
W171	CU1000未対応	CU1000をこのデバイスで使用することはできません	• CU1000をこのデバイスから切り離してください
W201	電圧U24V_MSBが低すぎます	24V電源が故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください
		24V電源のショートか過負荷	• カスタマサービスにご連絡ください
W202	電圧U24V_MSBが高すぎます	24V電源が故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください
W203	24Vバルブ電圧が範囲外です	バルブが1つ故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください
		24Vバルブ電源のショートか過負荷	• カスタマサービスにご連絡ください
W206	デバイス操作部の24V電源電圧が範囲外です	デバイスハンドラーの機能障害	• カスタマサービスにご連絡ください
		デバイス操作部の24V電源でショートか過負荷が発生しています	• カスタマサービスにご連絡ください
W207	内部12V電源電圧が範囲外です	12V電源のショートか過負荷	• カスタマサービスにご連絡ください

タイプ	メッセージ	考えられるエラーの原因	トラブルシューティング
W208	24Vファン電源電圧が範囲外です	ファンが1つ故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください
		24Vファン電源のショートか過負荷	• カスタマサービスにご連絡ください
W209	24V DIV1の電源電圧が範囲外です	24V DIV1電源のショートか過負荷	• カスタマサービスにご連絡ください
W210	24V DIV2の電源電圧が範囲外です	24V DIV2電源のショートか過負荷	• カスタマサービスにご連絡ください
W211	5V内部電源電圧が範囲外です	内部5V電源のショートか過負荷	• カスタマサービスにご連絡ください
W212	スニファーマイン用5V電源電圧が範囲外です	スニファーマインが故障しています	• できれば別のスニファーマインをご使用ください • カスタマサービスにご連絡ください
		スニファーマイン5V電源のショートか過負荷	• カスタマサービスにご連絡ください
W221	内部電圧24V_RC電圧範囲外	リモートコントロールが故障しています	• できれば別のリモートコントロールをご使用ください
		REMOTE CONTROLポートに接続してあるケーブルが故障しています	• できれば別のケーブルをご使用ください
		ACCESSORIESポートに接続してあるアクセサリが故障しています	• できれば別のアクセサリをご使用ください
		ACCESSORIESポートに接続してあるケーブルが故障しています	• できれば別のケーブルをご使用ください
		24V_RC電源のショートか過負荷	• カスタマサービスにご連絡ください

タイプ	メッセージ	考えられるエラーの原因	トラブルシューティング
W222	内部電圧24V_IO電圧範囲外	LDポートに接続してあるモジュールが故障しています	• できれば別のモジュールをご使用ください
		LDポートに接続してあるケーブルが故障しています	• できれば別のケーブルをご使用ください
		24V_IO電源のショートか過負荷	• カスタマサービスにご連絡ください
W223	内部電圧24V_TMP1電圧範囲外	24V_TMP1電源のショートか過負荷	• カスタマサービスにご連絡ください
W224	内部電圧24V_PRESSURE (ピラニ) 電圧範囲外	24V_PRESSURE (Pirani)電源のショートか過負荷	• カスタマサービスにご連絡ください
W240	電圧+15Vが範囲外です	プリアンプのショート	• カスタマサービスにご連絡ください
		VIボードかMSBが故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください
W241	電圧-15Vが範囲外です	プリアンプのショート	• カスタマサービスにご連絡ください
		VIボードかMSBが故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください
E242	+15Vまたは-15V電圧の短絡	プリアンプのショート	• カスタマサービスにご連絡ください
		VIボードかMSBが故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください
W250	電圧REF5Vが範囲外です	プリアンプのショート	• カスタマサービスにご連絡ください
		VIボードかMSBが故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください
E252	REF 5V電圧の短絡	プリアンプのショート	• カスタマサービスにご連絡ください
		VIボードかMSBが故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください

タイプ	メッセージ	考えられるエラーの原因	トラブルシューティング
W254	バルブ流量が範囲外です	1つ以上の降下したバルブが接続されていないか、故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください
		VIボードかMSBが故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください
W255	ファン流量が範囲外です	ファンが接続されていません	• カスタマサービスにご連絡ください
		ファンがブロックされているか故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください
W300	アノード電圧が低すぎる	陽極電圧のショート	• カスタマサービスにご連絡ください
		VIボードかMSBが故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください
W301	アノード電圧が高すぎる	MSBの故障	• カスタマサービスにご連絡ください
W302	サプレッサー電圧が低すぎる	サプレッサカプリアンプのショート	• カスタマサービスにご連絡ください
		VIボードかMSBが故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください
W303	サプレッサ電圧が高すぎます	MSBの故障	• カスタマサービスにご連絡ください
W304	アノード-カソード電圧が低すぎる	陽極陰極間のショート	• カスタマサービスにご連絡ください
		VIボードかMSBが故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください
W305	アノード-カソード電圧が高すぎる	MSBの故障	• カスタマサービスにご連絡ください
E306	陽極電圧が不正です	陽極電圧規定値が許容範囲外です	• 較正してください • カスタマサービスにご連絡ください
		MSBの故障	• カスタマサービスにご連絡ください

タイプ	メッセージ	考えられるエラーの原因	トラブルシューティング
W310	陰極1が破損しています	陰極の故障	<ul style="list-style-type: none"> 別の陰極がオンになっているかどうかを確認してください カスタマサービスにご連絡ください
		陰極との接続が中断されました	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
		VIボードかMSBが故障しています	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
W311	陰極2が破損しています	陰極の故障	<ul style="list-style-type: none"> 別の陰極がオンになっているかどうかを確認してください カスタマサービスにご連絡ください
		陰極との接続が中断されました	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
		VIボードかMSBが故障しています	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
E312	陰極が破損しています	両方の陰極が故障しています	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
		陰極との接続が中断されました	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
		VIボードかMSBが故障しています	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
E340	エミッションエラー	陰極の劣化により圧力が高すぎます	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
W342	カソードが未接続	セルフテスト中に両方の陰極が故障しました	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
		イオンソースコネクタが未接続です	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
W350	サブレッサ未接続	サブレッサケーブルが未接続か故障しています	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください

タイプ	メッセージ	考えられるエラーの原因	トラブルシューティング
E352	プリアンプ未接続	プリアンプが故障しているかケーブルが未接続です	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
W358	プリアンプ範囲を変えてください	プリアンプの故障	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
		異常なリーク率を示す信号波形	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
W359	プリアンプ過度動作	質量分析計の汚染	<ul style="list-style-type: none"> リーク検知器と試験品の接続のリークを確認してください デバイスが置かれている環境の汚染度を低減する 「バキューム」運転モードで「再生」機能を使用する
		イオンソースかプリアンプが故障しています	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
W360	プリアンプ出力信号が低すぎます	イオンソース不良	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
		質量分光分析計が汚染しています	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
W361	プリアンプのオフセット電圧が高すぎます	プリアンプの故障	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
W362	プリアンプ範囲エラー	プリアンプの故障	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
		MSBの故障	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
W374	スタンバイのバックグラウンドが範囲外	質量分析計の汚染	<ul style="list-style-type: none"> リーク検知器と試験品の接続のリークを確認してください デバイスが置かれている環境の汚染度を低減する 「バキューム」運転モードで「再生」機能を使用する
		イオンソースかプリアンプが故障しています	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください

タイプ	メッセージ	考えられるエラーの原因	トラブルシューティング
W390	500 GΩのアンプ抵抗が範囲外です	プリアンプの故障	• カスタマサービスにご連絡ください
		MSBの故障	• カスタマサービスにご連絡ください
E400	TMPエラーメッセージ	未処理のTMPエラーメッセージ	• カスタマサービスにご連絡ください
W401	TMP警告メッセージ	未処理のTMP警告メッセージ	• カスタマサービスにご連絡ください
E402	ターボポンプコンバータとの通信がありません	TMP-ケーブルが故障しているか未接続です	• カスタマサービスにご連絡ください
		TMPコンバーターが故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください
		MSBの故障	• カスタマサービスにご連絡ください
E404	TMP消費電流が高すぎる	TMPの内部圧が高すぎます	• カスタマサービスにご連絡ください
W405	TMPが起動しない	立上り中のインレット圧が高すぎます	<ul style="list-style-type: none"> • プリバキュームポンプが起動中に機能していることを確認してください • 圧力が起動時に下がることを確認してください • カスタマサービスにご連絡ください
		TMPベアリングの損傷	• カスタマサービスにご連絡ください
W406	無効なTMPサブタイプ	TMPのサブタイプが検知されないか、間違っ て検知されました	• カスタマサービスにご連絡ください

タイプ	メッセージ	考えられるエラーの原因	トラブルシューティング
E410	TMP温度が高すぎる	周囲温度が高すぎます	<ul style="list-style-type: none"> • デバイスの電源を切り、冷ましてください • デバイス周囲の温度を下げてください
		エアフィルターが汚れています	<ul style="list-style-type: none"> • 換気スリットをクリーニングするかフィルタープレートを交換してください
		ファンがブロックされているか故障していません	<ul style="list-style-type: none"> • カスタマサービスにご連絡ください
W411	TMP高温	周囲温度が高すぎます	<ul style="list-style-type: none"> • デバイス周囲の温度を下げてください
		エアフィルターが汚れています	<ul style="list-style-type: none"> • 換気スリットをクリーニングするかフィルタープレートを交換してください
		ファンがブロックされているか故障していません	<ul style="list-style-type: none"> • カスタマサービスにご連絡ください
W421	TMP電圧が低すぎる	TMPへの供給電流が不足しています	<ul style="list-style-type: none"> • カスタマサービスにご連絡ください
E422	TMPが起動しない	立上り中のインレット圧が高すぎます	<ul style="list-style-type: none"> • プリバキュームポンプが起動中に機能していることを確認してください • 圧力が起動時に下がることを確認してください • カスタマサービスにご連絡ください
		TMPベアリングの損傷	<ul style="list-style-type: none"> • カスタマサービスにご連絡ください
E423	TMP圧力上昇	TMP内でのエア中断	<ul style="list-style-type: none"> • カスタマサービスにご連絡ください

タイプ	メッセージ	考えられるエラーの原因	トラブルシューティング
W449	TMP2のソフトスタートが必要	TMP2が長時間アクティブにされていないか、長時間実行されていない	<ul style="list-style-type: none"> ソフトスタートが完了するまで待機。これには、TMP2を数分間継続して実行する必要がある。この間、TMP2の速度はゆっくりとしか上昇しないため、ヘリウム吸引能力を下げても測定を続けることができる。ソフトスタートは、このメッセージの後でTMP2のステータスが初めて「通常」に変わったときに完了する（TMP2情報ページを参照）。
E450	TMP2コンバーターの温度が高すぎます	周囲温度が高すぎます	<ul style="list-style-type: none"> デバイス周囲の温度を下げてください
		ファンがブロックされているか故障していません	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
		TMP2コンバーターが故障していません	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
E451	フォアラインポンプの温度予備警告	周囲温度が高すぎます	<ul style="list-style-type: none"> デバイス周囲の温度を下げてください
		周囲温度が低すぎます	<ul style="list-style-type: none"> デバイス周囲の温度を上げてください
		ファンがブロックされているか故障していません	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください
		フォアラインポンプの温度センサーが故障していません	<ul style="list-style-type: none"> カスタマサービスにご連絡ください

タイプ	メッセージ	考えられるエラーの原因	トラブルシューティング
W452	プリバキュームポンプとの通信がありません	制御ケーブルプリバキュームポンプが故障しているか未接続です	• カスタマサービスにご連絡ください
		プリバキュームポンプに電源が来ていません	• カスタマサービスにご連絡ください
		プリバキュームポンプのコンバーターが故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください
		VIボードかMSBが故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください
E453	プリバキュームポンプ故障	プリバキュームポンプからの未処理のエラーメッセージ	• カスタマサービスにご連絡ください
E454	フォアラインポンプのエラー：不足電圧	リークディテクターフォアラインポンプの電源入力電圧が低すぎます	<ul style="list-style-type: none"> • 付属の電源ケーブルを使用していることを確認してください • 電源装置の取付けは、有資格の電気技師に点検させてください。
		プリバキュームポンプのコンバーターが故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください
W455	プリバキュームポンプ回転数が低すぎます	プリバキュームポンプが起動していません	• カスタマサービスにご連絡ください
W456	フォアラインポンプの操作モードがロックされています	フォアラインポンプの周波数コンバーターポートP1のコネクタが故障または挿入していません	• カスタマサービスにご連絡ください

タイプ	メッセージ	考えられるエラーの原因	トラブルシューティング
E457	フォアラインポンプのエラー：電流遮断	リークディテクターフォアラインポンプの電源入力電圧に障害があります	<ul style="list-style-type: none"> • 付属の電源ケーブルを使用していることを確認してください • 電源ケーブルが損傷していないか目視点検してください • 電源装置の取付けは、有資格の電気技師に点検させてください。
W458	低温のためフォアラインポンプがスタートしません。危険に注意しつつポンプをスタートするため警告を消去します。	周囲温度が低すぎます	<ul style="list-style-type: none"> • デバイス周囲の温度を上げてください • リークディテクターを低温の屋外から高温の屋内に移動させた場合は、1時間以上経過してからリークディテクターの電源を投入してください
		フォアラインポンプの温度センサーが故障しています	<ul style="list-style-type: none"> • カスタマサービスにご連絡ください
		プリバキュームポンプのコンバーターが故障しています	<ul style="list-style-type: none"> • カスタマサービスにご連絡ください
W459	フォアラインポンプの起動時間が長すぎます	排ガス接続部が封止されています	<ul style="list-style-type: none"> • 排ガスホースが正しく接続されていることを確認してください
		フォアラインポンプが故障しています	<ul style="list-style-type: none"> • カスタマサービスにご連絡ください
W460	TMP2コンバーターとの通信がありません	TMP2ケーブルが故障しているか未接続です	<ul style="list-style-type: none"> • カスタマサービスにご連絡ください
		TMP2コンバーターが故障しています	<ul style="list-style-type: none"> • カスタマサービスにご連絡ください
		MSBの故障	<ul style="list-style-type: none"> • カスタマサービスにご連絡ください

タイプ	メッセージ	考えられるエラーの原因	トラブルシューティング
E461	未処理のTMP2エラーメッセージ	TMP2コンバーターが故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください
		TMP2が故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください
E462	TMP2ポンプの温度が高すぎます	周囲温度が高すぎます	• デバイス周囲の温度を下げてください
		ファンがブロックされているか故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください
		TMP2が故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください
E463	フォアラインポンプの温度エラー	周囲温度が高すぎます	• デバイス周囲の温度を下げてください
		ファンがブロックされているか故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください
		周囲温度が低すぎます	• デバイス周囲の温度を上げてください
		フォアラインポンプの温度センサーが故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください
E464	フォアラインポンプの消費電流が高すぎます	排ガス接続部が封止されています	• 排ガスホースが正しく接続されていることを確認してください
		過負荷運転	• カスタマサービスにご連絡ください
E465	フォアラインポンプ内の流動方向が正しくありません	排ガス接続部の過圧によるデバイスへのガスの流入	• 排ガス接続部の過圧を解消してください
E466	フォアラインポンプの起動エラー／回転数が低すぎます	排ガス接続部が封止されています	• 排ガスホースが正しく接続されていることを確認してください
		フォアラインポンプが故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください

タイプ	メッセージ	考えられるエラーの原因	トラブルシューティング
E467	フォアラインポンプの過負荷保護	排ガス接続部が封止されています	• 排ガスホースが正しく接続されていることを確認してください
		フォアラインポンプが故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください
W468	フォアラインポンプの未処理のエラーメッセージ	プリバキュームポンプからの未処理のエラーメッセージ	• カスタマサービスにご連絡ください
E500	圧力センサーp1が未接続です	圧力センサーが未接続かケーブルが故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください
		VIボードかMSBが故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください
E502	圧力センサーp2が未接続です	圧力センサーが未接続かケーブルが故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください
		VIボードかMSBが故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください
E504	圧力センサーp3が未接続です	圧力センサーが未接続かケーブルが故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください
		VIボードかMSBが故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください
E505	圧力センサーp4が未接続です	圧力センサーp4がVIボードに取り付けられていません	• カスタマサービスにご連絡ください
		VIボードかMSBが故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください

タイプ	メッセージ	考えられるエラーの原因	トラブルシューティング
W509	圧力センサーp5との通信なし	圧力センサーが未接続かケーブルが故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください
		VIボードかMSBが故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください
E520	圧力が高すぎる	圧力p2が15秒以上高すぎます	• カスタマサービスにご連絡ください
E521	加圧、陽極電圧が中断されました	圧力センサーp2で加圧、陽極電圧は中断されました	• カスタマサービスにご連絡ください
W522	加圧、エミッションフローが中断されました	圧力センサーp2で加圧、エミッションフローが中断されました	• カスタマサービスにご連絡ください
W540	キャピラリーの流量が少なすぎます。場合によってはリークが検出されないことがあります	フィルターが汚れています	• スニファーチップの中のフィルターを交換してください
		スニファーチップか毛细管がブロックされています	<ul style="list-style-type: none"> • スニファーチップのブロックを解決してください • できれば別のスニファーラインをご使用ください • カスタマサービスにご連絡ください
		ブロックされている細管の限界圧が高く設定されています	• 限界圧を確認して必要なら変更してください

タイプ	メッセージ	考えられるエラーの原因	トラブルシューティング
W541	毛細管の流量が大幅に少なすぎます! 場合によってはリークが検出されないことがあります	フィルターが汚れています	<ul style="list-style-type: none"> スニファーチップの中のフィルターを交換してください
		スニファーチップか毛細管がブロックされています	<ul style="list-style-type: none"> スニファーチップのブロックを解決してください できれば別のスニファーラインをご使用ください カスタマサービスにご連絡ください
		ブロックされている細管の限界圧が高く設定されています	<ul style="list-style-type: none"> 限界圧を確認して必要なら変更してください
W542	毛細管の流量が多すぎます	毛細管が破損しているか漏れています	<ul style="list-style-type: none"> できれば別のスニファーラインをご使用ください カスタマサービスにご連絡ください
		破損している毛細管の限界圧が低く設定されています	<ul style="list-style-type: none"> 限界圧を確認して必要なら変更してください
W559	リークレートが高すぎます。汚染防止のためスタンバイに切り替わりました。	サンプルかポートで試験品へ向かう大量の漏れが発生しています	<ul style="list-style-type: none"> リーク検知器と試験品の接続のリークを確認してください
		大量漏れ保護限界値の設定が低すぎます	<ul style="list-style-type: none"> 大量漏れ保護限界値を確認して必要なら変更してください
		アラーム音遅延時間の設定が短すぎます	<ul style="list-style-type: none"> アラーム音の遅延時間を確認して必要なら変更してください
W580	100 mbarに到達するまでの最大排出時間がアウトしました	サンプルかポートで試験品へ向かう大量の漏れが発生しています	<ul style="list-style-type: none"> リーク検知器と試験品の接続のリークを確認してください できれば別の試験品をご使用ください
		大量漏れ最大排出時間の設定値が低すぎます	<ul style="list-style-type: none"> 大量漏れ最大排出時間を確認して必要なら変更してください

タイプ	メッセージ	考えられるエラーの原因	トラブルシューティング
W581	測定モードまでの最大排出時間がアウトしました	サンプルカポートで試験品へ向かう大量の漏れが発生しています	<ul style="list-style-type: none"> リーク検知器と試験品の接続のリークを確認してください できれば別の試験品をご使用ください
		測定までの排出時間設定値が低すぎます	<ul style="list-style-type: none"> 測定までの排出時間を確認して必要なら変更してください
W618	I•BOOSTリークレートが予想より速く降下する（5秒メッセージ）	<p>接続されている真空システムに対する「I•BOOST時定数」が特定されていないか、あるいは「I•BOOST時定数」が特定され後に接続されている真空システムにおいて何かが変更された</p>	<ul style="list-style-type: none"> 「I•BOOST時定数」特定のための手順を再試行してください
W619	I•BOOSTリークレートが予想より速く降下する（30秒メッセージ）	<p>接続されている真空システムに対する「I•BOOST時定数」が特定されていないか、あるいは「I•BOOST時定数」が特定され後に接続されている真空システムにおいて何かが変更された</p>	<ul style="list-style-type: none"> 「I•BOOST時定数」特定のための手順を再試行してください
W625	内部校正リークのリークレートが設定されていません	EEPROMパラメーターがリセットされました	<ul style="list-style-type: none"> 内部校正リーク用の正しいリークレートを入力してください

タイプ	メッセージ	考えられるエラーの原因	トラブルシューティング
W630	校正リクエスト	運転モードか質量が変化しました	• 校正してください
		HYDRO•Sがオンになった（機能が利用可能な場合）	• 校正してください
		オートリークテストがアクティブで、テスト時間が変化しました	• 校正してください
		新しいSL3000スニフアーラインが接続されました（機能が利用可能な場合）	• 校正してください
		前回の校正以来ランタイムが30分超え温度変化が5 K	• 校正してください
		ランタイム30分超え過去24時間以内に校正なし	• 校正してください
W640	オートリークテスト: 連続テスト数が多すぎて失敗しました	リーク率閾値1が試験品に合っていません	• リーク率閾値1を確認して必要なら変更してください
		テストチャンバーが漏れています	• できれば別のテストチャンバーをご使用ください
W670	校正失敗(エミッションフローが中断されました)	校正中にエミッションがゼロになりました	<ul style="list-style-type: none"> • 校正をやり直した行ったときにメッセージがまた出るかどうかを確認してください • カスタマサービスにご連絡ください
W700	プリアンプ温度が低すぎます	周囲温度が低すぎます	• デバイス周囲の温度を上げてください
		温度センサーの不良	• カスタマサービスにご連絡ください

タイプ	メッセージ	考えられるエラーの原因	トラブルシューティング
W702	プリアンプ温度が高すぎます	周囲温度が高すぎます	• デバイス周囲の温度を下げてください
		エアフィルターが汚れています	• 換気スリットをクリーニングするかフィルタープレートを交換してください
		ファンがブロックされているか故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください
E709	MSB温度が低すぎる	周囲温度が低すぎます	• デバイス周囲の温度を上げてください
		温度センサーの不良	• カスタマサービスにご連絡ください
W710	MSB温度が高すぎます	周囲温度が高すぎます	• デバイス周囲の温度を下げてください
		エアフィルターが汚れています	• 換気スリットをクリーニングするかフィルタープレートを交換してください
		ファンがブロックされているか故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください
E711	MSB最大温度を超過	周囲温度が高すぎます	• デバイス周囲の温度を下げてください
		エアフィルターが汚れています	• 換気スリットをクリーニングするかフィルタープレートを交換してください
		ファンがブロックされているか故障しています	• カスタマサービスにご連絡ください
W901	メンテナンス: TMPベアリング/潤滑剤	TMPベアリング/潤滑剤のメンテナンス期限を過ぎました	• カスタマサービスにご連絡ください
W903	メンテナンス: 試験用リーク終了	試験用リークのメンテナンス期限を過ぎました	• カスタマサービスにご連絡ください
W904	メンテナンス: スニファーチップフィルター	スニファーチップフィルターのメンテナンス期限を過ぎました	• カスタマサービスにご連絡ください

タイプ	メッセージ	考えられるエラーの原因	トラブルシューティング
W910	メンテナンス: フォアラインポンプ	プリバキュームポンプのメンテナンス期限を過ぎました	• カスタマサービスにご連絡ください
W920	メンテナンス: 排出フィルター	エグゾーストフィルターのメンテナンス期限を過ぎました	• カスタマサービスにご連絡ください
W925	メンテナンス: エアフィルター	エアフィルターのメンテナンス期限を過ぎました	• カスタマサービスにご連絡ください

8 清掃およびメンテナンス

このセクションで説明するすべての清掃およびメンテナンスの作業は、デバイスのカバーを開かずに実施する必要があります！



⚠ 危険

感電死の危険

デバイス内部では高電圧が使用されています。電圧が印加されている部分に触れると死傷する危険性があります。

- ▶ 清掃およびメンテナンスの作業を行うときは、デバイスと電源との接続を切り離しておく必要があります。誤って電源が投入されないように、保護手段を講じておいてください。
- ▶ デバイスを分解しないでください！

8.1 ハウジングのクリーニング

ハウジングは湿らせた柔らかい布でふき取ります。

このとき、水以外の液体を使用しないでください。アルコール、グリースあるいはオイルを含んだ洗浄剤は使用しないでください。

8.2 ツールボックス内部のフィルターマットの交換

ツールボックスのフィルターマット	
必要な工具	なし

設置場所によっては、ツールボックス内部のフィルターマットが汚れることがあります。フィルターマットを定期的に点検し、汚れが確認できる場合はフィルターマットを交換します。

- ✓ 新しいフィルターマットを用意します。
 - 1 電源プラグを外し、デバイスが電源から切り離されていることを確認します。
 - 2 付属の鍵を使用して、ツールボックスを開きます。

- 3 プラスチックの枠を取り外します。枠は係止部のみで固定されています。



- 4 プラスチックの枠から使用済みエアフィルターを外し、新しいエアフィルターを取り付けます。
- 5 新しいエアフィルターを付けたプラスチックの枠を取り付けます。

8.3 デバイス底部のフィルターマットの交換

デバイス底部のフィルターマット	
必要な工具	ドライバー

フィルターマットを定期的に点検し、汚れが確認できる場合はフィルターマットを交換します。

✓ 新しいフィルターマットを用意します。

- 1 電源プラグを外し、デバイスが電源から切り離されていることを確認します。
- 2 デバイス底部正面のローレットネジを緩め、フィルターマットにアクセスします。



- 3 フィルターマットと共に金属プレートを取り外します。金属プレートを傾けることで容易に取り出せます。



- 4 フィルターマットを金属プレートに固定しているネジを外します。
- 5 フィルターマットを交換します。
- 6 新しいフィルターマットを金属プレートにネジ止めし、金属プレートを挿入してローレットネジで固定します。

8.4 スニファークリップSL200のフィルターの交換

スニファークリップの構造

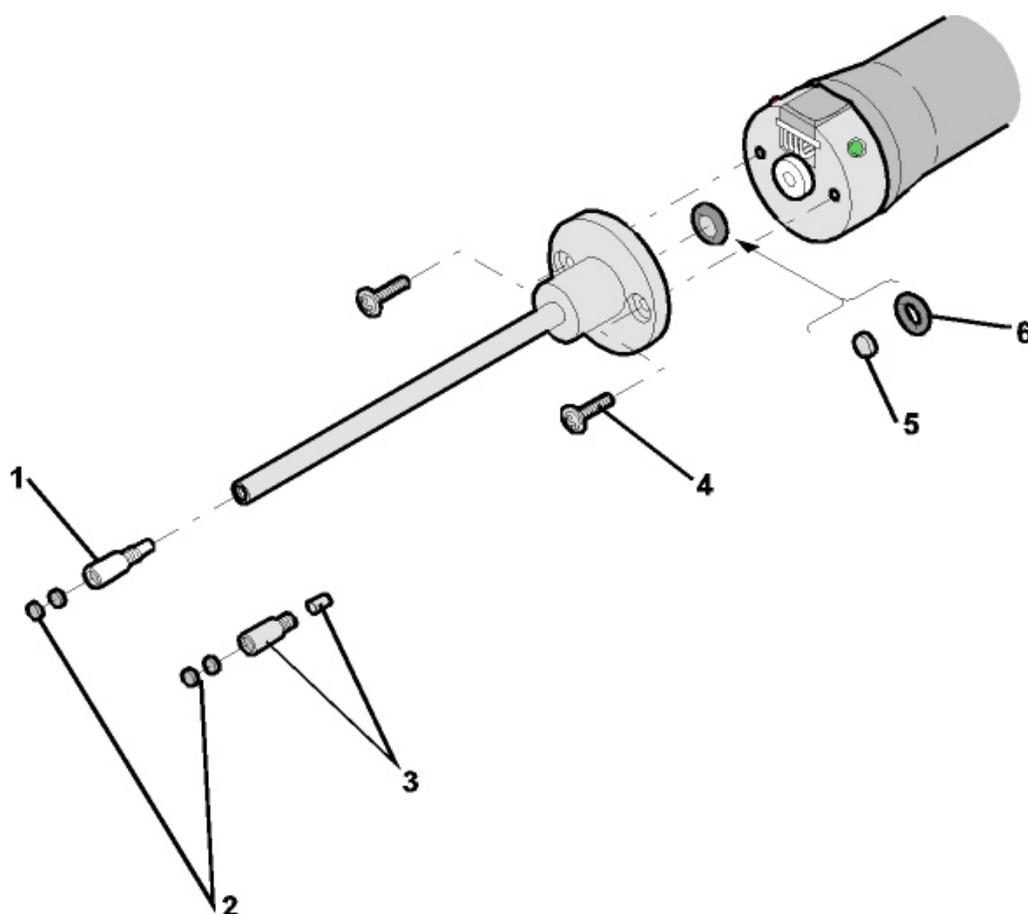


図 16: スニファークリップ

1	キャピラリーフィルター（プラスチック製：標準）	4	プラスチックネジ
2	フィルターパッド	5	焼結フィルター
3	キャピラリーフィルター（金属製、ガスケット付き：オプション）	6	Oリング

スニファークリップの詰まりの原因には次のような場合があります。

キャピラリーフィルターの詰まり -> フィルターパッドまたはキャピラリーフィルターを交換します。

焼結フィルターの詰まり -> 焼結フィルターを点検または交換します。

スニファークリップ内部のキャピラリーの詰まり -> スニファークリップを交換します。

スニファークリップの損傷 -> スニファークリップを交換します。

スニファーラインの損傷/詰まり -> SL 200を交換します。

フィルターパッドまたはキャピラリーフィルターの交換

- リークディテクターの電源を切る、またはスニファーラインをデバイスから取り外します。
- ピンセットを用いて汚れたフィルターパッドを取り出し、新品に交換します。

または

- キャピラリーフィルターを取り外し、新品と交換します。金属製キャピラリーフィルターの場合、ガスケットを忘れないようにしてください。

焼結フィルターの点検または交換

- 1 リークディテクターの電源を切る、またはスニファーラインをデバイスから取り外します。
- 2 2本のプラスネジを外します。
- 3 焼結フィルターとOリングを取り出します。
- 4 フィルターの汚れを目視で点検します。

⇒ 汚れがない、または軽微である場合は、焼結フィルターとOリングを引き続き使用できます。

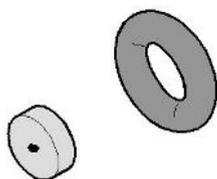


図 17: 汚れが軽微な焼結フィルター

⇒ 汚れが著しい場合は、焼結フィルターとガスケットを交換します。

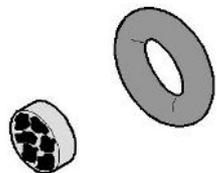


図 18: 汚れが著しい焼結フィルター

- 5 スニファーチップをネジで固定します。

⇒ スニファーラインは再度使用できます。

メンテナンスリクエストの表示が有効な場合は、任意のメンテナンス間隔を新たに設定します。「保守要求の有効化または無効化 [▶ 77]」および「スニファーチップフィルター」または「エアフィルター」の保守間隔の設定 [▶ 77] も参照してください。

8.5 スニファーラインSL3000のフィルターの交換

キャピラリーフィルターのフィルターパッドおよび防水チップの交換

プラスチック製キャピラリーフィルター、金属製キャピラリーフィルター、および防水チップはフィルターパッドを備えています。

金属製キャピラリーフィルターと防水チップにはシールガスケットがあります。

プラスチック製キャピラリーフィルターには、このガスケットが一体化されています。

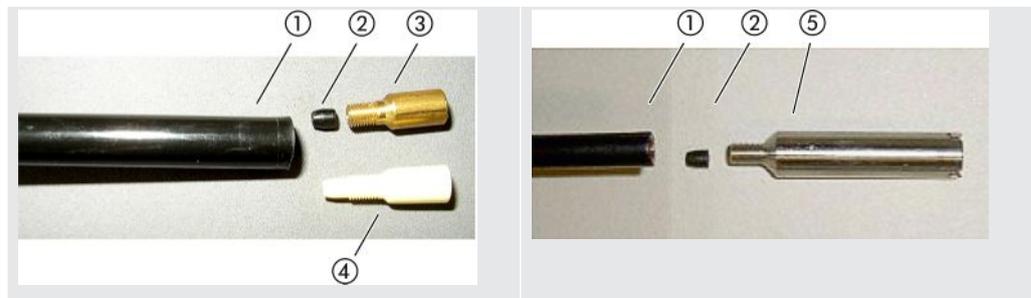


表 3: キャピラリーフィルター

1	スニファーラインの端部	4	プラスチック製キャピラリーフィルター
2	シールガスケット	5	防水チップ
3	金属製キャピラリーフィルター		

キャピラリーフィルターと防水チップはスニファーラインの端部に取り付けます。フィルターパッドは、同様に挿入されている小さい金属格子の前に挿入されています。

焼結フィルターは次の手順で交換します：

- 1 リークディテクターをオフします。
- 2 キャピラリーフィルターまたは防水チップを取り外します。シールガスケットを落とさないように注意してください。
- 3 古いフィルターパッドと金属格子を後方から押し出します。

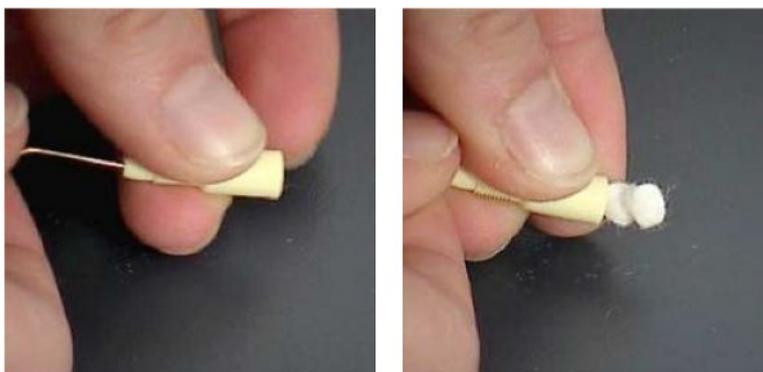


図 19: キャピラリーフィルターからフィルターパッドの押し出し

- 4 古いフィルターパッドを廃棄し、金属格子を清掃します。
- 5 フィルターの前方から金属格子を挿入した後、2個の新しいフィルターパッドも挿入します。金属格子とフィルターパッドが傾かないよう注意してください。
- 6 リークディテクターをオンします。
- 7 スニファーチップを指で閉じます。防水チップの場合は、側面の穴も塞ぎます。負圧になることを確認します。負圧にならない場合は漏れがあります。ネジ取付部を確認してください。シールガスケットが脱落している可能性があります。
- 8 メンテナンスリクエストの表示が有効な場合は、任意のメンテナンス間隔を新たに設定します。「保守要求の有効化または無効化 [▶ 77]」および「スニファーチップフィルター」または「エアフィルター」の保守間隔の設定 [▶ 77] も参照してください。

スニファーハンドルの 焼結フィルターはスニファーハンドルの中にあります。焼結フィルターは次の手順で
焼結フィルターの交換 交換します：

- 1 リークディテクターをオフします。
- 2 スニファーチップを固定している2本のプラスネジを外します。
- 3 焼結フィルターとOリングを取り外します。



図 20: スニファーハンドル内の焼結フィルター

- 4 フィルターの汚れを目視で点検します。
- 5 新しい焼結フィルターとOリングをフィルターチップの付け根に挿入します。
- 6 スニファーチップをネジで固定します。
- 7 リークディテクターをオンします。
- 8 スニファーチップを指で閉じます。負圧になることを確認します。負圧にならない場合は漏れがあります。スニファーチップおよびハンドルを確認してください。
- 9 必要に応じて任意のメンテナンス間隔を新たに設定します。「スニファーチップフィルター」または「エアフィルター」の保守間隔の設定 [▶ 77] も参照してください。

8.6 ガスポンベの取り付けまたは交換

オプションで利用可能なポンベホルダーを使用するときは、次の注意事項を守ってください：

⚠ 警告**可搬型リークディテクターのガスボンベの不適切な取り扱いによる負傷の危険**

- ▶ リークディテクターにボンベホルダーを取り付けるときは、別冊の取り付け説明書に記載されている一連の作業手順を遵守してください。
- ▶ ボンベホルダーのベースをガスボンベと同じ高さに取り付けます。
- ▶ 小～中型のボンベ（最大容量10リットル、保護キャップを含む最大寸法98 cm、200 bar）のみを使用し、リークディテクターの安定性が損なわれないように注意する必要があります。
- ▶ 付属のテンションストラップに目に見える損傷がないか確認してください。
- ▶ 常に両方のテンションストラップでボンベをボンベホルダーに固定してください。
- ▶ 接続されているスプレーホースに無理な力がかかっていないことを確認します。
- ▶ ガスボンベの取り扱いについては、製造元の安全に関する注意事項を遵守してください。

8.7 スクリーンショットの作成

デバイスの現在の画面表示を画像ファイルに保存できます。このファイルは、サービス時のコミュニケーションなどに利用できます。

- 1 USB フラッシュドライブ（FAT 32 フォーマット）に「Screenshots」という名称のフォルダーを作成します。
- 2 スクリーンショットを作成するには、リークディテクターの USB ポートに USB フラッシュドライブを接続します。「コントロールユニット [▶ 29]」の背面図も参照してください。
 - ⇒ スクリーンショットが自動的に作成され、USB フラッシュドライブのフォルダーに保存されます。日付と時刻も併せて保存されます。
- 3 別のスクリーンショットを作成するには、USB フラッシュドライブを USB ポートから取り外し、再度リークディテクターに接続します。
 - ⇒ すでに保存されているスクリーンショットが、別のスクリーンショットで上書きされることはありません。

8.8 デバイスの修理または修理の依頼



警告

有害物質による危険性

汚染されたデバイスは、健康にとって有害となる可能性があります。汚染申告は、デバイスに触れるすべての人を保護する役割を果たします。

- ▶ 汚染申告フォームのすべての項目を記入してください。

デバイス内部のメンテナンスは、メーカーのみが行うことができます。デバイスのメンテナンスは4,000時間ごと、または毎年の実施を推奨します。

修理またはメンテナンスのために、デバイスをINFICONに返送できます。詳細は、「メンテナンス、修理、または廃棄のためのデバイスの返却 [▶ 153]」を参照してください。

8.9 メンテナンスプラン

アセンブリー	メンテナンス作業	運転時間 [時間] / 期間 [年]					サービ スレベ ル	スペアパーツ 番号
		1500	4000	8000	16000	24000		
		1/4	1	2	3	4		
真空システム								
Agilent TS620	チップシールの交換			X ₁	X ₁	X ₁	III	200001671
	スクロールヘッドの交換				X ₁		III	200001665R
TMP SplitFlow 80	オイルリザーバーの交換			X ₃			II	200003801
	ベアリングの交換および オイルリザーバーの交換					X ₂	III	200003800 200003800R
バルブブロッ ク	バルブの清掃		X ₃	X	X	X	III	
	バルブシールの交換		X ₃	X	X	X	III	200007630
	バルブブロックの分解と 清掃			X ₃	X	X ₃	III	
	ベントおよびパージガス 配管のフィルターの交換		X ₃	X ₁	X ₁	X ₁	II	200000683 200001095
UL3000 の排気 フィルター	点検、排出	X	X	X	X	X	II、III	
	フィルターカートリッジ の交換			X ₁	X ₁	X ₁	II、III	200000694
電気系統								
冷却ファン	ファンおよび TMP のエア ブロー	X ₃	X ₁	X ₁	X ₁	X ₁	II	
	エアフィルターの点検、 必要に応じて交換	X ₃	X ₁	X ₁	X ₁	X ₁	I	200007656

**メンテナンスプランの
説明**

I	サービスレベルI：技術トレーニングを受けていないお客様
II	サービスレベルII：技術トレーニングを受けたお客様
III	サービスレベルIII認定INFICONサービス技術者
X	運転時間、または期間の経過時に実施
X ₁	時間制限なし、使用時間のみに基づく
X ₂	時間間隔に従ってメンテナンス作業を行う
X ₃	環境影響、使用条件、汚れ、塗布プロセスによる（オプション）

9 デコミッショニング

9.1 デバイスの廃棄

デバイスは、オペレータが廃棄するか、製造元へ送ることができます。このデバイスは、リサイクル可能な材質が使用されています。無駄を避けて環境を保護するには、このオプションを使用する必要があります。

地域の環境規制や安全規制に従った方法で廃棄してください。



デバイスは家庭ごみとして廃棄してはなりません。

9.2 メンテナンス、修理、または廃棄のためのデバイスの返却



警告

有害物質による危険性

汚染されたデバイスは、健康にとって有害となる可能性があります。汚染申告は、デバイスに触れるすべての人を保護する役割を果たします。返送番号と記入済みの汚染申告を添付せずにデバイスをご送付いただいた場合、INFICONは発送者にデバイスを返送いたします。

▶ 汚染申告フォームのすべての項目を記入してください。

- 1 デバイスを発送する前にメーカーへ連絡し、すべての項目を記入した汚染申告書フォームを送付してください。
⇒ その後、返送番号と返送先住所が送られてきます。
- 2 返送する際は、元の梱包材を使用してください。
- 3 デバイスを送付する前に、すべての項目に記入した汚染申告のコピーを梱包の外側に添付してください。

汚染申告については、下記を参照してください。

Declaration of Contamination

The service, repair, and/or disposal of vacuum equipment and components will only be carried out if a correctly completed declaration has been submitted. Non-completion will result in delay.
 This declaration may only be completed (in block letters) and signed by authorized and qualified staff.

1 Description of product

Type _____

Article Number _____

Serial Number _____

2 Reason for return

3 Operating fluid(s) used (Must be drained before shipping.)

4 Process related contamination of product:

toxic	no <input type="checkbox"/> 1)	yes <input type="checkbox"/>	
caustic	no <input type="checkbox"/> 1)	yes <input type="checkbox"/>	
biological hazard	no <input type="checkbox"/>	yes <input type="checkbox"/> 2)	
explosive	no <input type="checkbox"/>	yes <input type="checkbox"/> 2)	
radioactive	no <input type="checkbox"/>	yes <input type="checkbox"/> 2)	
other harmful substances	no <input type="checkbox"/> 1)	yes <input type="checkbox"/>	

2) Products thus contaminated will not be accepted without written evidence of decontamination!

The product is free of any substances which are damaging to health
 yes

1) or not containing any amount of hazardous residues that exceed the permissible exposure limits

5 Harmful substances, gases and/or by-products

Please list all substances, gases, and by-products which the product may have come into contact with:

Trade/product name	Chemical name (or symbol)	Precautions associated with substance	Action if human contact

6 Legally binding declaration:

I/we hereby declare that the information on this form is complete and accurate and that I/we will assume any further costs that may arise. The contaminated product will be dispatched in accordance with the applicable regulations.

Organization/company _____

Address _____ Post code, place _____

Phone _____ Fax _____

Email _____

Name _____

Date and legally binding signature _____ Company stamp _____

Copies:
 Original for addressee - 1 copy for accompanying documents - 1 copy for file of sender

10 アクセサリとインターフェース

10.1 アクセサリとスペアパーツ

以下の部品リストは別途注文できます。

バスモジュール	
BM1000 PROFIBUS	560-315
BM1000 PROFINET IO	560-316
BM1000 DeviceNet	560-317
BM1000 EtherNet/IP	560-318
I/Oモジュール	
IO1000 モジュール	560-310
データケーブル0.5 m	560-334
データケーブル5 m	560-335
データケーブル10 m	560-340
UL3000Fab用のSL200スニファライン	
SL200スニファライン、3.8 m長（UL3000 Fabデバイスに接続するには延長ケーブルが必要です）	14005
SL200の電気接続用延長ケーブル	551-205
SL200スニファラインおよび電気接続用延長ケーブル（セット）	551-210
UL3000 FabPLUS用のSL3000スニファライン	
ケーブルSL3000-3、長さ3 m	525-001
ケーブルSL3000-5、長さ5 m	525-002
ケーブルSL3000-10、長さ10 m	525-003
ケーブルSL3000-15、長さ15 m	525-004
スニファラインSL3000用ホルダー	551-203
システム統合用スニファライン（ロボットアプリケーション向け）	525-015
SL3000用スニファチップ	

スニファーチップ ST312、120 mm長、リジッド	12213
スニファーチップ FT312、120 mm長、フレキシブル	12214
スニファーチップ ST200、200 mm長、リジッド	12218
スニファーチップ FT250、250 mm長、フレキシブル	12266
スニファーチップ ST385、385 mm長、リジッド	12215
スニファーチップ FT385、385 mm長、フレキシブル	12216
スニファーチップ FT600、600 mm長、フレキシブル	12209
スニファーチップ、リジッド、500 mm、45° (ST 500)	12272

SL3000用のその他アクセサリ	
フィルターフェルト標準フィルターSL3xx、50個。	200001116
メタルバージョンのキャピラリーフィルター（1個）	12217
SL 300用の標準フィルター、5個セット。（プラスチック製キャピラリーフィルタ）	20003501
SL3xxへの内部フィルター、5個セット（Oリング付き焼結フィルタ）	20003500
防水チップ（1個）	122 46
SL3000ブラケット	551-203
リモートコントロールRC1000	
リモコンRC1000WL、ワイヤレス	551-015
リモコンRC1000C、有線	551-010
リモートコントロール用延長ケーブル	14022
その他	
ヘリウムボンベホルダー	551-201
テストチャンバーTC1000	
テストチャンバーTC1000	551-005
テストチャンバーTC1000の電気接続用延長ケーブル	551-205
ヘリウム用サーチガススプレーガン、ホース付き	16555

スニファーラインSL200

スニファーラインを使用すると、リークディテクタをスニファー法リークディテクタに簡単に変換できます。スニファーラインの長さは3.8 mです。

このスニファーラインを運転するには、電気接続用の延長ケーブルが必要です。

電源ケーブルまたはスニファーラインを巻き付けるためのフックの取り付け方法については、「アクセサリの接続 [▶ 53]」を参照してください。

スニファーラインSL3000

スニファーラインSL3000はリークディテクタの背面に接続されているため、運転モードを「スニファー」に変更する際に、リークディテクタ上部にあるインレットポートに接続された真空コンポーネントを取り外す必要はありません。スニファーラインは3、5、10または15 mの長さがあります。

電源ケーブルまたはスニファーラインを巻き付けるためのフックの取り付け方法については、「アクセサリーの接続 [▶ 53]」を参照してください。

ヘリウムボンベホルダー

ヘリウムボンベホルダーを使用すると、リークディテクタと一緒にスプレーガン付きヘリウムボンベを輸送することができます。デバイスの安定性を損なわずに適合するのは、小型から中型のボトル（最大10 l、200 bar）のみです。

設置手順は、ボンベホルダーに付属の別文書に記載されています。

リモートコントロールRC1000CおよびRC1000WL

RC1000Cリモートコントロールを使用すると、最大28 mのケーブルを介してリークディテクタを運転できます。

RC1000WL無線リモートコントロールを使用すると、最大100 m離れた場所でリークディテクタを運転できます。

リモートコントロールでは、START、STOP / VENT（STOP/バント）、ZERO（バックグラウンド）を制御できます。測定したリークレートは、バーグラフ、数値またはグラフとしてリモートコントロールのディスプレイ上に表示されます（RC1000の取扱説明書を参照してください）。

最大24時間の記録時間にわたって作成された測定値が、RC1000の内部メモリに保存されます。データはUSBフラッシュドライブに簡単に転送できます。

超過した場合に警告を発する内部セットポイントを設定できます。警告はディスプレイ上に表示されると共に、内蔵スピーカーまたは接続されたヘッドセットを介して警告音として出力されます。

リモートコントロールは堅牢なハウジングに収められており、人間工学に基づく優れた運転性を可能にしています。下部取り付けられたマグネットによって、金属面に水平または垂直に設置できます。



図 21: リモートコントロールRC1000WL



図 22: 送信機は、付属のベルクロテープでフリースポットに取り付けることができます。

リークディテクタからの無線リモートコントロールの検索

RC1000WLワイヤレスリモコンを置き忘れた場合は、このリモコンからUL3000FabまたはUL3000FabPLUSから音響信号をトリガーできます。

- 1  > セットアップ > アクセサリ > RC1000
- 2 「ページング要求」フィールドで設定「オン」を選択します。
⇒ リモートコントロールの信号音が鳴ります。
- 3 リモートコントロールを見つけた後に信号音を停止するには、「ページング要求」フィールドで「オフ」を選択します。

テストチャンバーTC1000

このテストチャンバーは、リークディテクターを気密コンポーネントの測定が可能な完全なワークステーションに変換します。また、MIL-STD 883規格に従って、測定を簡単かつ迅速、正確に実施できます。テストチャンバーの蓋を閉じるとすぐに、自動

的に測定が始まります。「オートリークテスト」メニューで、測定時間、不合格率などの測定パラメーターを設定できます。測定は自動的に行われ、結果はテストチャンバーにある赤色および緑色のLEDによって表示されます。

このテストチャンバーを操作するには、電気接続用の延長ケーブルが必要です。



図 23: テストチャンバーTC1000

10.2 I/Oモジュール

10.2.1 デバイスと I/O モジュールの接続

✓  スーパーバイザー権限

- 1 データケーブルを使用して、をデバイス背面の LD ポートに接続します。「アクセサリおよび制御信号接続部 [▶ 39]」を参照してください。
- 2  > セットアップ > アクセサリ > デバイス選択
- 3 「I/O モジュール」を選択します。
- 4  で保存します。

10.2.2 アナログ出力の設定

✓  スーパーバイザー権限

- 1  > セットアップ > アクセサリ > I/Oモジュール > アナログ出力の設定
- 2 「アナログ出力1」を設定します。
⇒ 「オフ」、「圧力 p1」、「圧力 p2」、「リークレート仮数」、「リークレート指数」、「リークレート線形」、「リークレート対数」、「リークレート仮数ヒステリシス」、「インターフェース経由」から選択できます。
- 3 「アナログ出力2」を設定します。
⇒ 「オフ」、「圧力 p1」、「圧力 p2」、「リークレート仮数」、「リークレート指数」、「リークレート線形」、「リークレート対数」、「リークレート仮数ヒステリシス」、「インターフェース経由」から選択できます。
- 4 「アナログ出力、スケーリング」を設定します。
⇒ 「0.5 V/decade」、「1 V/decade」、「2 V/decade」、「2.5 V/decade」、「3 V/decade」、「5 V/decade」、「10 V/decade」から選択できます。
- 5 「上限指数」を設定します。
- 6  で保存します。



「アナログ出力のスケーリング」および「指数上限」の設定は、選択した機能に応じて両アナログ出力に影響します。次の一覧表を参照してください。

アナログ出力の機能と割り当て：

OFF	アナログ出力をオフ (出力電圧 = 0 V)	
圧力 p1/圧力 p2	1~10 V、0.5 V / decade、 対数 1 V = 1×10^{-3} mbar	
リークレート仮数	1~10 V、線形、選択された 単位にて	もう一方のアナログ出力に「リークレート指数」を 割り当てた場合にのみ有効です。
リークレート指数	1~10 V、0.5 V / decade、 ステップ関数、 1 V = 1×10^{-12} 、選択した単 位にて	もう一方のアナログ出力に「リークレート仮数」ま たは「リークレート仮数ヒステリシス」を割り当て た場合のみ有効です。
リークレート線形	0~10 V、線形、 選択した単位にて	上限 (= 10 V) は、パラメーター「上限指数」により decade 全体にわたって設定します。下限値は常に0 (リークレート) であり、これは0 Vの出力電圧に対 応します。 この設定は、適切な出力機能が選択されている場合 は、両アナログ出力に適用されます。選択したリー クレート単位に応じて、絶対制限値は異なります。 また、制限値によって、選択した範囲もさらに狭く なる可能性があります。

リークレート対数。	0～10 V、対数、 選択した単位にて	<p>上限 (= 10 V) とスケーリング (V/decade) は、「上限指数」および「アナログ出力、スケーリング」パラメーターで設定します。</p> <p>例： 上限を 1×10^{-5} mbar l/s (= 10 V) に設定します。スケールを 5 V/decade に設定します。これにより、下限は 1×10^{-7} mbar l/s (= 0 V) となります。スロープ (V/decade) と共に上限 (10V 制限) の対数出力機能を設定できます。これにより、表示可能な最小値を得られます。次のスロープを選択できます：0.5、1、2、2.5、3、5、10 V/decade。設定されたスロープ値が高いほど、表示可能な範囲は小さくなります。上限は、両アナログ出力で共通です。選択したリークレート単位に応じて、絶対制限値は異なります。</p>
インターフェース経由	テストに対する出力電圧は、LD対数コマンド221で指定できます。	
リークレート仮数ヒステリシス	0.7～。10 V、線形、 選択した単位にて	<p>もう一方のアナログ出力に「リークレート指数」を割り当てた場合にのみ有効です。0.7～1.0の範囲で仮数の重なりがあることで、2つのdecade間での切り替えを防ぐことができます。0.7 Vはリークレート 0.7×10^{-x} に対応します。9.9 Vはリークレート 9.9×10^{-x} に対応します。</p>

10.2.3 デジタル入力の設定

これらの入力を使用して、プログラマブルコントローラー (Programmable Logic Controller) によるデバイスの操作が可能になります。

I/Oモジュールのデジタル入力PLC-IN 1～10には、使用可能な機能を任意に割り当てることができます。

– 信号ON：通常24 V

– 信号OFF：通常0 V

I/Oモジュールの24 V出力をアクティブ信号として使用できます。

どの機能も反転可能です。

✓  スーパーバイザー権限

- 1  > セットアップ > アクセサリー > I/Oモジュール > デジタル入力の設定
- 2 目的の「デジタル入力」を選択します。
⇒ 入力 PLC_IN 1~10 を選択できます。
- 3 目的の機能を選択します。次の表を参照してください。
- 4 目的のモードを選択します。
⇒ 「標準」モードまたは「反転」モードを選択可能です。
「反転」モードについて：次の表の「移行」欄に示された移行方向の矢印を反転させます。
- 5  で保存します。

機能	移行	説明
VENT	OFF → ON :	インレットをベントします（スタンバイ状態のみ）。
CAL	OFF → ON :	校正を開始します。
	ON → OFF :	バックグラウンドの値を適用して、校正を終了します。
No function	-	入力の機能はありません。未使用入力の設定を推奨します。
Clear	OFF → ON :	警告またはエラーメッセージを消去、または校正を中止します。
Sniff	OFF → ON :	スニファリングモードを有効にします。
	ON → OFF :	真空モードを有効にします。
Purge	OFF → ON :	パージをオンにします（スタンバイ状態のみ）。
	ON → OFF :	パージをオフにします（スタンバイ状態のみ）。
開始	OFF → ON :	測定モードに切り替えます。
開始/停止	OFF → ON :	測定モードに切り替えます。
	ON → OFF :	スタンバイに切り替えます。
停止	OFF → ON :	スタンバイに切り替えます。
ZERO	OFF → ON :	ZERO をオンにします。
	ON → OFF :	ZERO をオフにします。

10.2.4 デジタル出力の設定

I/Oモジュールのデジタル出力PLC-OUT 1~8には、使用可能な機能を任意に割り当てることができます。

✓  スーパーバイザー権限

1  > セットアップ > アクセサリ > I/Oモジュール > デジタル出力の設定

2 目的の「デジタル出力」を選択します。

⇒ 出力 PLC_OUT 1~8 を選択できます。

3 目的の機能を選択します。次の表を参照してください。

4 目的のモードを選択します。

⇒ 「標準」モードまたは「反転」モードを選択可能です。

「反転」モードについて：次の表の「開」状態と「閉」状態の説明をそれぞれ逆に置き換えてください。

5  で保存します。

機能	状態：	説明
Off (open)	開：	常に開
Ready for operation	閉：	エミッションはオン、校正プロセスは非アクティブ、エラーなし
	開：	エミッションはオフ、または校正プロセスがアクティブ、エラーなし
Emission on	閉：	エミッションがオン
	開：	エミッションがオフ
Error	閉：	エラーあり
	開：	エラーなし
Error or warning	閉：	エラーまたは警告あり
	開：	エラーまたは警告なし
Run-up	閉：	起動中
	開：	起動なし
Calibration request	閉：	外部校正器なし：校正が必要
		外部校正器または「校正確認」：「外部校正器を開くまたは閉じる」をリクエスト

機能	状態：	説明
	開：	リクエストなし：校正は不要
Calibration active	閉：	デバイスを校正する。
	開：	デバイスを校正しない。
Calibration stable	閉：	校正器による校正が完了
	開：	割り当てが不安定、または校正が非アクティブ
Cathode 2	閉：	フィラメント2がアクティブ
	開：	フィラメント1がアクティブ
Measuring	閉：	測定（ZERO は可能。リークレートに応じてすべてのセットポイント出力切り替え）
	開：	スタンバイまたはエミッションが無効（ZERO は不可。すべてのセットポイント出力は「リークレートセットポイント超過」を返す）
Open	開：	常に開
Sniff	閉：	動作モード「スニファー」がアクティブ
	開：	動作モード「真空」がアクティブ
Setpoint 1	閉：	測定されたリークレートがセットポイント1超過
	開：	測定されたリークレートがセットポイント1未満
Setpoint 2	閉：	測定されたリークレートがセットポイント2超過
	開：	測定されたリークレートがセットポイント2未満
Setpoint 3	閉：	測定されたリークレートがセットポイント3超過
	開：	測定されたリークレートがセットポイント3未満

機能	状態：	説明
Setpoint 4	閉：	測定されたリークレートがセットポイント4超過
	開：	測定されたリークレートがセットポイント4未満
Purge	閉：	パージバルブ開
	開：	パージバルブ閉
Vent	閉：	内部ベントバルブ開
	開：	内部ベントバルブ閉
Standby or evacuate	閉：	スタンバイ状態、または真空排気がアクティブ
	開：	測定中など、スタンバイ状態または真空排気が非アクティブ
Status calibration	閉：	校正器バルブ開
leak valve	開：	校正器バルブ閉
Warning	閉：	警告あり
	開：	警告なし
ZERO active	閉：	ZEROはオンにされています
	開：	ZEROはオフにされています。

10.2.5 I/Oモジュールプロトコルの設定

ASCIIプロトコルとLDプロトコルを切り替えます。

✓  スーパーバイザー権限

- 1  > セットアップ > アクセサリ > I/Oモジュール > I/Oモジュールプロトコル
- 2 設定します。
- 3  で保存します。

10.3 バスモジュール

デバイスまたはバスモジュール BM1000 に付属の USB フラッシュドライブには、バスモジュールに関するファイルが保存されています。「..\Manuals\Interface Description」フォルダーには、PROFIBUS用のGSDファイルも含まれています。INFICON のそれぞれバスモジュールについては、「アクセサリーとスペアパーツ [▶ 155]」も参照してください。

10.3.1 デバイスとバスモジュールの接続

リークディテクターとバスモジュールの接続は、次の手順で行います：

- 1 リークディテクターをオフします。
- 2 データケーブルを使用して INFICON バスモジュールをデバイスの LD ポートに接続します。「アクセサリーおよび制御信号接続部 [▶ 39]」を参照してください。
- 3 リークディテクターをオンします。
- 4  > 設定 > アクセサリー > デバイスの選択
- 5 デバイスとして「バスモジュール」を選択します。
- 6  で確定します。

10.3.2 バスモジュールのアドレス設定

フィールドバスアドレスの設定値を設定できます。PROFIBUS® ではノードアドレス、DeviceNet では MAC ID となります。

この設定は、Profinet および EtherNet/IP には関係ありません。

- 1  > 設定 > アクセサリー > バスモジュール
- 2 任意のアドレスを「バスモジュール」フィールドに入力します。
- 3  で確定します。

⇒ 設定された値はリークディテクター再起動後に適用されます。このため、電源を一旦オフし、再度オンします。

10.4 ネットワーク

10.4.1 ウェブブラウザを経由したリークディテクターの操作 (LAN)

注記

オペレーティングシステムは、USBまたはEthernetを経由して攻撃を受ける可能性があります。

リークディテクターに使用されているLinux OSは自動アップデートされないため、セキュリティホールが生じる可能性があります。こうした脆弱性により、リークディテクターのEthernetまたはUSBインターフェースを経由してシステムに不正にアクセスされる危険性があります。

- ▶ USBポート/Ethernetポートロックなどを用いて、これらのインターフェースへの不正アクセスを防止してください。
- ▶ 社内ネットワークの安全性を損なわないために、リークディテクターは外部インターネットに直接接続しないでください。これは無線LANやEthernet 経由でも同様です。
- ▶ このため、リークディテクターのウェブインターフェースにリモートでアクセスする場合は、暗号化された仮想プライベートネットワーク (VPN) による接続を推奨します。ただしこれは、第三者の提供するVPN接続の安全性を保証するものではありません。

10.4.1.1 リークディテクターのLAN接続の設定

✓  スーパーバイザー権限

1  > セットアップ > ネットワーク > LAN設定

⇒ またはメニューバーで  を押します。

2 「方法」フィールドで LAN 設定を選択します:

⇒ 無効: ネットワークケーブル (RJ45ソケット) が接続されていても、ネットワーク接続が確立されていません。

- ⇒ DHCP：リークディテクターは接続されているネットワークから自動的にIPアドレスを取得します。
- ⇒ 固定：ネットワークにリークディテクターに接続するために、IPアドレス、ネットワークマスク、ゲートウェイを手動で設定します。必要に応じてネットワーク管理者に確認してください。

3 ↓で保存します。

10.4.1.2 パソコンまたはタブレットのLAN接続の設定



LAN接続 – クイックスタート

次の手順を一度実行した場合、多くのデバイスでは、再使用時にIPアドレスを入力するだけで使用できます。

- ✓ パソコンとリークディテクターを同じネットワークに接続します。
- ✓ リークディテクターの設定においてLANの設定をセットアップします。「リークディテクターのLAN接続の設定 [▶ 169]」も参照してください。
- ✓ リークディテクターのIPアドレスを記録します。IPアドレスはリークディテクターの「診断 > 情報 > デバイス > ネットワーク」で確認できます。
- ✓ ウェブブラウザでJavaScriptを有効にします。ウェブブラウザはChrome™、Firefox®, またはSafari®の最新バージョンを推奨します。
- ▶ パソコンまたはタブレットのウェブブラウザからリークディテクターにアクセスするため、次のとおりリークディテクターのIPアドレスを入力します：

http://<IP アドレス>

 - ⇒ リークディテクターの現在有効なユーザーインターフェースが呼び出されます。
 - ⇒ パソコンまたはタブレットから、リークディテクターのタッチスクリーンと同じ機能が利用できます。

10.4.1.3 クライアントアクセスの許可

- ✓  スーパーバイザー権限

1  > セットアップ > ネットワーク > クライアントアクセス

- 2 パソコンまたはタブレットによるリークディテクターの操作を許可するには、「クライアントアクセス」オプションを有効にします。
 - ⇒ 「クライアントアクセス」オプションが無効の場合、パソコンまたはタブレットによるリークディテクターの操作はできません。無効の場合、設定を変更できません。
- 3 ↓で保存します。



接続しているすべてのクライアントの表示

- ✓ 「パソコンまたはタブレットのLAN接続の設定 [▶ 170]」を参照してください。
- ▶  > セットアップ > ネットワーク > 接続中のクライアント

10.4.2 ウェブブラウザを経由したリークディテクターの操作 (無線 LAN)

注記

オペレーティングシステムは、USBまたはEthernetを経由して攻撃を受ける可能性があります。

リークディテクターに使用されているLinux OSは自動アップデートされないため、セキュリティホールが生じる可能性があります。こうした脆弱性により、リークディテクターのEthernetまたはUSBインターフェースを経由してシステムに不正にアクセスされる危険性があります。

- ▶ USBポート/Ethernetポートロックなどを用いて、これらのインターフェースへの不正アクセスを防止してください。
- ▶ 社内ネットワークの安全性を損なわないために、リークディテクターは外部インターネットに直接接続しないでください。これは無線LANやEthernet経由でも同様です。
- ▶ このため、リークディテクターのウェブインターフェースにリモートでアクセスする場合は、暗号化された仮想プライベートネットワーク (VPN) による接続を推奨します。ただしこれは、第三者の提供するVPN接続の安全性を保証するものではありません。

無線LANを経由してデバイスのユーザーインターフェースにアクセスするには、無線LANアクセスポイントテクノロジーを備えた無線LAN対応USBアダプターをコントロールユニットの背面に接続します。

最低限必要な技術的要件：

- インターフェース：USB 2.0
- USBポート：タイプ A
- チップセット：RTL819xまたは同等品
- 対応モード：アクセスポイントクライアントモード

「EDIMAX EW-7612UAn V2」は、無線LANを備えたUSBアダプターであり、仕様を満足すると共にリークディテクターで使用できることを確認しています。



無線LAN接続は外乱を受ける可能性があります。接続の安定性は、範囲、遮蔽壁、その他の無線LANネットワーク、近傍に設置された干渉を引き起こす送信装置などの要因に依存します。

10.4.2.1 リークディテクターの無線LAN接続の設定

✓  スーパーバイザー権限

1  > セットアップ > ネットワーク > 無線LAN 設定

⇒ またはメニューバーで  を押します。

2 デバイスが無線LAN接続をサポートするように設定するには、「WLANを起動」オプションを有効にします。

3 「無線LAN名称 (SSID)」フィールドに任意のネットワーク名、「無線LANネットワークパスワード」に任意の「ネットワークパスワード」をそれぞれ入力します。

⇒ 「無線LAN名称 (SSID)」および「無線LANネットワークパスワード」には次の値が事前設定されています：「UL Series」または「INFICONUL」。ネットワークパスワードは最低8文字以上で設定します。

ネットワークパスワードは文字として表示されず、すべての文字がドットに置き換えられます。文字を表示する場合は、入力フィールドの後ろの  記号から表示方法を変更できます。

4 ↓で保存します。

- ⇒ 無線LAN対応USBアダプターを接続すると、自動的にアクセスポイントとして起動します。USBアダプターを接続していなくても、リークディテクターの無線LAN接続を設定できます。

10.4.2.2 パソコン または タブレットの無線LAN接続の設定



無線LAN接続 – クイックスタート

これらの事前設定をすでに完了している場合、多くのデバイスではURLを入力するだけで使用できます。

- ✓ 無線LANアクセスポイントテクノロジーを備えた無線LAN対応USBアダプターをリークディテクターのUSBポートに接続します。「コントロールユニット [▶ 29]」を参照してください。
 - ✓ リークディテクターの設定において、「有効」オプションを有効にします。リークディテクターの無線LAN接続の設定 [▶ 172] を参照してください。
 - ✓ クライアント側で、無線LAN接続を自動認識します。
 - ✓ 古いデバイスでは、暗号化としてWPA2のセットアップが必要になることがあります。
 - ✓ ウェブブラウザでJavaScriptを有効にします。ウェブブラウザはChrome™、Firefox®、またはSafari®の最新バージョンを推奨します。
 - 1 パソコンまたはタブレットの無線LAN設定で、リークディテクターの無線LANの接続が確立されていることを確認します。
 - 2 リークディテクターが無線LANと接続されていない場合は、リークディテクターの無線LANを選択し、必要に応じてネットワークパスワードを入力します。「リークディテクターの無線LAN接続の設定 [▶ 172]」を参照してください。
 - 3 パソコンまたはタブレットのウェブブラウザを経由してリークディテクターにアクセスするためのURL：
ul.inficon.com
- ⇒ リークディテクターの現在有効なユーザーインターフェースが呼び出されません。

- ⇒ パソコンまたはタブレットから、リークディテクターのタッチスクリーンと同じ機能が利用できます。

10.4.2.3 クライアントアクセスの許可

✓  スーパーバイザー権限

1  > セットアップ > ネットワーク > クライアントアクセス

2 リークディテクタをパソコンまたはタブレットで運転できるようにするには、「クライアントアクセス」オプションを有効にします。

- ⇒ 「クライアントアクセス」オプションが有効でない場合、パソコンまたはタブレットからリークディテクタを運転できません。その場合、設定を変更できません。

3  で保存します。



すべての接続クライアントの表示

- ✓ リークディテクタと1つ以上のパソコンまたはタブレット間のネットワーク接続が確立されていること。「パソコンまたはタブレットの無線 LAN 接続の設定 [▶ 173]」を参照してください。

▶  > セットアップ > ネットワーク > 接続クライアント

11 付録

11.1 メニューパス

ナビゲーションボタンを押すと、どのメニューまたはサブメニューを開いていたかを問わず、測定画面に戻ります。

11.1.1 診断

- 1  > 確認済みの警告
⇒ 有効な場合のみ表示されます。
- 2  > エラーおよび警告
⇒ 有効な場合のみ表示されます。
- 3  > 測定データ > データ記録
- 4  > 測定データ > データベース情報
- 5  > 測定データ > 測定サイクル
- 6  > 測定データ > 測定データのエクスポート
- 7  > アップデート > アップデート、デバイスの操作
- 8  > アップデート > アップデート、デバイスの操作 > エキスパートアップデート、デバイスの操作
- 9  > アップデート > アップデート、本体
- 10  > アップデート > アップデート、本体 > エキスパートアップデート、本体
- 11  > 真空系統図
- 12  > ログ > 結果ログのエントリー数
- 13  > ログ > メンテナンスログ
- 14  > ログ > エラーおよび警告
- 15  > ログ > 校正ログ
- 16  > 再生

11.1.2 設定

- 1  > 表示 > 一般的な表示の設定
- 2  > 表示 > バーグラフ
- 3  > 表示 > 円グラフ
- 4  > 表示 > 線グラフ
- 5  > 表示 > モニターを切り替える
- 6  > オーディオ
- 7  > ユーザーアカウント > ログアウト
- 8  > ユーザーアカウント > 自動ログインの管理
- 9  > ユーザーアカウント > ユーザーアカウントを管理
- 10  > ユーザーアカウント > 自分のPINを変更
- 11  > ユーザーアカウント > 自分の言語を変更
- 12  > ユーザーアカウント > お気に入り
- 13  > 運転モード
- 14  > セットアップ > 一般 > 通知
- 15  > セットアップ > 一般 > 日付および時刻
- 16  > セットアップ > 一般 > 単位設定
- 17  > セットアップ > 一般 > リセットする
- 18  > セットアップ > データ記録
- 19  > セットアップ > 測定 > 圧力限界
- 20  > セットアップ > 測定 > HYDRO•S
- 21  > セットアップ > 測定 > 質量
- 22  > セットアップ > 測定 > 校正リーク
- 23  > セットアップ > 測定 > スニファリング > 校正モニター
- 24  > セットアップ > 測定 > スニファリング > SL3000スニファークライン
- 25  > セットアップ > 測定 > 保護
- 26  > セットアップ > 測定 > その他
- 27  > セットアップ > 測定 > 真空 > 真空範囲

- 28  > セットアップ > 測定 > 真空 > 自動リークテスト
- 29  > セットアップ > 測定 > 真空 > パージ
- 30  > セットアップ > 測定 > 真空 > ベント
- 31  > セットアップ > 測定 > ZEROおよびフィルター
- 32  > セットアップ > ネットワーク > クライアントアクセス
- 33  > セットアップ > ネットワーク > LAN設定
- 34  > セットアップ > ネットワーク > 接続クライアント
- 35  > セットアップ > ネットワーク > 無線LAN 設定
- 36  > セットアップ > 保守要求
- 37  > セットアップ > メンテナンスカウンター
- 38  > セットアップ > アクセサリー > バスモジュール
- 39  > セットアップ > アクセサリー > デバイス選択
- 40  > セットアップ > アクセサリー > I/Oモジュール > I/Oモジュールプロトコル
- 41  > セットアップ > アクセサリー > I/Oモジュール > アナログ出力の設定
- 42  > セットアップ > アクセサリー > I/Oモジュール > デジタル出力の設定
- 43  > セットアップ > アクセサリー > I/Oモジュール > デジタル入力の設定
- 44  > セットアップ > アクセサリー > RC1000
- 45  > パラメーターセット > パラメーターリスト
- 46  > パラメーターセット > パラメーターセットを管理
- 47  > セットポイント

11.1.3 情報

- 1  > アセンブリー > イオンソース
- 2  > アセンブリー > TMP
- 3  > アセンブリー > フォアラインポンプ
- 4  > アセンブリー > プリアンプ
- 5  > エネルギー > 皮相電力
- 6  > エネルギー > 電圧 (1)
- 7  > エネルギー > 電圧 (2)

- 8 ⓘ > デバイス > 運転時間
- 9 ⓘ > デバイス > MSB
- 10 ⓘ > デバイス > ネットワーク
- 11 ⓘ > デバイス > 識別
- 12 ⓘ > ヘルプ > エラーおよび警告
- 13 ⓘ > HYDRO•S
- 14 ⓘ > 校正
- 15 ⓘ > 測定値 > ランタイム
- 16 ⓘ > 測定値 > リークレートおよび圧力
- 17 ⓘ > 測定値 > 温度
- 18 ⓘ > スニファーライン
- 19 ⓘ > アクセサリー > バスモジュール
- 20 ⓘ > アクセサリー > I/Oモジュール

11.2 EU適合宣言



EU Declaration of Conformity

We – INFICON GmbH - herewith declare that the products defined below meet the basic requirements regarding safety and health and relevant provisions of the relevant EU Directives by design, type and the versions which are brought into circulation by us.

In case of any products changes made without our approval, this declaration will be void

The products meet the requirements of the following Directives:

- **Directive 2014/35/EU (Low Voltage)**
- **Directive 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility)**
- **Directive 2006/42/EC (Machinery)**
- **Directive 2011/65/EC (RoHS)**

Designation of the product:

Helium Leak Detector

Applied harmonized standards:

- **DIN EN 61010-1:2011**
- **DIN EN 61326-1:2013**
Class A according to EN 55011
- **DIN EN ISO 12100:2010**
- **DIN EN 50581:2013**

Models:

UL3000 Fab

UL3000 Fab PLUS

Catalogue numbers:

550-200

550-250

Authorised person to compile the relevant technical files:

René Bausch, INFICON GmbH, Bonner Strasse 498, D-50968 Cologne

Cologne, August 03rd, 2017

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D. Döbler'.

Dr. Döbler, President LDT

Cologne, August 03rd, 2017

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Bausch'.

Bausch, Research and Development

INFICON GmbH

Bonner Strasse 498
D-50968 Cologne
Tel.: +49 (0)221 56788-0
Fax: +49 (0)221 56788-90
www.inficon.com
E-mail: leakdetection@inficon.com

11.3 RoHS

Restriction of Hazardous Substances (China RoHS)

有害物质限制条例（中国 RoHS）

UL3000 Fab, UL3000 Fab PLUS: Hazardous Substance UL3000 Fab, UL3000 Fab PLUS: 有害物质						
Part Name 部件名称	Lead (Pb) 铅	Mercury (Hg) 汞	Cadmium (Cd) 镉	Hexavalent Chromium (Cr(VI)) 六价铬	Polybrominated biphenyls (PBB) 多溴联苯	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) 多溴联苯醚
Assembled printed circuit boards 组装印刷电路板	X	O	O	O	O	O
Valve 阀门	X	O	O	O	O	O

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.

本表是根据 SJ/T 11364 的规定编制的。

O: Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

O: 表示该部件所有均质材料中所含的上述有害物质都在 GB/T 26572 的限制要求范围内。

X: Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

X: 表示该部件所使用的均质材料中，至少有一种材料所含的上述有害物质超出了 GB/T 26572 的限制要求。

(Enterprises may further provide in this box technical explanation for marking “X” based on their actual circumstances.)

(企业可以根据实际情况，针对含“X”标识的部件，在此栏中提供更多技术说明。)

索引

アイコン

運転モード「真空」	23	真空レンジ	
汚染申告	153	測定のために有効化	82
温度値の表示	105	真空排気時間グロスリーク	76
音量の変更	74	真空排気時間測定値	76
外部校正リークの設定	86	真空範囲	
機能の説明	23	FINE	87
起動	63	GROSS	87
技術データ	40	MASSIVE	87
権限	64	ULTRA	87
言語の設定	66	圧力限界の変更	87
個人設定の変更	66	清掃作業	141
工場出荷時設定	42	操作	
工場出荷時設定へのリセット	116	パソコン、タブレット	173
校正		操作オプション	79
外部校正	95	装置係数	85
初期位置	94	測定データ	
大気中のヘリウムによる	96	エクスポート形式	100
内部校正	95	ネットワーク経由のエクスポート	102
校正の確認	96	単位の変更	73
校正リークのテスト	97	追加機能を有効にする	112
校正リクエスト	78	通知	80
再生	90	動作モード「スニファー」	24, 81
最大リークレートの表示	31	動作モード「自動リークテスト」	81
自動リークテスト		動作モード「真空」	81
結果の表示	72	動作モードの選択	81
動作モードの選択	81	排気	37, 57
自動ログイン		返送	150, 153
スイッチオフ	67	保守間隔	
電源投入	67	エアフィルター	77
真空ダイヤグラム	114, 175	スニファーチップフィルター	77
		保守要求	77
		無線LAN	172

クライアントアクセスの許可	171
パソコンまたはタブレットの設定	173
リークディテクターの設定	172
有効にする	112
用語の定義	11

H

HYDRO•S

使用	85
設定	84
定義	23

I

I/Oモジュール	161
----------	-----

L

LAN	169
クライアントアクセスの許可	171, 174
パソコンまたはタブレットの設定	170
リークディテクターの設定	169

O

Operator	64
----------	----

P

Proof	96
-------	----

Q

Qmax	31
------	----

R

RC1000 WLの検索 (ページング)	159
----------------------	-----

S

Supervisor	64, 67
------------	--------

U

User	64
------	----

W

WLAN

クライアントアクセスの許可	174
---------------	-----

Z

ZERO	98
ボタン	32
工場出荷時設定	88

あ

アルゴンの真空排気

各種真空範囲の圧力限界	87
-------------	----

う

ウェブブラウザ	172
---------	-----

お

オーディオ設定の変更	74
オートリークテスト	
運転モード (定義)	25
設定	83

か

ガスの選択	81
-------	----

す

スイッチオフ	116	削除する	109
スクリーンショットの作成	149	読み込み	109
スニファークライン			
フィルターの交換	144	ふ	
圧力監視	94	フィルター付き O リング	37
スニファークライン SL200 の接続	24		
スニファークライン SL3000 の接続	24	へ	
スニファークライン SL200	157	ヘリウムボトル用ボンベホルダー	158
スニファークライン SL200 の接続	37	ベント	89
スニファークライン SL3000	158	ベントモードの選択	89
せ		め	
セットポイントの設定	81	メンテナンス	141
ゼロ点測定	96		
そ		も	
ソフトウェア		モニターの切り替え	113, 114
動作ユニットのアップデート	110		
本体ユニットのアップデート	111	ゆ	
		ユーザープロファイル	
		作成	65
た		削除する	65
タッチスクリーン	30, 34	読み込み	65
記号	34	編集	65
て		ら	
テストチャンバー TC1000	159	ランタイムの表示	105
は		り	
バスモジュール	168	リークレートおよび圧力の表示	105
バックグラウンドのリークレートを表示	72	リモートコントロール RC1000	158
バックグラウンド信号	12	リモートコントロールの検索 (ページング)	159
バックグラウンド抑制	12, 91, 92		
パラメーターセット			



Due to our continuing program of product improvements, specifications are subject to change without notice.
The trademarks mentioned in this document are held by the companies that produce them.